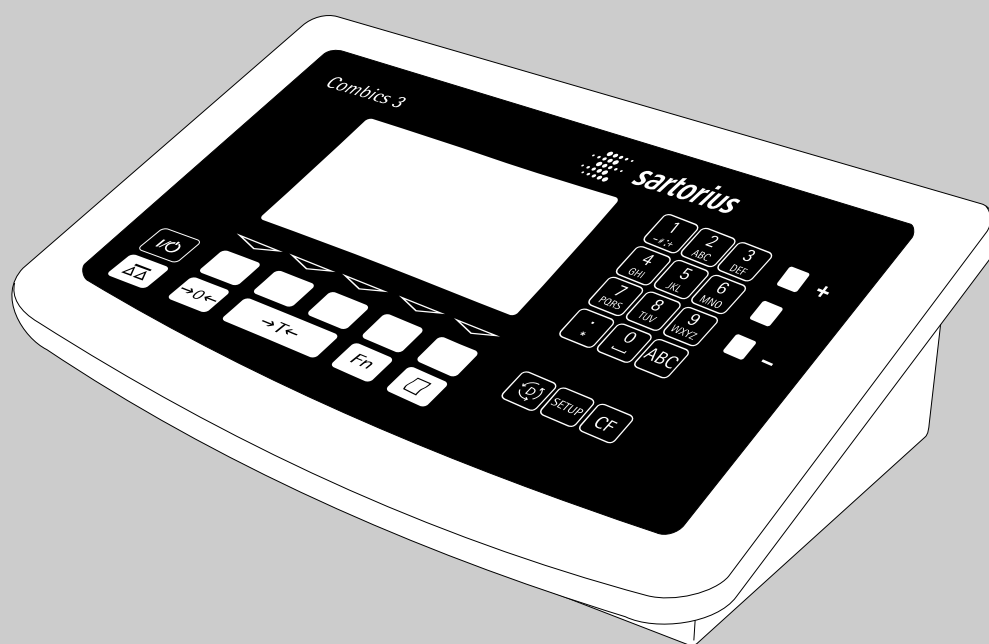


Istruzioni per l'uso

# Sartorius Combics 3

Modelli CISL3 | CIS3

Indicatori



# Uso previsto

Combics 3 è un indicatore robusto e preciso che fornisce risultati di pesata affidabili per i complessi compiti di controllo della qualità che si effettuano quotidianamente. Lo strumento ha un alloggiamento in acciaio inossidabile ed è facile da usare. Altre caratteristiche:

- Grandi tasti con chiara sensazione di pressione
- Immissione alfanumerica
- Grande display retroilluminato, completamente grafico a matrice di punti
- Guida dell'utente con commenti testuali
- Attacchi per due piattaforme di pesata
- Inizializzazione automatica all'accensione
- Taratura automatica quando si pone un carico sulla bilancia
- Possibilità di comando tramite computer esterno

Vantaggi per il lavoro quotidiano:

- Tempi di risposta brevi
- Impiego indipendente dal luogo di installazione della piattaforma di pesata
- Identificazione dei campioni di pesata mediante 4 codici alfanumerici
- Diverse interfacce per un utilizzo versatile
- Sicurezza grazie alla protezione con password
- Facile pulizia e disinfezione

## Simboli

In questo manuale di istruzioni sono impiegati i seguenti simboli:

- Indica le operazioni richieste per un corretto utilizzo
- Indica le operazioni da eseguirsi solo in certe condizioni
- > Descrive l'effetto di un'operazione
- △ Indica un pericolo

## Consulenza applicativa/Linea diretta

Per una consulenza sull'uso di queste applicazioni, prego contattare la filiale Sartorius Italia. L'indirizzo si trova sul sito Internet [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

---

# Indice

2	<b>Uso previsto</b>	60	<b>Service</b>
3	<b>Indice</b>	60	Attivazione del modo di service
4	<b>Istruzioni di sicurezza e avvertenza</b>	61	Configurazione del convertitore A/D
5	<b>Messa in funzione</b>	64	Menù di service
5	Equipaggiamento fornito	75	Dati geografici
5	Consigli per l'installazione	81	Calibrazione, regolazione, linearizzazione, precarico
6	Visione d'insieme dello strumento	97	<b>Messaggi di errore</b>
8	Collegamento alla rete	98	<b>Cura e manutenzione</b>
9	Montaggio dell'adattatore per la verifica per l'impiego in metrologia legale	98	Riparazioni
9	Collegamento dell'unità di batterie ricaricabili esterne	98	Pulizia
9	Collegamento di un lettore di codici a barre	98	Controllo di sicurezza
10	<b>Sistema di funzionamento</b>	98	<b>Smaltimento</b>
10	Ingresso dei dati	99	<b>Prospetto</b>
12	Modi di visualizzazione/Display	99	Dati tecnici
14	<b>Impostazioni</b>	100	Dimensioni (disegni quotati)
14	Impostazione della lingua	101	Accessori
15	Navigazione nel Setup (esempi)	104	Dichiarazioni di conformità
16	Protezione del Setup con password	106	Certificato di Approvazione CE del tipo
17	Stampa dei parametri impostati	108	Etichette e sigilli
18	Prospetto del Setup (parametri)		
28	<b>Funzionamento</b>		<b>Allegato</b>
28	Modo di misurazione		Password generale
28	Pesata $\overline{\Delta\Delta}$		Manuale per la verifica di strumenti per pesare
29	Parametri dello strumento		
30	Pesata con taratura		
31	Pesata con immissione numerica		
33	Pesata con valori di tara misti		
35	Identificazione individuale (identificatore)		
38	Calibrazione e regolazione		
41	Uscita dei dati		
43	Interfaccia dati		
45	Impostazione dell'uscita dei dati SBI		
46	Configurazione dell'emissione a stampa		
48	Esempi di protocolli		
51	Formato dei dati in uscita		
52	Funzioni della «tastiera esterna» (tastiera di un PC)		
53	Formato dei dati in ingresso		
54	Schema di assegnazione dei pin		
58	Schema di collegamento		

# Istruzioni di sicurezza e avvertenza

## Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare possibili danni.
- ⚠ Non impiegare lo strumento in aree a pericolo di esplosione.
- ⚠ Lo strumento può essere aperto solo dai tecnici qualificati del servizio post-vendita che applicano gli standard Sartorius.
- ⚠ Staccare lo strumento dalla rete elettrica prima di collegare o scollegare strumenti periferici.
- ⚠ In condizioni ambientali che richiedono maggiori standard di sicurezza, bisogna conformarsi alle prescrizioni contenute nei regolamenti specifici per l'installazione vigenti nel Paese.

## Installazione

- Attenzione nell'usare cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o di uso comune, questi hanno spesso un'assegnazione dei pin non adatta per gli strumenti Sartorius. Controllare l'assegnazione in base agli schemi di collegamento e staccare le linee che differiscono.
- ⚠ Usare soltanto cavi di prolunga conformi alle norme e dotati di un conduttore di messa a terra. È vietato togliere il conduttore di messa a terra.
- ⚠ Se lo strumento o il cavo di rete presenta dei danni: staccare lo strumento dalla tensione di rete e assicurare lo strumento contro un eventuale utilizzo.
- Utilizzare solo accessori e opzioni Sartorius poiché sono adattati in modo ottimale alla bilancia. Non ricorrere a soluzioni fai-da-te. L'utente risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all'equipaggiamento così come della realizzazione di collegamenti con cavi o dispositivi di altri costruttori ed è tenuto ad eseguire i dovuti controlli. Su richiesta, Sartorius mette a disposizione informazioni riguardanti le caratteristiche minime di funzionamento degli apparecchi (secondo le norme sull'immunità ai disturbi).
- Nel caso sorgessero dei problemi con lo strumento contattare l'Assistenza Tecnica Sartorius o il Vostro rivenditore.

## Livello di protezione IP

- I modelli CSL soddisfano il livello di protezione IP44 (con l'opzione L1: IP65); i modelli CIS soddisfano il livello di protezione IP67.
- Il livello di protezione IP65/67 dell'indicatore viene garantito solo se è montata la guarnizione di gomma e la spina è ben inserita (inclusi tutti i tappi di chiusura). L'installazione di piattaforme di pesata deve essere eseguita e controllata da un tecnico specializzato.
- Per l'installazione successiva di una porta d'interfaccia o di un'unità di batterie ricaricabili, conservare i tappi protettivi. Proteggere l'interfaccia con il tappo o accessori simili contro vapori, umidità e sporco.

## Impiego dello strumento in metrologia legale

- Se l'indicatore è collegato ad una piattaforma di pesata e lo strumento per pesare che ne risulta deve essere sottoposto alla verifica, si devono osservare le disposizioni relative alla verifica. Leggere e osservare le indicazioni contenute nel CD allegato «Manuale per la verifica di strumenti per pesare». Se si collegano piattaforme di pesata Sartorius, osservare le indicazioni date nel certificato di conformità che contiene un elenco dei campi di pesata approvati.
- In caso di rottura di uno dei sigilli applicati al momento della verifica, si devono osservare le leggi e regolamenti nazionali in vigore. In alcuni Paesi l'intero equipaggiamento deve essere verificato nuovamente.

# Messa in funzione

## Disimballaggio

- Dopo aver disimballato lo strumento controllare subito eventuali danni visibili
- In caso di danni, vedi il capitolo «Cura e manutenzione», sezione «Controllo di sicurezza».
- Conservare tutte le parti dell'imballaggio per un'eventuale rispedizione dello strumento. Prima della spedizione, staccare tutti i cavi!

## Equipaggiamento fornito

- Indicatore
- Manuale d'istruzioni per l'uso
- Speciali accessori (opzioni) elencati nella bolletta di consegna

## Operazioni per la messa in funzione

- 1) Collegamento della piattaforma di pesata all'indicatore Combics: vedi pagine successive
- 2) Configurazione del convertitore A/D: vedi il capitolo «Service»
  - Versione per la metrologia legale/Versione standard
  - Campo di pesata, precisione di lettura
  - Peso di regolazione
  - mV/V/immissione dei dati geografici
  - Linearizzazione, regolazione
- 3) Regolazione della piattaforma di pesata: vedi il capitolo «Funzionamento», sezione «Regolazione»
- 4) Impostazione del programma applicativo: vedi manuale dei programmi applicativi allegato
- 5) Collegamento delle interfacce, della stampante oppure della memoria Alibi: Per il modello CISL: direttamente alla porta a 25 pin  
Per il modello CIS: vedi pagina 57 segg.
- 6) Attivazione delle interfacce, della stampante oppure della memoria Alibi mediante impostazione nel Setup:
  - Per COM 1/2 e UNICOM
  - Impostazione del protocollo di stampa
  - Campi e righe di stampa per la stampante corrispondente

## Installazione

Per l'installazione evitare le seguenti condizioni ambientali sfavorevoli:

- Calore forte (riscaldamento, irraggiamento solare)
- Correnti d'aria dirette provenienti da porte, finestre aperte
- Forti vibrazioni durante le operazioni di pesata
- Umidità estrema

## Acclimatazione

L'umidità dell'aria può condensarsi sulle superfici dello strumento quando da freddo viene portato in un ambiente più caldo. Acclimatare lo strumento staccato dalla rete per circa 2 ore a temperatura ambiente.

## Non impiego

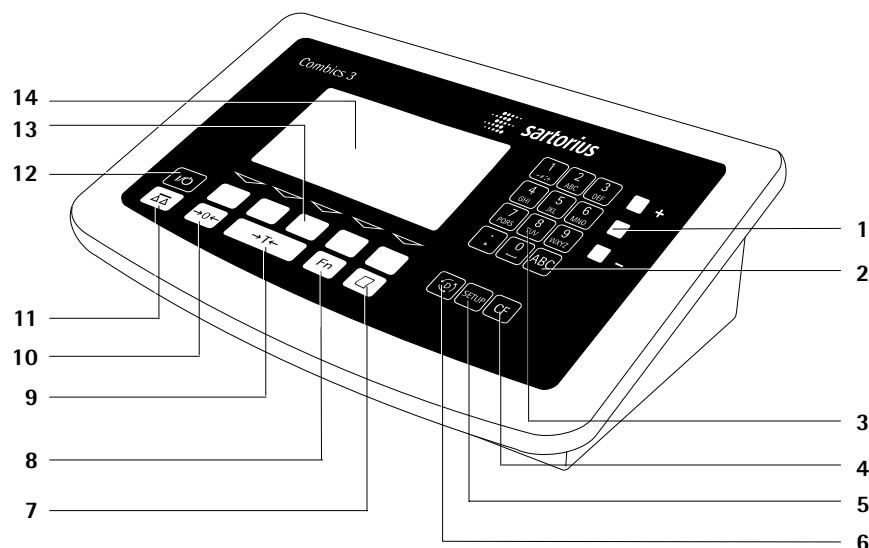
Spegnere lo strumento se non viene usato.

## Sigillo sulle versioni omologate:

La sigillatura consiste in un marchio di controllo adesivo portante il logo «Sartorius». Questo marchio si rompe se si cerca di toglierlo. In questo caso viene a meno la validità della verifica e lo strumento deve essere verificato nuovamente.

# Visione d'insieme dello strumento


## Display e tasti: Combics 3



## Display e tasti

- 1 LED di controllo (per la pesata di controllo +/- e classificazione)
- 2 Tasto di commutazione per l'immissione alfabetica
- 3 Tastiera alfanumerica
- 4 Tasto «Cancellazione»
- 5 Impostazioni: accesso a Setup
- 6 Commutazione tra il programma applicativo e le informazioni specifiche dell'applicazione
- 7 Uscita dati
- 8 Lordo/Netto, 2° unità oppure risoluzione 10 volte più alta (dipende dall'impostazione)
- 9 Taratura
- 10 Azzeramento
- 11 Commutazione della piattaforma di pesata
- 12 Accensione/spegnimento
- 13 Tasti funzione
- 14 Display completamente grafico a matrice di punti

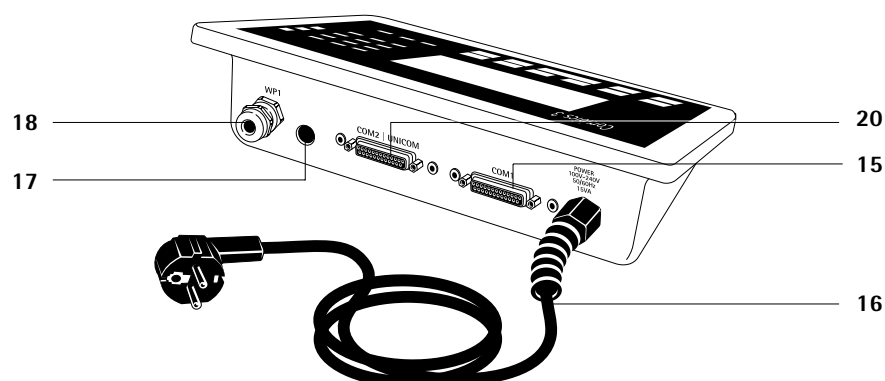
## Lato posteriore: modello CISL



## Lato posteriore

- 15 Interfaccia RS232C «COM1»
- 16 Cavo di rete con spina specifica del Paese
- 17 Commutatore di accesso al menù (modo operativo standard o per l'impiego in metrologia legale)
- 18 Attacco della piattaforma di pesata
- 19 Valvola di sfiatamento, momento di torsione 1,5 Nm
- 20 Interfaccia COM2 | «UNICOM»
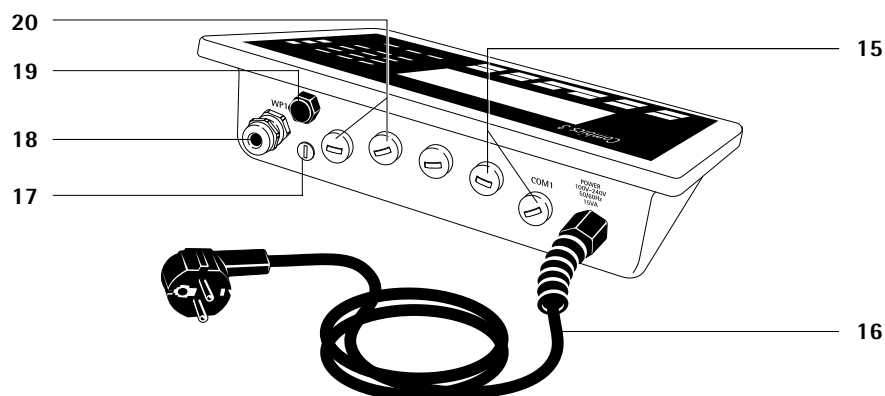
## Lato posteriore: modello CIS





### Installazione della piattaforma di pesata


L'allacciamento del cavo di collegamento dovrebbe essere effettuato solo da parte di un tecnico specializzato Sartorius.

- ⚠ Interventi sull'apparecchio che possono influenzare il livello di protezione IP67 devono essere eseguiti in modo molto accurato.
- ⚠ In caso di un'installazione non conforme alle istruzioni, decadono i diritti di garanzia.
- ⚠ Eseguire i lavori di installazione, manutenzione e riparazione sull'apparecchio quando non è sotto tensione.
- ⚠ Il pressacavo (con protezione IP67) è già preinstallato sull'indicatore.

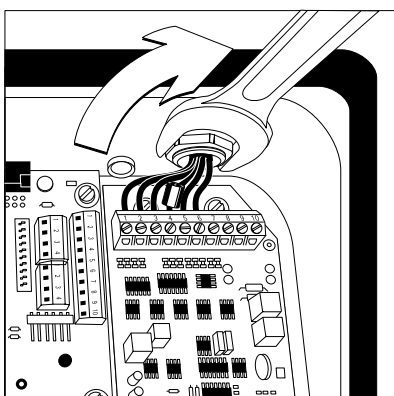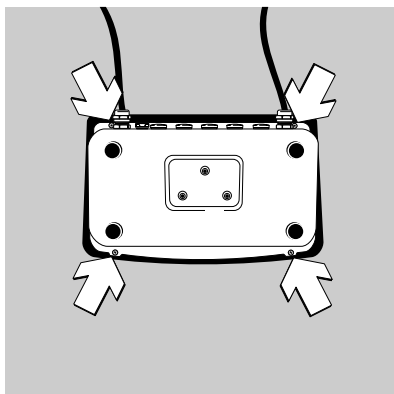
- Per togliere il pannello frontale, svitare le 4 viti.



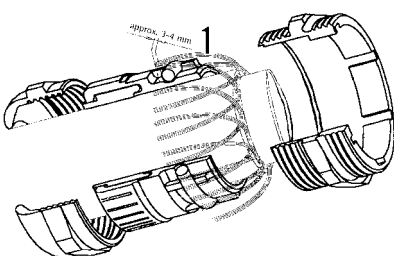
- Collegare il cavo di sistema della piattaforma di pesata all'indicatore.
- ⚠ Il pressacavo è preinstallato. Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione. Usare una chiave torsiometrica. Il momento torcente di questo pressacavo è di 5 Nm



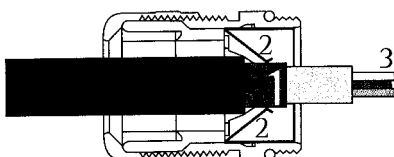- Togliere l'isolamento dell'estremità del cavo e collegare il cavo nel seguente modo:
  - Inserire il cavo attraverso il pressacavo.
  - Montare il pressacavo in modo corretto.
  - Togliere l'isolamento protettivo dall'estremità del cavo: la schermatura (1) deve fare contatto con i morsetti (2).



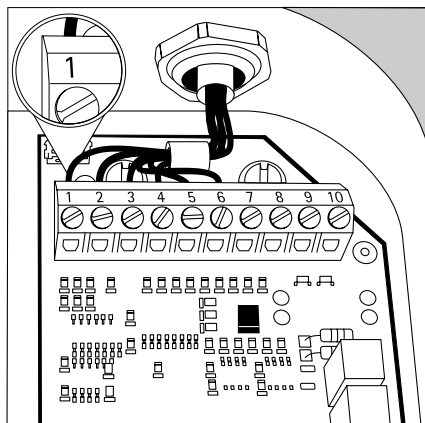- Per l'installazione, i fili (3) del cavo devono avere una lunghezza di circa 15 cm.
- Inserire il cavo attraverso il pressacavo.
- Controllare che ci sia contatto tra i morsetti e la schermatura.



- Montare il cavo della piattaforma di pesata:
  - Togliere l'isolamento del cavo e lasciare i fili lunghi circa 5 cm.
  - Togliere l'isolamento dei fili, 1 cm circa, e applicare le boccole.
  - Avvitare saldamente i fili ai morsetti.


#### Schema elettrico

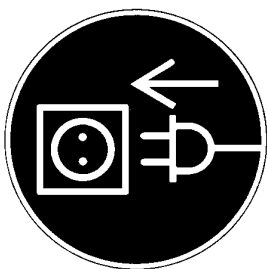N°	Segnale	Significato
1	BR_POS	Tensione di alimentazione del ponte (+)
2	SENSE_POS	Senso (+)
		Tensione di alimentazione del ponte
3	OUT_POS	Tensione di misura, positiva
4	OUT_NEG	Tensione di misura, negativa
5	SENSE_NEG	Senso (-)
		Tensione di alimentazione del ponte
6	BR_NEG	Tensione di alimentazione del ponte (-)

- △ Per l'assegnazione dei colori dei fili ai segnali, leggere il manuale d'istruzioni/foglio dati della piattaforma di pesata relativa. Isolare tutte le linee non usate!

#### Piattaforma di pesata con tecnica a 4 conduttori

- △ Per il collegamento di un ricevitore di carico a 4 conduttori, collegare le linee BR\_POS (n° 1) con SENSE\_POS (n° 2) e BR\_NEG (n° 6) con SENSE\_NEG (n° 5).



#### Collegamento alla rete

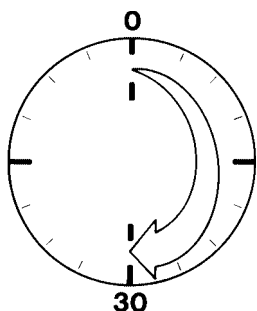
- Controllare il voltaggio e la forma della spina.
- L'alimentazione dello strumento avviene mediante un alimentatore con una tensione di esercizio tra 100 v e 240 v. Il collegamento alla rete deve essere eseguito in conformità alle norme nazionali vigenti.
- Collegare lo strumento della classe di protezione ad una presa elettrica installata secondo le disposizioni, e dotata di un conduttore di protezione per la messa a terra.

#### Misure di sicurezza

Se l'alimentazione di tensione proviene da reti elettriche sprovviste del conduttore di protezione per la messa a terra, si deve installare una protezione equivalente da parte di un tecnico specializzato. È vietato staccare il conduttore di protezione!

#### Collegamento di dispositivi elettronici (periferiche)

- Prima di collegare strumenti periferici (stampante, PC), lo strumento deve essere assolutamente staccato dalla rete elettrica.




#### Tempo di preriscaldamento

Per dare risultati di pesata precisi, lo strumento ha bisogno di un tempo di preriscaldamento di almeno 30 minuti. Poi ha raggiunto la temperatura di lavoro.

#### Impiego dello strumento omologato in metrologia legale:

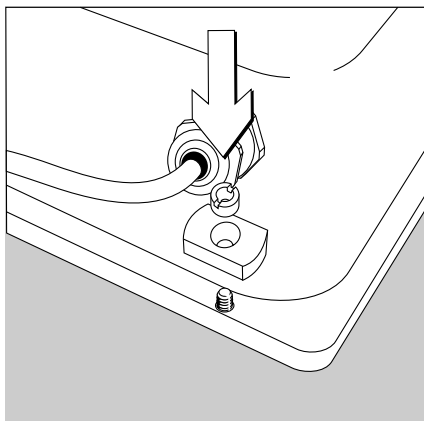
- Rispettare un tempo di riscaldamento di almeno 24 ore dopo il collegamento iniziale alla rete elettrica.





### Montaggio dell'adattatore per la verifica per l'impiego in metrologia legale (alla consegna lo strumento è omologabile)

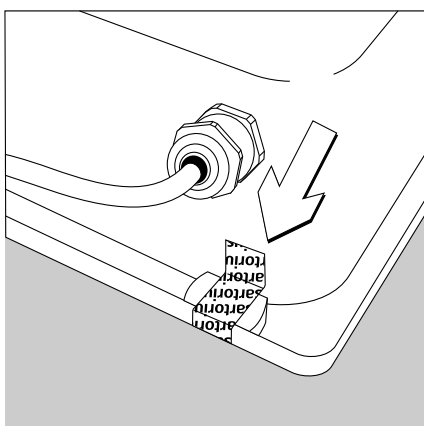- Togliere il dado posto sul retro dell'indicatore.
- Fissare la placca dell'adattatore con la vite con intaglio.
- Applicare un sigillo adesivo di protezione sull'adattatore per la verifica.



### Collegamento dell'unità di batterie ricaricabili esterne (accessorio: YRB10Z)

⚠ Estrarre la spina di rete.

- Installazione:  
Per il modello CISL3: collegare il connettore maschio a 25 pin D-SUB (cavo di collegamento YCC02-RB01) all'interfaccia «COM2»  
Per il modello CIS3: vedi sezione «Schema di assegnazione dei pin», pagina 54 (tramite il cavo di collegamento YCC02-RB02 oppure L2 come opzione)

Durata di funzionamento massima circa 40 h (dipende dalla piattaforma di pesata collegata e senza accessori collegati). Non appena viene a mancare la tensione di rete, l'indicatore si commuta automaticamente nel funzionamento a batterie. Ripristinando la tensione di rete, l'indicatore ritorna automaticamente al funzionamento elettrico.

Indicatore di carica dell'unità di batterie ricaricabili

Batterie cariche:

Batterie scariche:

### Collegamento di un lettore di codici a barre (accessorio: YBR02CISL)

⚠ Estrarre la spina di rete.

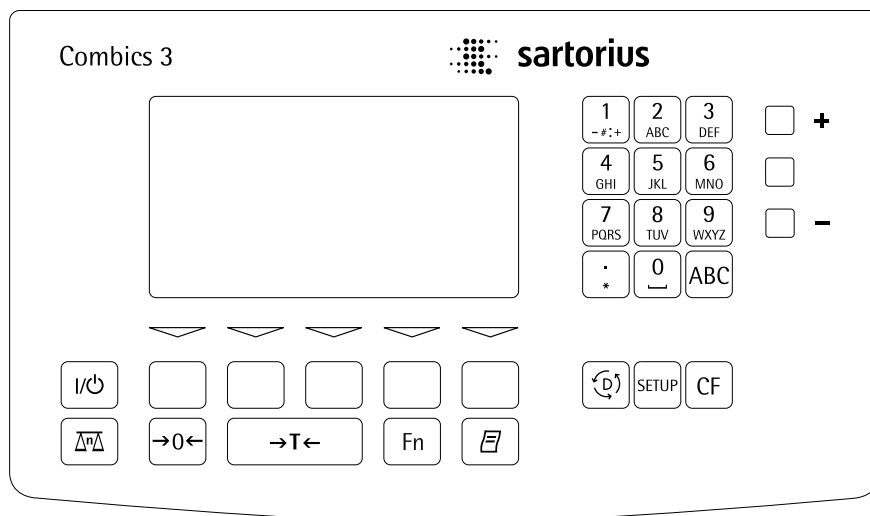
- Installazione:  
Per il modello CISL3: collegare il connettore maschio a 25 pin D-SUB all'interfaccia «COM2».  
Per collegare il lettore di codici a barre e l'unità di batterie esterna, utilizzare il connettore a T: YTC01.

Per il modello CIS3: vedi sezione «Schema di assegnazione dei pin», pagina 54 (tramite il cavo di collegamento YCC02-BR02 oppure M8 come opzione)

# Sistema di funzionamento

Con Combics 3 si possono:  
acquisire i dati di peso da due  
piattaforme di pesata;  
impiegare programmi applicativi per  
calcolare e visualizzare i dati di peso;  
identificare i campioni di pesata.

Per prima cosa si deve configurare  
l'indicatore tramite il Setup per l'appli-  
cazione desiderata (per es. immissione  
dei parametri della stampante, ecc.).  
Poi è pronto ad operare.



Pannello di comando di Combics 3

## Ingresso dei dati

### Immissione tramite i tasti

#### Tasti con simbolo

Questi tasti hanno, oltre alla funzione corrispondente al simbolo, anche una seconda funzione attivabile premendo a lungo il tasto. La loro attivazione dipende dallo stato di funzionamento della bilancia e dalla selezione nel menù.

- On/off  
(nel funzionamento Stand-by sul display appare OFF).
- Commuta il display tra le piattaforme di pesata collegate
- Azzeramento  
– Annulla la calibrazione/ regolazione
- Per la taratura:  
premere il tasto per meno di 2 sec.  
– Calibrazione/regolazione:  
premere il tasto per più di 2 sec:
- Commutazione (dipende dalla impostazione nel menù) tra:  
prima e seconda unità di pesata  
oppure peso lordo e netto oppure  
risoluzione del display normale  
e 10 volte superiore

- Per la stampa:  
premere il tasto per meno di  
2 sec.  
– Stampa del piè di pagina GMP:  
premere il tasto per più di 2 sec.:

- Commutazione nella modalità  
d'informazione (Info):  
premere il tasto per più di 2 sec.

- Accesso/uscita dal programma  
di Setup

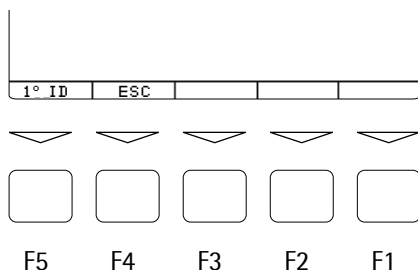
- Per uscire dal programma  
applicativo oppure per cancellare  
i singoli caratteri:  
premere il tasto per meno di  
2 sec.  
– Per cancellare l'immissione  
completa:  
premere il tasto per più di 2 sec.

- , , , ... , Immissione di cifre, lettere e caratteri

- Commutazione tra l'immissione  
numerica e alfabetica

### Help di linea

Gli Help di linea (tasti funzione) hanno sempre il significato che viene visualizzato in forma abbreviata o in simboli, nella riga inferiore del display:



Esempi di abbreviazioni:

**1 . ID**: salva il primo codice di identificazione

**ESC**: annulla l'immissione

Simboli nella riga del piè di pagina:

◀◀: ritorno allo stato di partenza

◀: spostamento nella selezione principale

➤: visualizzazione delle voci secondarie del punto attivato

⬆: spostamento verso l'alto nella finestra di entrata e uscita dati

⬇: spostamento verso il basso nella finestra di entrata e uscita dati

⬇: selezione dell'impostazione dei parametri scelti

### Immissione numerica tramite la tastiera

- L'introduzione dei numeri avviene con cifre singole:  
premere **0**, **1**, **2** ... **9**
- Salvataggio dell'immissione:  
premere il tasto corrispondente (per es. il tasto **→T←** per «immissione manuale di un valore di tara»
- Cancellazione delle cifre:  
premere **CF** per meno di 2 sec.
- Cancellazione completa dell'immissione:  
premere **CF** per più di 2 sec

### Immissione alfabetica tramite la tastiera

- Premere il tasto **ABC**.
- > Sul display appare «ABC».
- Premere il tasto più volte fino all'apparizione della lettera desiderata.
- Se la lettera si trova sullo stesso tasto, premere l'Help di linea **⬇** oppure aspettare 2 sec., fino all'apparizione del cursore lampeggiante.
- Immissione di uno spazio: premere **0**
- Immissione di segni di interpunzione o simboli speciali:  
premere più volte in successione il tasto **1** oppure il tasto **⋅**. Confermare la selezione con l'Help di linea **⬇**.
- Cancellazione del singolo carattere:  
premere il tasto **CF** meno di 2 sec.
- Cancellazione completa dell'immissione:  
premere il tasto **CF** per più di 2 sec.
- Ritorno all'immissione numerica:  
premere **ABC**
- > Appare sul display 123
- Memorizzazione dell'immissione:  
premere l'Help di linea corrispondente (per es. **1 ID**)

### Immissione tramite la bilancia

Per memorizzare un peso posto sulla piattaforma di pesata come peso di tara: premere **→T←**

### Immissione attraverso la porta I/O digitale

Per tutte le applicazioni è disponibile una linea di entrata (linea di controllo) tramite la quale si possono collegare un comando a mano o a pedale esterno. Nel menù di Setup (**Parametri dello strumento - Entrata di controllo**) si possono assegnare alla linea di entrata le seguenti funzioni:

- Tasto di stampa
- Tasto stampa a lungo
- Tasto di tara
- Tasto di tara a lungo
- Tasto Fn
- Tasto cambio PP
- Funzione combinata di azzeramento e tara

### Immissione attraverso l'interfaccia ASCII

Vedi pagina 53 (sezione «Formato dei dati in entrata»).

### Immissione tramite un lettore di codici a barre oppure una tastiera

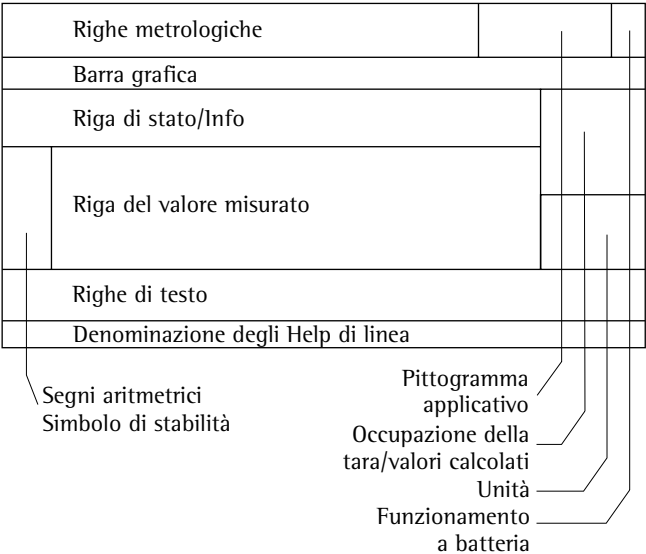
Le immissioni avvengono in modo analogo alle immissioni tramite tastiera:

- Valori di peso per la memoria di tara
- Pesi di riferimento nelle applicazioni: conteggio, misurazione neutrale, pesate in percentuale
- Valori numerici
- Codici di identificazione del prodotto

Durante la lettura del codice a barre viene attivata la funzione, oppure il contenuto del codice a barre viene solo visualizzato sul display senza attivazione di funzione. L'impostazione viene eseguita nel Setup sotto:  
**Parametri dello strumento - Codice a barre.**

L'impostazione **Valore di riferimento, Valore di tara e ID1** fa sì che il valore del codice a barre venga impiegato come valore di riferimento, valore di tara oppure come ID1. Questa differenziazione può avvenire anche tramite il codice a barre. Con l'impostazione **Immissione senza attivazione di funzione**, il contenuto del codice a barre viene visualizzato sul display.

Modi di visualizzazione/Display



Ci sono due modi diversi di visualizzazione: uno per il funzionamento normale, uno per lo stato operativo «Setup» (Impostazioni).

Visualizzazione dei valori di pesata e dei valori di calcolo (display principale)

Il display è suddiviso in 9 campi.

Righe metrologiche

Qui si visualizzano le caratteristiche fondamentali della bilancia:

WP 1 / 2	piattaforma di pesata attiva
R 1 / 2	campo di pesata attuale della piattaforma di pesata attiva (collegando delle bilance a campi plurimi)
Max	limite superiore del campo di pesata della piattaforma di pesata attiva
Min	limite inferiore del campo di pesata della piattaforma di pesata attiva (solo sui modelli omologati)
e	divisione di verifica della piattaforma di pesata attiva (solo sui modelli omologati)
d	divisione di lettura inferiore della piattaforma di pesata attiva

Pittogramma/Simbolo della batteria:

In questo campo appare un pittogramma corrispondente all'applicazione selezionata:   
▲ per es. per l'applicazione «Conteggio»   
☒ stampa attiva   
☒ stampa GMP attiva

Durante il funzionamento a batterie, il simbolo della batteria ▲ indica il livello di carica dell'unità di batterie ricaricabili.

Barra grafica

La barra grafica indica quanta percentuale del campo di pesata della piattaforma attiva viene impiegata ponendo un peso sulla piattaforma (barra grafica del valore lordo).

0% limite di carico inferiore

100% limite di carico superiore

In Pesate di controllo +/- (barra grafica di calcolo) appaiono i seguenti simboli:

	barra grafica con divisioni del 10%
	valore minimo per Pesate di controllo +/-
	valore nominale per Pesate di controllo +/-
	valore massimo per Pesate di controllo +/-

Segni aritmetrici

+ oppure - per il valore di pesata o il valore calcolato, ☐ se la piattaforma di pesata viene azzerata o tarata

Riga del valore di misura

Visualizzazione dei valori di pesata o del valore calcolato mediante cifre e lettere.

Unità e stabilità

Quando la bilancia ha raggiunto la stabilità si visualizza l'unità di peso o l'unità per un valore calcolato.

Occupazione della tara, valori calcolati

Significato dei simboli:

▲	valore calcolato (non può essere usato per le applicazioni soggette alla verifica metrologica)
NET	valore netto (valore lordo meno il valore della tara)
L / G	valore lordo (valore netto più il valore della tara)

Righe di testo

In queste righe di testo appaiono simboli e commenti testuali per la guida dell'operatore.

Riga degli Help di linea

Indica l'assegnazione degli Help di linea.

Visualizzazione delle impostazioni e informazioni (menù di Setup)

Questo display è suddiviso in 3 campi.

Riga di testo
Finestra di entrata e uscita
Denominazione degli Help di linea

Riga di stato

Nella riga di stato è indicata la funzione descritta nella pagina visualizzata. Nel Setup viene indicato il «percorso» relativo alle informazioni visualizzate.

Finestra di entrata e uscita

Qui vengono visualizzate le informazioni in dettaglio (per es. per l'applicazione selezionata). Le informazioni selezionate appaiono scritte in bianco su sfondo nero.

### Significato degli Help di linea

Vedi descrizione a pagina 10.

Esempio: Visualizzazione nella modo «Setup»

PP 1	INTERNO	ADAT. FILTRO
Molto stabili		
oStabili		
Instabili		
Molto instabili		
<<	<	>
		>
		>

o Indica l'impostazione attualmente selezionata

Impostazione dei parametri:

- Premere più volte gli Help di linea  $\wedge$  oppure  $\vee$  per l'impostazione del parametro desiderato
- Premere l'Help di linea  $\downarrow$  per confermare il parametro
- Premere il tasto **SETUP** per uscire dal menù di Setup

### Messaggi di errore

- I tasti non attivi sono indicati con il messaggio «-----» e/o «Nessuna funzione» per 2 secondi e con l'emissione di un segnale acustico
- Gli errori temporanei sono visualizzati per 2 secondi, con un codice di errore (per es. **Inf 09**) nella riga del valore di misura; gli errori visualizzati in modo permanente (per es. **Err 101**) possono essere eliminati con «Reset».

Una descrizione dettagliata dei messaggi di errore si trova nel capitolo «Messaggi di errore», pagina 97.

### Uscita dei dati

#### Stampante

Allo strumento Combics 3 si possono collegare una o due stampanti su striscia o di etichette. La stampa avviene manualmente, premendo un tasto, oppure automaticamente. I fogli di stampa sono configurabili dall'utente. Inoltre si possono stampare un protocollo della sommatoria e le impostazioni di menù correnti. Vedi sezione «Stampa» a partire dalla pagina 46.

#### Interfaccia entrata/uscita digitale

L'interfaccia I/O digitale è supportata dai programmi applicativi «Pesata di controllo +/-» e «Classificazione».

#### Pesata di controllo +/-

Il dispositivo di uscita dispone di varie funzioni di controllo. Quattro uscite di dati trasmettono le seguenti informazioni sul peso: «più leggero», «uguale», «più pesante» e «set». L'utente può definire quale delle linee devono essere sempre attivate, attivate solo alla stabilità o soltanto dentro il campo di controllo oppure solo nel campo di controllo alla stabilità, oppure del tutto disattivate.

#### Classificazione

Quattro uscite di dati trasmettono le seguenti informazioni sulle classi (classi 1, 2, 3, 4 e 5) e sul superamento del carico minimo (Set). L'utente può definire quale delle linee devono essere sempre attivate, attivate solo alla stabilità oppure essere disattivate. Vedi «Applicazione: Classificazione» nel manuale allegato «Programma applicativi base».

### Interfaccia di comunicazione

Per l'interfaccia SBI si possono definire alcuni parametri (generare una stampa, stampa automatica in funzione del tempo, codici di identificazione). Vedi la sezione «Interfaccia dati» a partire dalla pagina 45.

#### LED di controllo

I LED di controllo indicano durante l'applicazione «Pesate di controllo +/-» se il valore di peso si trova nei limiti di tolleranza. Per l'applicazione «Classificazione» indicano a quale classe appartiene il valore di peso.

### Salvataggio dei dati

Combics 3 memorizza inoltre tutti i parametri applicativi (per es. valori di riferimento). Questi sono disponibili anche se lo strumento viene spento o commutando tra i programmi applicativi. L'accesso al menù di Setup «Parametri dello strumento» può essere protetto con una password (in Setup sotto **Parametro dello strumento - Password**). Vedi anche pagina 16.

# Impostazioni

L'immissione delle impostazioni base per una configurazione dedicata avviene nel menù di Setup selezionando i parametri corrispondenti. I parametri sono raggruppati nel seguente modo (1° livello di menù):

- Programmi applicativi
- Tasto Fn
- Parametri dello strumento
- Informazioni specifiche dello strumento «**I n f o**»
- Lingua

Nell'impiego in metrologia legale, la selezione dei singoli parametri è limitata.

I parametri impostati in fabbrica sono elencati a partire da pagina seguente e sono contrassegnate con il simbolo «o».

## Impostazione della lingua

Le informazioni possono essere visualizzate in 5 lingue:

- tedesco
- inglese (impostazione di fabbrica)
- inglese con data/ora U.S.
- francese
- italiano
- spagnolo

### Esempio: selezione della lingua «Italiano»



Accendere Combics



Selezionare l'impostazione

SETUP				
Application parameters				
Fn key function				
Device parameters				
Info				
Language				
<<			v	>

### Più volte l'Help di linea ↵, Help di linea ➤

Selezionare Lingua (Language)

e confermare

SETUP				
LANGUAGE				
Deutsch				
oEnglish				
U.S.-Mode				
Français				
Italiano				
Español				
<<	<	^	v	↓

### Help di linea ↵, Help di linea ↵

Selezionare la lingua «Italiano»

Salvare la selezione della lingua

SETUP				
LINGUA				
Deutsch				
English				
U.S.-Mode				
Français				
oItaliano				
Español				
<<	<	^	v	↓

### Help di linea <<

Uscire da Setup

## Navigazione nel Setup (esempi)

Esempio: adattamento della piattaforma di pesata PP1 alle condizioni ambientali selezionando la voce di menù «Molto instabili».



Accendere Combics



Selezionare l'impostazione

SETUP				
Parametri applicativi				
Tasto Fn				
Parametri dello strumento				
Info				
Lingua				
<<			v	>

Help di linea v,  
Help di linea >

Selezionare Parametri dello strumento  
e confermare

SETUP STRUMENTO				
Piattaforma di pesata 1				
COM 1				
COM 2				
UniCOM				
Entrata di controllo				
Codice a barre				
Protocollo di stampa				
Parametri operativi				
Ora				
Password				
<<	<		v	>

Help di linea >,  
Help di linea >

Confermare Piattaforma di pesata 1 e poi  
confermare Interno

STRUMENTO PP 1 INTERNO				
Calibrazione/risoluzione				
Adattamento del filtro				
Filtro applicativo				
Campo di stabilità				
Ritardo di stabilità				
Autoazzeramento				
Unità di peso 1				
Precisione di lettura 1				
Campo di zero				
Campo di zero iniziale				
<<	<		v	>

Help di linea v,  
Help di linea >

Selezionare Adattamento del filtro  
e confermare

PP 1 INTERNO ADAT. FILTRO				
Molto stabili				
oStabili				
Instabili				
Molto instabili				
<<	<	^	v	↓

2 volte l'Help di linea v,  
Help di linea ↓

Selezionare Molto instabili  
e salvare

PP 1 INTERNO ADAT. FILTRO				
Molto stabili				
Stabili				
Instabili				
oMolto instabili				
<<	<	^		↓

Event. più volte l'Help di linea <  
Help di linea <

Impostare ulteriori voci di menù  
Uscire da Setup

**Password di protezione per il menù di Setup: immissione, modifica o cancellazione della password**

Esempio: immissione, modifica ed eventuale cancellazione della password «ABC1».



Accendere Combics

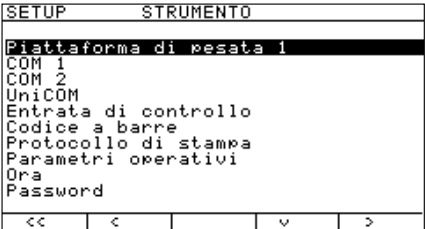


Selezionare l'impostazione




Selezionare Parametri dello strumento e confermare

2 volte l'Help di linea **↵**,  
 Help di linea **➤**



Selezionare Password e confermare

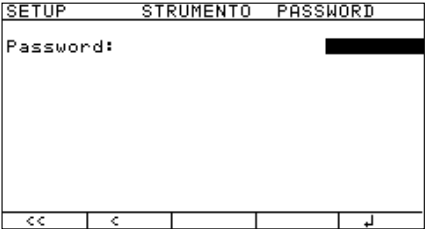Più volte l'Help di linea **↵**,  
 Help di linea **➤**



**ABC**, **2** (ABC),  
 Help di linea **↵**;

Immettere la password «ABC1» (max. 8 cifre)

2 volte **2** (ABC),  
 Help di linea **↵**;


Confermare le cifre (aspettare 2 secondi oppure premere l'Help di linea **↵** )

3x **2** (ABC), Help di linea **↵**;

Confermare la password

**ABC**, **1**, Help di linea **↵**

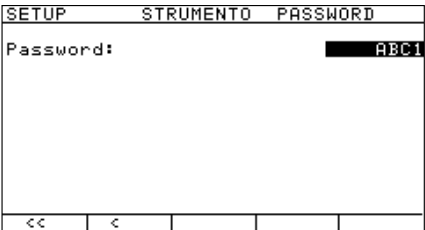In caso cancellare la password:  
 premere i tasto **CF** e memorizzare con l'Help di linea **↵**



Event. più volte l'Help di linea **◀**  
 Help di linea **◀◀**

Impostare ulteriori voci di menù  
 Uscire da Setup



### Stampa dei parametri impostati

Esempio: stampa con 20 caratteri max.  
per riga.

```
-----
12.01.2002      09:46
Typ             CIS3
Ser.no         12345678
Vers.          1.0103.11.2
BVers.         01-26-02
-----
SETUP
      STRUMENTO
-----
PIATTAFORMA DI PESA
INTERNO
COM 1
  COMUNICAZIONE DATI
    SBI
      BAUDRATE
        1200 BAUD
      PARITA
        Odd
        NUMERO BIT DI ST
          1 BIT DI STOP
        MODO HANDSHAKE
HARDWARE 1 CARATTERE
  NUMERO BIT DI DATI
    7 BIT
    USCITA DATI
  PROTOCOLLO STAMPA
  STAMPANTE 1
    FORMATO RIGHE
  PER ALTRE APPL. (22
  CARATTERI)
  COM2
                                OFF
  UNICOM
                                OFF
  ENTRATA DI CONTROLL
    TASTO DI STAMPA
  CODICE A BARRE
  VALORE DI RIFERIMENT

  PROTOCOLLO DI STAMP
  RIGHE DI INTESTAZI
  RIGA 1:

  RIGA 2:

  IDENTIFICATORE
  ID1:
    N. di lot
  ID2:
    Client
  ID3:
  ID4:

  PROTOCOLLO ISO/GLP
                                OFF
  DATA/ORA
    DATA CON ORA
  UNO ALLA STABILITA
                                OFF
```

ecc.

## Prospetto del Setup (parametri)

o = impostazione di fabbrica

√ = impostazione dell'utente

### Setup

Parametri applicativi: vedi istruzioni per l'uso «Programmi applicativi base»	
Tasto Fn	
<input type="checkbox"/>	Nessuna funzione
<input type="checkbox"/>	o Commutazione lordo/netto
<input type="checkbox"/>	Commutazione unità
<input type="checkbox"/>	Risoluzione 10 volte più alta
Parametri dello strumento	
PP-1	
<input type="checkbox"/>	Off
<input type="checkbox"/>	RS-232 <sup>1)</sup>
<input type="checkbox"/>	SBI versione standard
<input type="checkbox"/>	SBI metrologia legale
<input type="checkbox"/>	o IS-232
<input type="checkbox"/>	Convertitore A/D-232
<input type="checkbox"/>	Interno
<input type="checkbox"/>	Calibrazione/regolazione
<input type="checkbox"/>	Funzione tasto CAL
<input type="checkbox"/>	o Cal./reg. est.; peso di fabbrica
<input type="checkbox"/>	Cal./reg. est.; peso utente
<input type="checkbox"/>	Tasto bloccato
<input type="checkbox"/>	Sequenza calib./regol.
<input type="checkbox"/>	Calibrazione con regolazione automatica
<input type="checkbox"/>	o Calibrazione con regolazione manuale
<input type="checkbox"/>	Funzione isoCAL
<input type="checkbox"/>	o Off
<input type="checkbox"/>	Consiglio di regolazione
<input type="checkbox"/>	Attivazione regolazione esterna <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/>	o Sbloccata
<input type="checkbox"/>	Bloccata
<input type="checkbox"/>	Peso esterno
<input type="checkbox"/>	Peso cal./reg.:
<input type="checkbox"/>	Adattamento del filtro
<input type="checkbox"/>	Molto stabili
<input type="checkbox"/>	o Stabili
<input type="checkbox"/>	Instabili
<input type="checkbox"/>	Molto instabili
<input type="checkbox"/>	Filtro applicativo
<input type="checkbox"/>	o Lettura finale
<input type="checkbox"/>	Dosaggio
<input type="checkbox"/>	Filtraggio basso
<input type="checkbox"/>	Senza filtraggio
<input type="checkbox"/>	Campo di stabilità
<input type="checkbox"/>	1/4 digit
<input type="checkbox"/>	1/2 digit
<input type="checkbox"/>	o 1 digit <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/>	2 digit <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/>	4 digit <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/>	8 digit <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> = la funzionalità sarà messa a disposizione successivamente

<sup>2)</sup> = la modifica dell'impostazione manca sugli apparecchi omologati

# Parametri dello strumento

PP-1	
Interno	<div>Ritardo di stabilità</div> <div> <input type="checkbox"/> Senza ritardo             <div>o <input type="checkbox"/> Ritardo breve</div> <div><input type="checkbox"/> Ritardo medio</div> <div><input type="checkbox"/> Ritardo lungo</div> </div> <div>Taratura <sup>1)</sup></div> <div> <input type="checkbox"/> Senza stabilità             <div>o <input type="checkbox"/> Dopo la stabilità</div> </div> <div>Autoazzeramento</div> <div> <input type="checkbox"/> o On             <div><input type="checkbox"/> Off</div> </div> <div>Unità di peso <sup>1 2)</sup></div> <div> <input type="checkbox"/> Libera / o (impostazione di fabbrica: Grammi) <sup>1)</sup> <div><input type="checkbox"/> Grammi / g</div> <div>o <input type="checkbox"/> Chilogrammi / kg</div> <div><input type="checkbox"/> Carati / ct <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Libbre / lb <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Once / oz <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Once Troy / ozt <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tael Honkong / tlh <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tael Singapore / tls <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tael Taiwan / tlt <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Grani / GN <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Pennyweight / dwt <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Milligrammi / mg <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Parti per libbra / lb <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tael Cina / tlc <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Momme / mom <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Carati austriaci / K <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tola / tol <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Baht / bat <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Mesghal / MS <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Tonnellata / t</div> </div> <div>Precisione di lettura 1</div> <div> <input type="checkbox"/> o Tutte le cifre             <div><input type="checkbox"/> Ridotta di 1 cifra al cambio del peso</div> <div><input type="checkbox"/> Indice +1 <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Indice +2 <sup>1)</sup></div> <div><input type="checkbox"/> Ridotta di 1 posto decimale <sup>1)</sup></div> </div> <div>Campo di zero</div> <div> <input type="checkbox"/> 1 percento/carico max.             <div>o <input type="checkbox"/> 2 percento/carico max.</div> </div> <div>Campo di zero iniziale</div> <div> <input type="checkbox"/> 2 percento/carico max.             <div>o <input type="checkbox"/> 5 percento/carico max.</div> </div> <div>Tara/zero iniziale</div> <div> <input type="checkbox"/> o On             <div><input type="checkbox"/> Off</div> <div><input type="checkbox"/> Solo azzeramento</div> </div>

<sup>1)</sup> = la modifica dell'impostazione manca sugli apparecchi omologati

<sup>2)</sup> = dipende dal tipo di piattaforma di pesata

## Parametri dello strumento

PP-1		Interno	
		Unità di peso 2 <sup>2)</sup>	
		<input type="checkbox"/> Libera/ o (impostazione di fabbrica: Grammi) <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Grammi / g <input type="checkbox"/> o Chilogrammi / kg <input type="checkbox"/> Carati / ct <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Libbre / lb <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Once / oz <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Once Troy / ozt <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tael Honkong / tlh <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tael Singapore / tls <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tael Taiwan / tlt <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Grani / GN <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Pennyweight / dwt <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Milligrammi / mg <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Parti per libbra / lb <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tael Cina / tlc <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Momme / mom <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Carati austriaci / K <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tola / tol <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Baht / bat <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Mesghal / MS <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Tonnellata / t	
		Precisione di lettura 2	
		<input type="checkbox"/> o Tutte le cifre <input type="checkbox"/> Ridotta di 1 cifra al cambio del peso <input type="checkbox"/> Indice +1 <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Indice +2 <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Ridotta di 1 posto decimale <sup>1)</sup>	
		Impostazione di fabbrica, solo parametri	
		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> o No	
COM 1			
		o Off	
PP-2		o RS-232	
		<input type="checkbox"/> SBI versione standard (9600 baud) <input type="checkbox"/> SBI metrologia legale (9600 baud) <input type="checkbox"/> o IS-232 <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Convertitore A/D-232 <sup>1)</sup>	
		Comunicazione dati	
		o SBI	
		Baudrate	
		<input type="checkbox"/> 150 baud <input type="checkbox"/> 300 baud <input type="checkbox"/> 600 baud <input type="checkbox"/> o 1200 baud <input type="checkbox"/> 2400 baud <input type="checkbox"/> 4800 baud <input type="checkbox"/> 9600 baud <input type="checkbox"/> 19200 baud	
		Parità	
		<input type="checkbox"/> Space <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> o Odd <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> None <sup>4)</sup>	

<sup>1)</sup> = la modifica dell'impostazione manca sugli apparecchi omologati

<sup>2)</sup> = dipende dal tipo di piattaforma di pesata

<sup>3)</sup> = non per 8 bit di dati

<sup>4)</sup> = non per 7 bit di dati

## Parametri dello strumento

### COM 1

#### Comunicazione dati

##### o SBI

Numero di bit di stop

o 1 bit di stop

2 bit di stop

Modo handshake

Handshake via software

o Hardware 1 carattere

Numero bit di dati

o 7 bit

8 bit

Emissione dei dati

Su richiesta, senza stabilità

o Su richiesta, dopo la stabilità

Automatica, senza stabilità

o 1 aggiornamento lettore

2 aggiornamenti del lettore

10 aggiornamenti del lettore

100 aggiornamenti del lettore

Automatica, alla stabilità

o 1 aggiornamento del lettore

2 aggiornamenti del lettore

10 aggiornamenti del lettore

100 aggiornamenti del lettore

Protocollo di stampa stampante 1

Protocollo di stampa stampante 2

Formato delle righe

Per dati grezzi (16 caratteri)

o Per altre applicazioni (22 caratteri)

Impostazione di fabbrica

Si

o No

XBPI-RS232

MP8 (binario)

Programma applicativo

MP8: 3-1-1

MP8: 3-1-2

MP8: 3-1-3

MP8: 3-1-4

MP8: 3-1-5

MP8: 3-1-6

MP8: 3-1-7

MP8: 3-1-8

MP8: 3-1-9

MP8: 3-2-1

MP8: 3-2-2

MP8: 3-2-3

MP8: 3-2-4

MP8: 3-2-5

MP8: 3-2-6

MP8: 3-2-7

MP8: 3-2-8

MP8: 3-2-9

## Parametri dello strumento

### COM 1

#### Comunicazione dati

##### MP8

##### Programma applicativo

- ☐ MP8: 3-3-1
- ☐ MP8: 3-3-2
- ☐ MP8: 3-3-3
- ☐ MP8: 3-3-4
- ☐ MP8: 3-3-5
- ☐ MP8: 3-3-6
- ☐ MP8: 3-3-7
- ☐ MP8: 3-3-8
- ☐ MP8: 3-3-9

##### Indice 2

- ☐ o Ind. 2.1
- ☐ Ind. 2.2
- ☐ Ind. 2.3
- ☐ Ind. 2.4

##### Baudrate

- ☐ 150 baud
- ☐ 300 baud
- ☐ 600 baud
- ☐ o 1200 baud
- ☐ 2400 baud
- ☐ 4800 baud
- ☐ 9600 baud

##### Parità

- ☐ Mark
- ☐ Space (spazio)
- ☐ o Odd (dispari)
- ☐ Even (pari)

##### Stampa durante la pesata

- ☐ Manuale senza stabilità
- ☐ o Manuale dopo la stabilità
- ☐ Automatica senza stabilità
- ☐ Automatica alla stabilità

##### SMA

##### Baudrate

- ☐ 150 baud
- ☐ 300 baud
- ☐ 600 baud
- ☐ 1200 baud
- ☐ 2400 baud
- ☐ 4800 baud
- ☐ o 9600 baud
- ☐ 19200 baud

##### Parità

- ☐ Space (spazio) <sup>1)</sup>
- ☐ Odd (dispari)
- ☐ Even (pari)
- ☐ o None <sup>2)</sup>

##### Numero di bit di stop

- ☐ o 1 bit di stop
- ☐ 2 bit di stop

<sup>1)</sup> = non per 8 bit di dati

<sup>2)</sup> = non per 7 bit di dati

# Parametri dello strumento

## COM 1

### Comunicazione dati

#### SMA

##### Modo handshake

- ☐ Handshake via software
- ☐ o Hardware 1 carattere

##### Numero di bit di dati

- ☐ o 8 bit

### Stampante 1 <sup>1)</sup>

#### YDP01IS

- ☐ o Su striscia
- ☐ Etichette
- ☐ Etichette, avanzamento carta manuale

#### YDP02

##### Baudrate

- ☐ o 1200 baud
- ☐ 2400 baud
- ☐ 4800 baud
- ☐ 9600 baud

##### Parità

- ☐ Space
- ☐ o Odd
- ☐ Even

##### Numero di bit di stop

- ☐ o 1 bit di stop
- ☐ 2 bit di stop

##### Modo handshake

- ☐ Handshake via software
- ☐ o Hardware 1 carattere

#### YDP03

##### Baudrate

- ☐ o 1200 baud
- ☐ 2400 baud
- ☐ 4800 baud
- ☐ 9600 baud
- ☐ 19200 baud

##### Parità

- ☐ Space
- ☐ o Odd
- ☐ Even

##### Numero di bit di stop

- ☐ o 1 bit di stop
- ☐ 2 bit di stop

##### Modo handshake

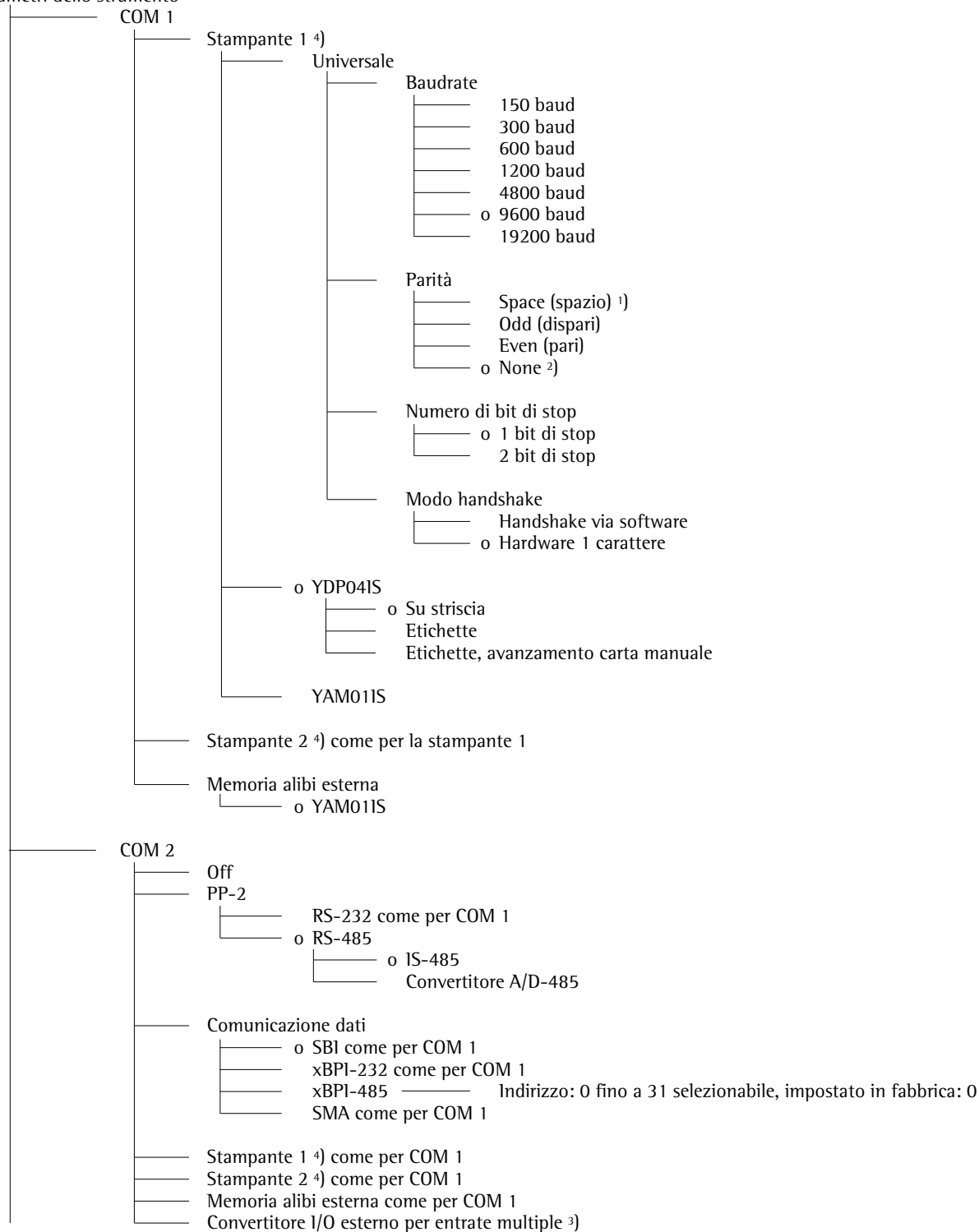
- ☐ Handshake via software
- ☐ o Hardware 1 carattere

#### YDP02IS

- ☐ o Su striscia
- ☐ Etichette

<sup>1)</sup> = si possono configurare un massimo di 2 stampanti

# Parametri dello strumento



1) = non per 8 bit di dati

2) = non per 7 bit di dati

3) = la funzionalità sarà messa a disposizione successivamente

4) = si possono configurare un massimo di 2 stampanti



## Parametri dello strumento

	UNICOM (interfaccia opzionale)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/>	Comunicazione dati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SBI come per COM 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> xBPI-232 come per COM 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> xBPI-485 come per COM2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SMA come per COM 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profibus <input type="text"/> Indirizzo: 0 fino a 126 selezionabile, impostato in fabbrica: 126
<input type="checkbox"/>	Stampante 1 <sup>1)</sup> come per COM 1
<input type="checkbox"/>	Stampante 2 <sup>1)</sup> come per COM 1
<input type="checkbox"/>	Uscita analogica
<input type="checkbox"/>	Valore d'uscita Analog Out
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Totale netto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Totale lordo
<input type="checkbox"/>	Errore Analog Out
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Livello elevato (20mA)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Livello basso (0/4 mA) durante menu e calibrazione 0/4 mA su questa interfaccia.
<input type="checkbox"/>	Modo d'uscita Analog Out
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Zero fino a carico massimo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valori min/ max.
<input type="checkbox"/>	Modo d'uscita Analog Out
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Min. (0/4 mA) Immissione in kg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Max. (20/4 mA) Immissione in kg
<input type="checkbox"/>	Memoria alibi esterna come per COM 1
<input type="checkbox"/>	Entrata di controllo 1, 2 o 3
<input type="checkbox"/>	Entrata di controllo (per commutatore esterno)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Funzione del tasto di stampa <input type="button" value="F"/>
<input type="checkbox"/>	Tasto stampa <input type="button" value="F"/> a lungo
<input type="checkbox"/>	Tasto di tara <input type="button" value="T←"/>
<input type="checkbox"/>	Tasto di tara <input type="button" value="T←"/> a lungo
<input type="checkbox"/>	Tasto Fn <input type="button" value="Fn"/>
<input type="checkbox"/>	Tasto cambio PP <input type="button" value="PP"/>
<input type="checkbox"/>	Funzione combinata azzeramento/tara
<input type="checkbox"/>	Codice a barre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valore di riferimento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valore di tara
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ID1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Immissione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Immissione senza attivazione funzione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tastiera esterna
<input type="checkbox"/>	Protocollo di stampa
<input type="checkbox"/>	Righe di intestazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Riga 1:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Riga 2:
<input type="checkbox"/>	Identificatore (codice di identificazione individuale)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ID1:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ID2:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ID3:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ID4:
<input type="checkbox"/>	Protocollo ISO/GLP/GMP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Per 1 risultato di applicazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Per più risultati di applicazione
<input type="checkbox"/>	Data/Ora
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Data con ora
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Solo data
<input type="checkbox"/>	Uno alla stabilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> On

<sup>1)</sup> = si possono configurare un massimo di 2 stampanti

## Parametri dello strumento

### Protocollo di stampa

#### FlexPrint

- ☐ Off
- ☐ On

#### Stampante 1

##### Numero delle stampe

- ☐ 1 stampa
- ☐ 2 stampe

##### Stampa dei componenti o singola

- ☐ Riga di intestazione 1, 2
- ☐ ID1, ... ID4
- ☐ Data e ora
- ☐ Dati di inizializzazione dell'applicazione
- ☐ Identificazione bilancia (per es. N° di serie)
- ☐ Risultato applicativo

##### Stampa del risultato o totale

- ☐ Riga di intestazione 1, 2
- ☐ ID1, ... ID4
- ☐ Data e ora
- ☐ Identificazione bilancia (per es. N° di serie)
- ☐ Risultato applicativo

#### Stampante 2 <sup>1)</sup> come per Stampante 1

#### Impostazione fabbrica per stampa protocolli

- ☐ Sì
- ☐ No

### Parametri operativi

#### Segnale acustico

- ☐ On
- ☐ Off

#### Tastiera

##### Blocco delle funzioni dei tasti

- ☐ Tutti sbloccati
- ☐ Tutti bloccati eccetto SETUP, I/O
- ☐ Tasti alfanumerici bloccati

#### Display

##### Contrasto

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6

<sup>1)</sup> = si possono configurare un massimo di 2 stampanti

## Setup

### Parametri dello strumento

#### Parametri operativi

##### Display

Retroilluminazione

☐ On

☐ Spegnimento automatico con timer

##### Spegnimento automatico

☐ Spegnimento automatico con timer

☐ o Senza spegnimento automatico

##### Timer

☐ o 1 + 1 minuto

☐ 2 + 2 minuti

☐ 5 + 5 minuti

##### Bilancia di preferenza

☐ o PP-1

☐ PP-2

##### Visualizzazione dati geografici

☐ o Off

☐ On

##### Impostazioni fabbrica per parametri operativi

☐ Si

☐ o No

#### Ora

☐ Ora:

☐ Data:

#### Password

☐ Password:

### Info

#### Servizio

☐ Data servizio:

#### Terminale

☐ Modello:

☐ Nr. di serie:

☐ Nr. versione: (versione del software applicativo)

☐ Nr. base:

#### 1. piattaforma di pesata

☐ Modello:

☐ Nr. versione: (versione del software)

☐ Nr. di serie:

☐ Latitudine <sup>1)</sup>:

☐ Altitudine <sup>1)</sup>:

☐ Accelerazione gravitazionale <sup>1)</sup>:

#### Flexinfo

☐ ID--

☐ V.--

### Lingua

☐ Deutsch

☐ o English

☐ U.S.-Mode

☐ Francais

☐ Italiano

☐ Espanol

<sup>1)</sup> = dipende dall'immissione prima della verifica: la latitudine/altitudine oppure l'accelerazione gravitazionale

# Modo di misurazione

## Pesata $\Delta\Delta$

La funzione base di pesata è sempre disponibile da sola o con programmi applicativi (Conteggio, Pesate di controllo +/-, Pesate percentuale, ecc.).

### Caratteristiche

- Azzeramento con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$
- Memorizzazione di un peso di tara con il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$
- Immissione di un peso di tara per mezzo dei tasti numerici (memorizzazione con il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$ )
- Immissione di un peso di tara mediante il lettore di codici a barre
- Taratura automatica del peso di un contenitore
- Cancellazione dei valori di tara mediante l'immissione numerica  $0$  (memorizzazione con il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$ )
- Commutazione di  $\text{Fn}$  tra:
  - valore lordo e valore netto
  - 1° e 2° unità di peso oppure
  - risoluzione del display normale e aumentata 10 volte

La funzione del tasto  $\text{Fn}$  viene configurata nel Setup sotto:  
**Taste Fn**

- Pesata con due piattaforme di pesata
- Identificazione individuale dei valori di pesata (identificatore)
- Stampa dei valori di pesata
  - Manuale con il tasto  $\rightarrow F \leftarrow$
  - Automatica (vedi capitolo Uscita dei dati)
  - Protocollo GMP (vedi capitolo Uscita dei dati)
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Impostabile nel Setup sotto:  
**Parametri applicativi:**  
**Solo pesata:**  
**Impostazione fabbrica**

## Tasti funzione Help di linea

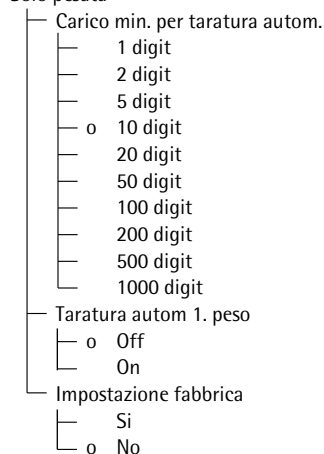
**ID** Immissione fino a 4 identificatori per l'identificazione dei risultati di misura durante la stampa.

**1. ID** Memorizzazione dell'immissione come valore per il primo identificatore

### Preparazione

- Selezionare Setup: premere il tasto  $\text{SETUP}$
- Selezionare Parametri applicativi: premere l'Help di linea  $\rightarrow$
- Selezionare l'applicazione Solo pesata: premere l'Help di linea  $\rightarrow$

#### Solo pesata



o = impostazione di fabbrica

- Salvare l'impostazione e uscire da Setup: premere il tasto  $\text{SETUP}$  oppure l'Help di linea  $\leftarrow$ .

### Taratura automatica

Il primo campione di peso sulla piattaforma di pesata che supera il carico minimo predefinito viene memorizzato nella memoria di tara alla stabilità. I valori dei campioni successivi sono memorizzati come valori di peso. La piattaforma di pesata ritorna allo stato iniziale quando il peso posto è inferiore al 50% del carico minimo. Impostabile nel Setup sotto:  
**Parametri applicativi:**  
**Solo pesata:**  
**Taratura autom. 1. peso.**

## Carico minimo

Nel menù di Setup s'impone il carico minimo per la taratura automatica del peso del contenitore:

**Parametri applicativi:**  
**Solo pesata:**  
**Carico min. per taratura autom**

Per l'impostazione sono disponibili 10 livelli. Si differenziano nel numero di digit:

1 digit (nessun carico minimo)  
2 digit  
5 digit  
10 digit  
20 digit  
50 digit  
100 digit  
200 digit  
500 digit  
1000 digit

Esempio: Se  $d = 1$  g la divisione è 1 g. Con l'impostazione «1000 digit», il valore viene memorizzato come «tara» ponendo un peso  $\geq 1000$  g.

## Stampa automatica

Il primo valore di peso che supera il carico minimo viene stampato.

Impostazione nel menù di Setup:

**Parametri dello strumento:**  
**Protocollo di stampa:**  
**Uno alla stabilità**

## Pesata con due piattaforme di pesata

Con il tasto  $\Delta\Delta$  si può commutare il display tra le due piattaforme di pesata. L'impostazione per la configurazione della «bilancia di preferenza» è:

**Parametri dello strumento:**  
**Parametri operativi:**  
**Bilancia di preferenza**

Dopo l'accensione viene visualizzata sempre la bilancia di preferenza. Premere  $\Delta\Delta$  per commutare nella seconda piattaforma.

## Parametri dello strumento

### Segnale acustico

Premendo un tasto si sente un segnale acustico di conferma (un bip). Se lo stato operativo non consente l'azionamento del tasto, si sente un doppio segnale acustico. Attivare e disattivare il segnale acustico nel menù di Setup:

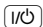

```
Parametri dello
strumento: Parametri
operativi: Segnale
acustico
```

### Tastiera

Si possono bloccare i tasti della tastiera. L'impostazione viene effettuata nel Setup sotto:

```
Parametri dello
strumento:
Parametri operativi:
Tastiera: Blocco delle
funzioni dei tasti
```

Sono possibili tre impostazioni:

- Tutti i tasti sbloccati
- Tutti i tasti bloccati eccetto  e 
- Tasti alfanumerici bloccati

### Display

Il contrasto del display può essere adattato alle condizioni ambientali. L'impostazione viene effettuata

nel Setup sotto:

```
Parametri dello
strumento:
Parametri operativi:
Display: Contrasto
```

La retroilluminazione del display può essere spenta automaticamente.

L'impostazione viene effettuata nel Setup sotto:

```
Parametri dello
strumento:
Parametri operativi:
Display:
Retroilluminazione
```

### Spegnimento automatico

L'impostazione viene effettuata nel Setup sotto:

```
Parametri dello strumento:
Parametri operativi:
Spegnimento automatico
Il timer può essere impostato su:
due, quattro o dieci minuti:
Parametri dello strumento:
Parametri operativi:
Timer
```

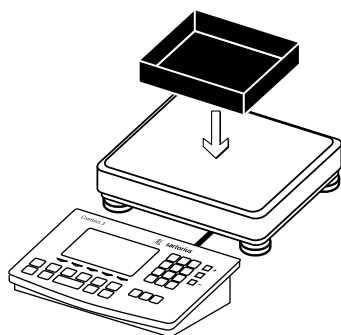
### Esempio:

Pesata con taratura ponendo un contenitore sulla piattaforma



Accendere Combics 3.

Segue un'autodiagnosi. Non appena appare l'indicazione di peso, Combics 3 è pronto per pesare ed è azzerato automaticamente. La bilancia scarica può essere azzerata automaticamente con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$  in ogni momento.




Collocare il contenitore vuoto sulla bilancia.




Tarare la bilancia.

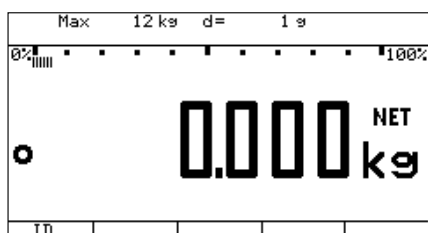
Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica, non serve tarare la bilancia con il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$ ; la bilancia rileva il peso di tara automaticamente non appena viene posto il contenitore.



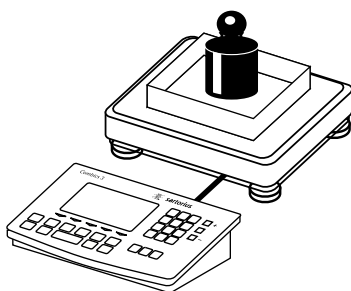Aspettare fino all'apparizione del display azzerato e del simbolo NET (peso netto).



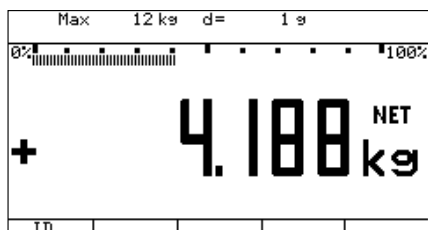Collocare il campione di pesata sulla bilancia.



Aspettare fino all'apparizione dell'unità di peso (controllo della stabilità) e leggere il valore di peso.


### Esempio:

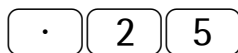Pesata con immissione numerica del peso di tara e stampa del risultato




Accendere Combics 3.


Segue un'autodiagnosi. Non appena appare l'indicazione di peso, Combics 3 è pronto per pesare ed è azzerato automaticamente. La bilancia scarica può essere azzerata automaticamente con il tasto in ogni momento.



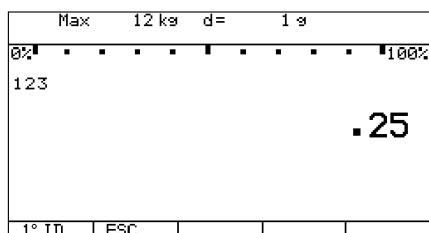Immettere il peso di tara noto tramite la tastiera (qui, per es. 0,25 kg).



Memorizzare il peso di tara immesso.

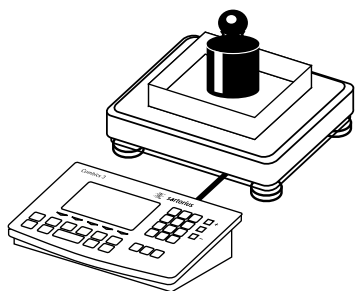


Collocare il campione di pesata con il contenitore sulla bilancia.



Leggere il risultato.



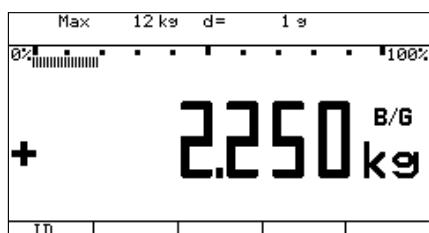Commutare l'indicazione del valore di peso netto. Appare:



il peso lordo (qui, per es. 0,250 kg per il contenitore più 2,000 kg per il prodotto).



Ritornare all'indicazione precedente.



Stampare il risultato.

-----  
24.10.2002      10:09  
Typ            CIS3  
Ser.no.        12345678  
Vers.         1.0103.11.2  
BVers.        01-26-02  
-----  
DURACIER  
GOETTINGEN  
Lotto           123456  
Cliente        Schulze  
24.10.2002      10:09  
-----

Inizio dell'intestazione GMP (viene stampata solo se è stata fatta l'impostazione:  
Stampa GMP)

Fine dell'intestazione GMP  
Righe di intestazione

Identificatore

-----  
G#        +        2.250 kg  
T         +        0.000 kg  
PT2      +        0.250 kg  
N         +        2.000 kg  
-----

Inizio del piè di pagina GMP (viene stampata solo se è stata fatta l'impostazione:  
Stampa GMP)

-----  
24.10.2002      10:10  
Nome :  
-----

Fine del piè di pagina GMP




### Esempio:

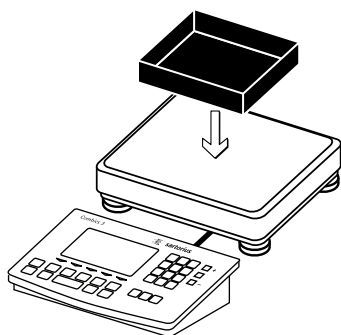Pesata con valori di tara misti, stampa del risultato e cancellazione dei valori di tara



Accendere Combics 3.

Segue un'autodiagnosi. Non appena appare l'indicazione di peso, Combics 3 è pronto per pesare ed è azzerato automaticamente. La bilancia scarica può essere azzerata automaticamente con il tasto in ogni momento.




Collocare il contenitore vuoto sulla bilancia.




Tarare la bilancia.

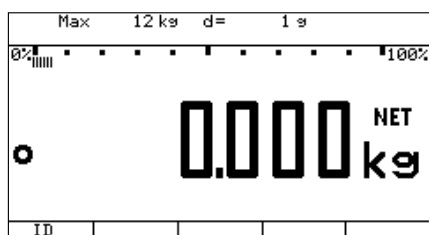
Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica, non serve tarare la bilancia con il tasto ; la bilancia rileva il peso di tara automaticamente non appena viene posto il contenitore.



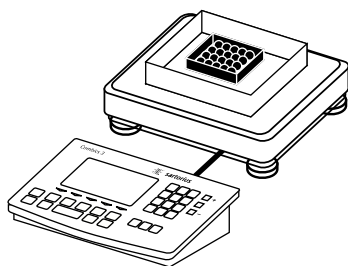Aspettare fino all'apparizione del display azzerato e del simbolo NET (peso netto).



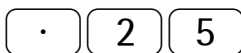
Collocare nel contenitore il campione di pesata confezionato.



Immettere con la tastiera il peso di tara della confezione nell'unità di peso attuale (qui, per es. 0,25 kg)



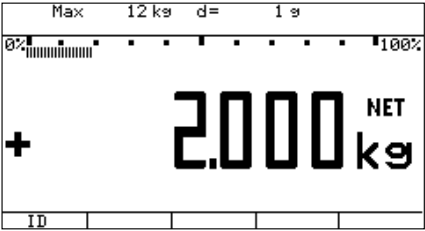Memorizzare il peso immesso della confezione (entrambi i pesi di tara vengono addizionati).



Leggere il valore netto.



Stampare il risultato.


G#	+	6.433	kg
T	+	4.183	kg
PT2	+	0.250	kg
N	+	2.000	kg
-----			



Immettere uno 0 mediante la tastiera.



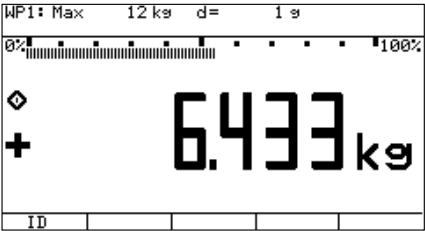Memorizzare il valore immesso (tutti i valori di tara vengono cancellati, sul display appare il valore lordo)



Stampare il risultato.

G#	+	6.433	kg
T	+	0.000	kg
N	+	6.433	kg
-----			

# Identificazione individuale (Identificatore)

In tutti i programmi applicativi si possono memorizzare dei codici di identificazione per il rilevamento dei valori misurati (per es. nome del prodotto, numero di lotto, ecc.)

## Caratteristiche

- Sono disponibili quattro identificatori.
- Ogni identificatore può consistere di un nome e un valore.
- Il nome di ogni identificatore viene stampato a sinistra, mentre il valore a destra. Se il nome insieme al valore sono troppo lunghi per una riga di stampa, vengono stampati in più righe.
- I nomi degli identificatori vengono immessi nel Setup sotto:  
**Parametri dello strumento: Protocollo di stampa: Identificatore**  
Ogni nome dell'identificatore può avere un massimo di 20 caratteri. Per l'immissione del valore ID appaiono un massimo di undici caratteri, stampati vengono però tutti e 20.
- Si possono introdurre un massimo di 21 caratteri per il valore dell'identificatore mediante l'Help di linea **ID**.
- Si può accedere al primo identificatore direttamente tramite il blocco numerico. Il valore viene memorizzato premendo l'Help di linea **1 ID**.
- Per cancellare i singoli caratteri dell'identificazione, premere il tasto **[CF]**; per cancellare l'intero identificatore, premere l'Help di linea **Canc.**.
- Se il nome e anche il valore di un identificatore sono vuoti, quest'ultimo non viene stampato.
- Le condizioni per la stampa dell'identificatore sono configurate nel menù di Setup (descrizione nella sezione Configurazione dell'emissione a stampa).

## Impostazione di fabbrica dei nomi degli identificatori

ID1: **ID 1**  
ID2: **ID 2**  
ID3: **ID 3**  
ID4: **ID 4**

## Impostazione di fabbrica dei valori degli identificatori

Nessun valore impostato.

## Tasti funzione Help di linea

<b>ID</b>	Commuta nella schermata per l'immissione dell'identificatore
<b>ESC</b>	Annulla l'immissione
<b>Efface</b>	Cancella l'identificatore selezionato
<b>1er ID</b>	Memorizza l'immissione come valore per il primo identificatore.

**Esempio:**  
Immissione del nome dell'identificatore.  
Per l'identificatore 1 e l'identificatore 2 si devono immettere come nome il «N. di lotto» e il «Cliente».

SETUP

Selezionare Setup.

2 volte l'Help di linea «V»

SETUP
Parametri applicativi
Tasto Fn
Parametri dello strumento
Info
Lingua

Help di linea «Z»  
6 volte l'Help di linea «V»

Selezionare i parametri dello strumento.

SETUP	STRUMENTO
Piattaforma di pesata 1	
COM 1	
COM 2	
Unicom	
Entrata di controllo	
Codice a barre	
Protocollo di stampa	
Parametri operativi	
Ora	
Password	
<<	< ^ v >

Help di linea «Z»  
Help di linea «V»

Selezionare il protocollo di stampa.

SETUP	STRUMENTO	STAMPA
Righe di intestazione		
Identificatore		
Protocollo ISO/GLP/GMP		
Data/Ora		
Uno alla stabilità		
FlexPrint		

Help di linea «Z»

Selezionare l'identificatore.

STRUMENTO	STAMPA	IDENTIFIC.
ID1:		ID1
ID2:		ID2
ID3:		ID3
ID4:		ID4

ABC

Selezionare l'immissione alfabetica.

10 volte 2  
ABC

Immettere la lettera «L» premendo il tasto 2 10 volte.

STRUMENTO	STAMPA	IDENTIFIC.
ABC		JKL5jkl
ID1:		ID1
ID2:		ID2
ID3:		ID3
ID4:		ID4

13 volte 2  
ABC

Immettere la lettera «O» premendo il tasto 4 13 volte.

STRUMENTO	STAMPA	IDENTIFIC.
ABC		Lotto
ID1:		ID1
ID2:		ID2
ID3:		ID3
ID4:		ID4

Immettere le lettere successive nello stesso modo.

### Help di linea «↵»

STRUMENTO	STAMPA	IDENTIFIC.
ABC		
ID1:		Lotto
ID2:		Cliente
ID3:		ID3
ID4:		ID4

Confermare il nome per il primo identificatore.

### Help di linea «↵»

STRUMENTO	STAMPA	IDENTIFIC.
ID1:		Lotto
ID2:		Cliente
ID3:		
ID4:		

Immettere l'identificatore ID2 (qui: Cliente)

Confermare il nome per il secondo identificatore.

### Help di linea «↵»

### Help di linea «<<»

Cancellare l'identificatore ID3 e ID4.

Confermare l'immissione.

Uscire da Setup.

### Esempio:

Immettere i valori dell'identificatore.

Per l'identificatore 1 e l'identificatore 2 si devono immettere come valori: «123456» e «Schulze».

Max	12 kg	d=	1 g
0%			100%
0	0.000	kg	
ID			

### Help di linea «I D»

IDENTIF.:
Lotto
Cliente

Avviare l'immissione dei valori dell'identificatore.

1	2	3
4	5	6

Immettere il valore dell'identificatore 1 (qui: 123456).

IDENTIF.:
123
Lotto
Cliente

### Help di linea «↵»

IDENTIF.:
ABC
Lotto
Cliente

Confermare il valore per il primo identificatore:

### Help di linea «↵»

### Help di linea «<<»

Immettere il valore dell'identificatore 2 (qui: Schulze).

Confermare l'immissione.

Uscire dall'immissione dei valori dell'identificatore.

# Calibrazione e regolazione

## Scopo

Per calibrazione s'intende la determinazione della differenza tra il valore di misura visualizzato e il valore di massa reale. Durante la calibrazione non avviene nessuna modifica nella bilancia.

Per regolazione s'intende quella funzione che elimina lo scostamento tra il valore di misura visualizzato e il valore reale riportando uno strumento per pesare al livello di precisione richiesto per il suo uso.

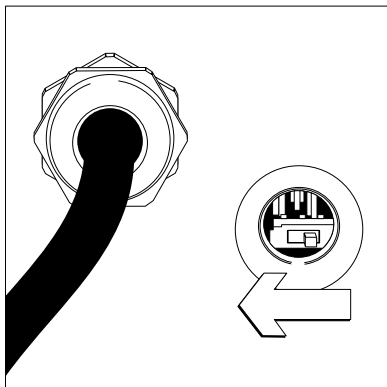
## Impostazione della funzione

### «Impiego in metrologia legale»

Questa impostazione per «pesare in metrologia legale» avviene mediante un commutatore. Il commutatore si trova sotto una copertura posta sul retro dell'alloggiamento a sinistra.

Posizione:

- Commutatore a sinistra = impostazione per l'impiego in metrologia legale
- Commutatore a destra = impostazione standard



## Caratteristiche

La disponibilità delle seguenti caratteristiche dipende dalla piattaforma di pesata collegata.

Le caratteristiche possono essere impostate nel menù di Setup:

- Non è possibile la regolazione esterna sulle bilance verificate
- Regolazione esterna con il valore di peso di fabbrica o peso standard oppure un peso definito dall'utente (non disponibile sulle bilance verificate):  
... Calibrazione/  
Regolazione: Funzione del tasto CAL
- Indicazione di peso per la calibrazione/regolazione esterna:  
... Calibrazione/  
Regolazione: Peso utente
- Regolazione interna per piattaforme di pesata IS (impostazione sotto: COM1: oppure COM2: PP2)
- Blocco della funzione del tasto  $\rightarrow T \leftarrow$ , per impedire l'attivazione delle funzioni descritte sopra:  
... Calibrazione/  
Regolazione: Funzione del tasto CAL
- Calibrazione seguita da una regolazione automatica o manuale (non disponibile sulle bilance verificate):  
... Calibrazione/  
regolazione: Sequenza calib./regol.
- La regolazione viene segnalata dal simbolo PP lampeggiante. Se è collegata più di una piattaforma, si visualizza anche il numero della piattaforma:  
Calibrazione/  
regolazione: Sequenza calib./regol.  
Funzione tasto CAL
- Attivazione o disattivazione della regolazione esterna:  
... Calibrazione/  
regolazione: Attivaz. regolazione est.

- Visualizzazione dell'altitudine e il grado di latitudine o della accelerazione gravitazionale dopo che è apparso Cal all'avvio dell'operazione di calibrazione, se questi valori sono supportati dalla piattaforma collegata: Parametri dello strumento:  
Parametri operativi:  
Dati geografici  
I parametri: altitudine (Altitud), latitudine (Latitud) oppure accelerazione gravitazionale (Gravity) appaiono per circa 1 secondo; poi si visualizza il valore corrispondente che deve essere confermato con il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$ .

## Preparazione

- Selezionare Setup: premere il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$
  - Selezionare Parametri dello strumento: premere l'Help di linea >
  - Selezionare la piattaforma di pesata 1 «PP1»: premere l'Help di linea > oppure
  - Selezionare l'interfaccia 1 «COM1» oppure l'interfaccia 2 «COM2» (dipende dall'interfaccia): premere l'Help di linea >
- Selezionare la piattaforma di pesata 2 «PP2»: premere l'Help di linea >

## Calibrazione/regolazione

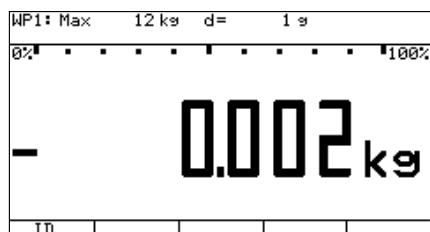
- Funzione tasto CAL
  - o Cal./reg. esterna con peso standard
  - o Cal./reg. esterna con peso definito dall'utente
  - o Tasto bloccato
- Sequenza calib./regol.
  - o Cal. con regol. autom.
  - o Cal. con regol. manuale
- Funzione isoCAL
  - o Off
  - o Consiglio di regolazione
- Attivaz. regolazione esterna
  - o Sbloccata
  - o Bloccata
- Parametri per peso esterno

o = Impostazione di fabbrica

- Per salvare le impostazioni e uscire da Setup: premere il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$  oppure l'Help di linea <

### Esempio:

Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi standard (parametri di pesata impostati in fabbrica))




Azzerare la bilancia.




a lungo

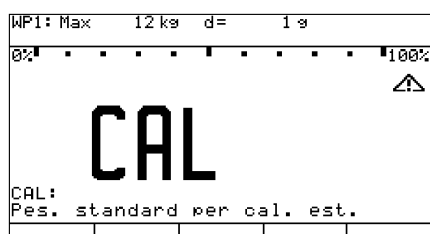
Avviare la calibrazione (per es. quando lampeggia il simbolo WP)



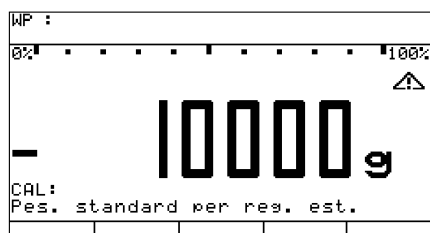
L'indicazione Cal appare per due secondi.



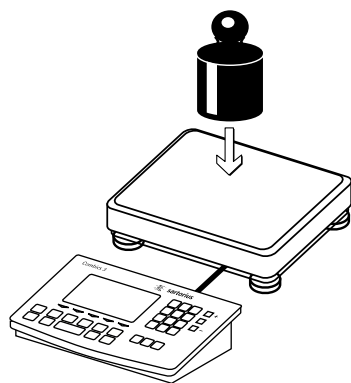
Appare la richiesta di collocare il peso di calibrazione/regolazione (qui 10 000 g).



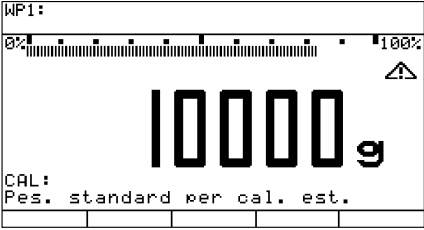Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesata.



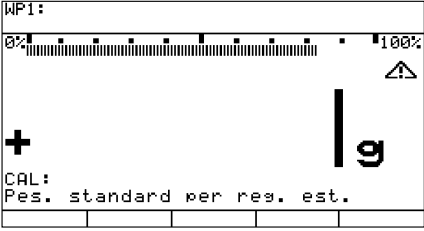Si visualizza la differenza tra il valore di peso e il valore di massa reale, con i segni +/-.




Se si preme il tasto **[→0←]** per annullare la calibrazione senza eseguire la regolazione, viene stampato un protocollo.

Calibrazione esterna  
Nom. + 10000 g  
Diff. + 1 g



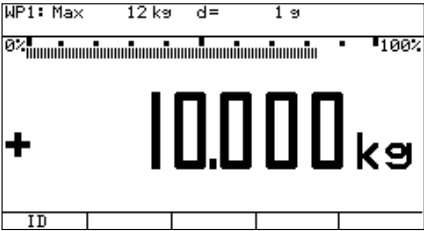Attivare la regolazione (premere il tasto **[→0←]** per annullare la calibrazione/regolazione)



Il peso di regolazione appare al termine della regolazione.


-----  
24.10.2002 10:15  
Typ CIS3  
Ser.no. 12345678  
Vers. 1.0103.11.2  
BVers. 01-26-02  
-----  
Calibrazione esterna  
Nom. + 10000 g  
Diff. + 1 g  
Regolazione esterna  
Diff. + 0 g  
-----  
24.10.2002 10:15  
Nome :  
-----

Viene stampato un protocollo GMP.



## Uscita dei dati

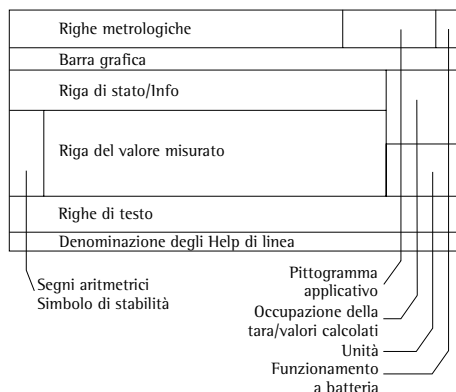L'uscita dei dati avviene mediante visualizzazione sull'indicatore e tramite le interfacce. Ci sono due interfacce dati standard (COM1 e COM2) ed un'interfaccia multifunzionale (UniCOM) opzionale. Per maggiori informazioni, si veda pag. 43.





### Visualizzazione sull'indicatore (valori di pesata e valori calcolati)

#### Righe metrologiche (nell'impiego in metrologia legale)

In questa riga sono indicati:

- Max 300 kg** – limite superiore del campo di pesata (per es. 300 kg)
- Min 0.1 kg** – limite inferiore del campo di pesata sotto al quale non si può scendere impiegando la bilancia in metrologia legale (per es. 0,1 kg)
- e = 0.1 kg** – divisione di verifica; non importante per le bilance non soggette all'uso in metrologia legale (per es. 1 kg)
- d = 0.01 kg** – precisione di lettura/divisione di lettura: indicazione dell'ampiezza delle divisioni della bilancia (per es. 0,01 kg)

#### Segni aritmetici e simboli


-  – Il simbolo Busy appare finché lo strumento esegue operazioni interne attivate mediante i tasti
- +** **-** – Segni aritmetici del valore di misura
-  – Simbolo di azzeramento: indicazione per il valore di pesata «zero» (dopo l'azzeramento della bilancia oppure della piattaforma di pesata attiva)

#### Riga del valore di misurato/risultato




- 5.234** – Valore di pesata corrente (sugli strumenti omologati con e ≠ d, l'ultimo posto viene contrassegnato con una cornice)
- 20** – Valori calcolati per le applicazioni (per es. per «Conteggio» o «Pesate in percentuale»)

#### Unità

- g** – Unità di peso corrente (p.e. «g»)
- PCS** – Identificazione per altre misure (p.e. per l'applicazione «Conteggio»)

<b>Occupazione della memoria di tara, valori calcolati, indicazione della piattaforma di pesata attiva se sono collegate più piattaforme di pesata</b>	
	- Valori calcolati (non valori omologati)
<b>B/G NET</b>	- Valore lordo oppure della memoria di tara occupata (valore netto)
<b>PT</b>	- Immissione manuale della tara (tramite lettore di codici a barre) per l'informazione della tara
<b>WP1</b>	- Simbolo della piattaforma di pesata attiva se sono collegate 2 piattaforme di pesata. Il simbolo lampeggia durante la richiesta di regolazione isoCal della piattaforma di pesata.
<b>WP</b>	- Se il timer è attivato (Setup: ...: <b>Parametri operativi: Timer</b> ), il simbolo lampeggia per indicare che è trascorso metà del tempo impostato.

#### Pittogramma

-  - Simbolo per l'operazione di stampa in corso
-  - Simbolo per il protocollo GMP attivato
-  - Indicatore di carica dell'unità di batterie ricaricabili: batterie cariche, batterie scariche

#### Barra grafica

Con la barra grafica viene indicato il valore di misura:

 0% 100%

- come valore percentuale del peso massimo della bilancia oppure della piattaforma di pesata (peso lordo)


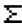








- in relazione ad un valore nominale con i limiti di tolleranza

#### Pittogramma applicativo

- R1 R2** - Campo per le bilance con campi di pesata plurimi

Simboli per le applicazioni:

-  - Simbolo per l'applicazione «Conteggio»
-        - Simboli per le applicazioni «Sommatoria», «Pesate di controllo +/-», «Classificazione», «Totale netto», «Pesate in percentuale», «Conteggio» (eventualmente con ottimizzazione di riferimento) e «Misurazione neutrale». Una spiegazione più dettagliata dei singoli simboli si trova nei capitoli delle applicazioni rispettive.

# Interfaccia dati

L'indicatore possiede due interfacce dati: standard COM 1 e COM2.

È disponibile una terza interfaccia opzionale (interfaccia dati universale UniCOM, vedi capitolo «Accessori»).

COM 1 e COM2 sono configurabili (vedi il capitolo «Impostazioni») per diverse funzioni di immissione ed emissione dei dati, per es. per stampante, memoria alibi, PC, lettore di controllo, 2° piattaforma di pesata oppure per l'immissione di comandi di controllo (per es. tramite un comando a pedale collegato a COM1).

Si può integrare l'interfaccia opzionale UniCOM come interfaccia Profibus-DP, RS232, RS485/RS422 oppure come uscita analogica (interfaccia di tensione/corrente). Tramite questa interfaccia si può collegare un lettore di codici a barre oppure un'unità di batterie ricaricabili.

## Caratteristiche delle interfacce

- Strumento CISL3 (livello di protezione IP44): collegamento tramite presa a 25 pin DSub. Per il collegamento di un secondo strumento alla stessa interfaccia dati, è necessario l'impiego di un connettore a T (Accessori).
- Strumento CIS3 (livello di protezione IP67): il cavo di collegamento della periferica viene collegato all'indicatore per mezzo di un pressacavo.

⚠ Attenzione nell'usare cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o di uso comune, questi hanno spesso un'altra assegnazione dei pin rispetto ai cavi usati dalla Sartorius. Controllare lo schema di assegnazione dei pin e staccare le linee che differiscono al fine di evitare disfunzioni o guasti.

## Specificazioni

### Interfaccia seriale:

Modo di funzionamento:	completamente duplex	
Standard:	COM 1:	RS232,
	COM2 <sup>1)</sup> :	RS232, RS485
	UniCOM (opzionale) <sup>1)</sup> :	RS232 oppure RS422/485
Attacco:	strumenti CISL3 (livello di protezione IP44): presa a 25 pin D-Sub strumenti CIS3 (livello di protezione IP67): collegamento delle estremità libere del cavo a morsetti a vite nell'alloggiamento, inserimento nell'alloggiamento attraverso il pressacavo.	
Velocità di trasmissione:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 baud (dipende dal modo operativo)	
Numero dei bit di dati:	7, 8 bit	
Parità:	Space, Odd, Even, None (dipende dal modo operativo)	
Numero dei bit di stop:	1 o 2 bit di stop	
Modo operativo Handshake:	Software (XON/XOFF), Hardware (1 carattere dopo CTS)	
Protocolli:	SBI, XBPI-232 <sup>2)</sup> , XBPI-485 <sup>2)3)</sup> , MP8 binario <sup>4)</sup> , SMA, Profibus (solo per UniCOM) Diverse stampanti: – YDP01IS – YDP02IS-Etichette – YDP01IS-Etichette – Universale – YDP02 – YDP04IS – YDP03 – YDP04IS-Etichette – YDP02IS – memoria alibi YAM01IS	
Indirizzo di rete <sup>5)</sup> :	0, 1, 2, ..., 31	
SBI: uscita dati manuale:	senza stabilità, dopo la stabilità, protocollo di stampa configurabile	
SBI: uscita dati automatica:	senza stabilità, alla stabilità, in funzione di un intervallo di tempo	
SBI: formato di uscita:	16 caratteri, 22 caratteri	
Stampa del protocollo applicativo:	emissione di un protocollo di stampa configurabile	

### Impostazioni di fabbrica:

secondo lo strumento configurato, esempio: impostazione «Protocollo dei dati», «SBI»

Velocità di trasmissione:	1200 baud
Numero dei bit di dati:	7 bit
Parità:	Odd (dispari)
Numero dei bit di stop:	1 bit di stop
Handshake:	Handshake via hardware, 1 carattere dopo CTS
Attivazione dell'uscita dati:	stampa manuale dopo la stabilità
Autoprint in funzione del tempo:	1 intervallo del lettore
Formato di uscita:	22 caratteri

### Interfaccia analogica UniCOM (opzionale)

Standard:	4 fino a 20 mA, 0 fino a 20 mA, 0 fino a 5V
Alimentazione:	interna o esterna
Impostazioni di fabbrica:	4 a 20 mA, alimentatore interno
Attacco:	strumenti CISL3 (livello di protezione IP44): presa a 25 pin D-Sub strumenti CIS3 (livello di protezione IP67): collegamento delle estremità libere del cavo ai morsetti a vite nell'alloggiamento; inserimento nell'alloggiamento attraverso il pressacavo.

⚠ Eventuale funzionamento delle periferiche tramite alimentazione esterna.

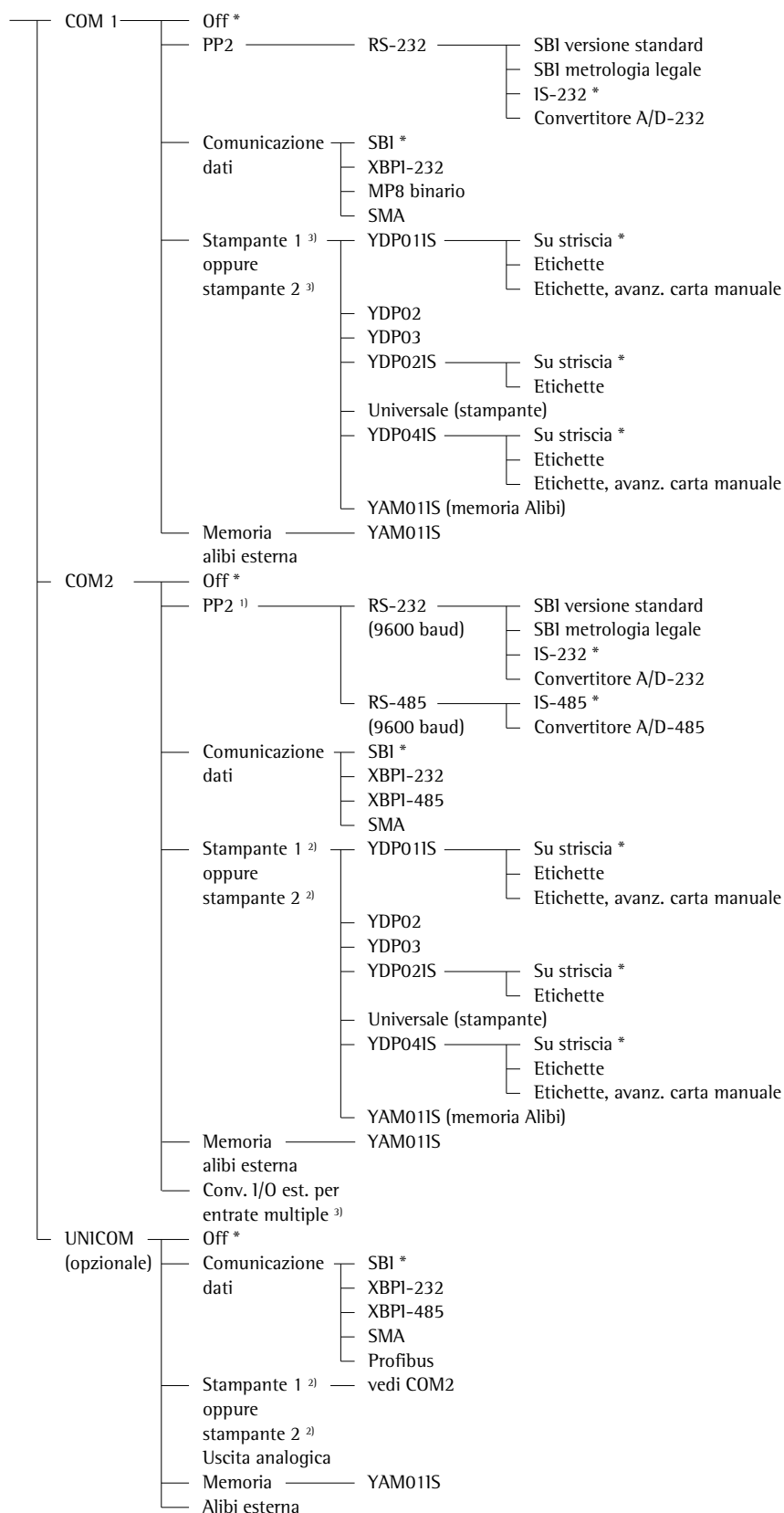
<sup>1)</sup> I segnali di COM2 e UniCOM sono condotti attraverso un'unica presa D-Sub

<sup>2)</sup> Modo operativo XBPI sempre con 9600 baud, 8 bit, parità: Odd (dispari), 1 bit di stop

<sup>3)</sup> Interfaccia COM2 e interfaccia dati universale UniCOM opzionale

<sup>4)</sup> Solo interfaccia standard COM 1

<sup>5)</sup> L'indirizzo di rete ha valore solo per il modo operativo XBPI



## Preparazione

- Per l'assegnazione e lo schema di assegnazione dei pin vedi la sezione «Schema di assegnazione dei pin».

## Possibilità di collegamento per le periferiche

Alle interfacce standard COM 1 e COM 2 oppure all'interfaccia universale UniCOM, opzionale, si possono collegare le seguenti stampanti:

- YDP02 (libera impostazione dei parametri dell'interfaccia)
- YDP03 (libera impostazione dei parametri dell'interfaccia)
- YDP01IS (stampante a striscia o di etichette)
- YDP02IS (stampante a striscia o di etichette)
- YDP04IS (stampante a striscia o di etichette)
- Uscita dati universale (libera impostazione dei parametri di trasmissione)
- Memoria Alibi YAM01IS

⚠ Funzionamento delle periferiche eventualmente tramite alimentazione esterna.

Alle interfacce standard COM 1 e CPM 2 si possono collegare pure i seguenti strumenti:

- Comando a pedale e comando a mano
- PC (interfaccia RS232)
- 2° piattaforma di pesata (solo per il modello Combics 2, interfaccia RS232)
- Lettore di controllo esterno (a 3 segnalazioni luminose) tramite l'entrata/uscita digitale (standard Sartorius)
- Impiego di un'unità di batterie ricaricabili
- Collegamento di un lettore di codici a barre/interfaccia per tastiera

All'interfaccia universale UniCOM, opzionale si possono collegare i seguenti strumenti:

- PC (interfaccia RS232)
- 2° stampante (necessaria l'alimentazione esterna)
- Lettore a distanza
- I/O digitale
- Interfaccia di corrente (0/4-20 mA)
- PLC con Profibus DP

\* Impostazione di fabbrica

<sup>2)</sup> configurazione di un massimo di 2 stampanti

<sup>1)</sup> solo per COM2

<sup>3)</sup> la funzionalità sarà messa a disposizione successivamente

Il modello Combics 3 permette il collegamento di una 2° piattaforma di pesata. Questa può funzionare sia collegandola alle interfacce COM 1 o sia a COM 2. L'interfaccia COM 1 funziona nel modo RS232. Una 2° piattaforma di pesata può funzionare nel modo operativo

- SBI,
- XBPI-232 (impostazione di fabbrica)
- Convertitore A/D-232.

L'interfaccia COM 2 e l'interfaccia universale UniCOM, opzionale, possono funzionare sia nel modo RS232 sia nel modo RS485. Una 2° piattaforma di pesata può funzionare nel modo operativo

- SBI (modo RS232)
- IS-232 (modo RS232)
- Convertitore A/D-232 (modo RS232)
- IS485 (modo RS485, modo operativo XBPI, impostazione di fabbrica)
- Convertitore A/D-485 (modo RS485).

Per il funzionamento come interfaccia per stampante si possono utilizzare facoltativamente le interfacce COM 1 e COM 2 oppure l'interfaccia universale UniCOM.

Per il funzionamento come interfaccia di comunicazione, il protocollo di stampa può essere impostato sui seguenti modi operativi

- SBI (impostazione di fabbrica)
- XBPI-232
- XBPI-485
- Binario MP8 (solo interfaccia COM1)
- SMA

Nel modo operativo SBI si possono controllare l'unità del display e la piattaforma di pesata collegata mediante comandi ESC, inviati dal PC attraverso l'interfaccia di comunicazione (COM 1/COM 2 oppure UniCOM). Ulteriori spiegazioni si trovano nella sezione «Formato dei dati in entrata» in questo capitolo.

## Impostazione dell'uscita dei dati SBI

L'impostazione dell'uscita dati avviene nel menù di Setup sotto la voce «Comunicazione dati: SBI: Emissione dei dati». Ci sono le seguenti possibilità:

- Emissione di un valore di lettura con o senza stabilità
- Emissione automatica di un valore di lettura con o senza stabilità ed emissione dei dati automatica in funzione del tempo.
- Emissione di un protocollo di stampa configurabile per mezzo delle voci di menù «Parametri dello strumento: Protocollo di stampa: Stampante 1 oppure 2» (vedi pagina seguente). L'utente può comporre il protocollo nel Setup utilizzando diverse informazioni a blocco. Vedi a riguardo la sezione «Configurazione dell'emissione a stampa». Generalmente viene emesso il valore corrente sul display (valore di pesata con unità, valore calcolato, indicazione numerica e alfabetica), ad eccezione dell'emissione di un protocollo di stampa configurabile.

L'emissione dei dati avviene generalmente solo alla stabilità della bilancia (impostazione di fabbrica). Può avvenire anche senza stabilità oppure come stampa del protocollo. Per l'emissione dei dati «senza stabilità» bisogna impostare in modo corrispondente la comunicazione dei dati (SBI > Uscita dati).

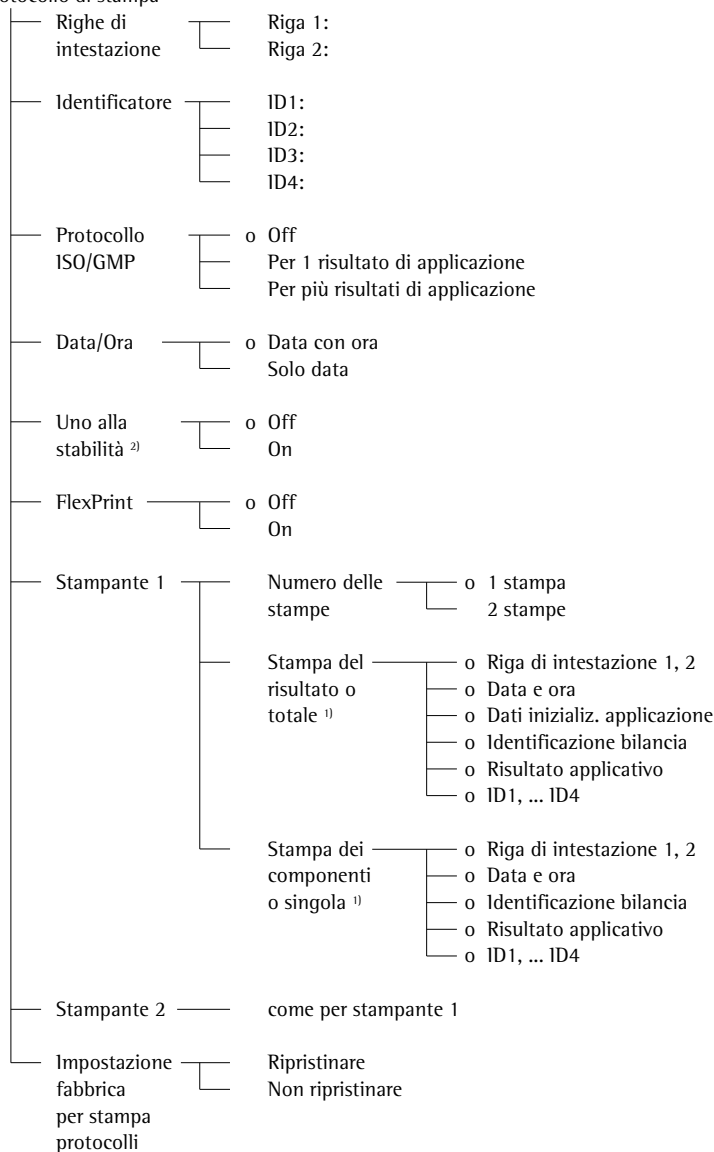
Per l'uscita dati automatica in funzione del tempo, bisogna inserire anche il numero degli intervalli di lettura.

Una riga di stampa consiste di un massimo di 20 caratteri. I primi 6 caratteri, i cosiddetti identificatori (Header) identificano il valore che segue. L'emissione degli identificatori può essere disattivata così che la riga di stampa risulta composta da 14 caratteri. Impostazione tramite la voce di menù Formato delle righe.

Maggiori informazioni si trovano nella sezione «Prospetto del Setup» nel capitolo «Impostazioni».

## Parametri dello strumento

### Protocollo di stampa



o = impostazione di fabbrica

<sup>1)</sup> = possibile la selezione multipla

<sup>2)</sup> = con il superamento del carico minimo (impostabile sotto la voce di menù:  
Parametri applicativi: ... : Carico minimo per taratura automatica)

## Stampa

L'emissione dei dati sull'interfaccia della stampante avviene mediante il tasto . Nel modo Setup, le impostazioni del menù vengono stampate premendo il tasto .

La stampa avviene dopo la ricezione del comando SBI «Esc k P \_» (vedi sezione «Formato dei dati in entrata» in questo capitolo) oppure premendo il tasto (per es. «conferma della registrazione dei dati» oppure «avvio della valutazione dei dati») per l'emissione di un protocollo di stampa configurabile.

Durante l'emissione dei dati si visualizzano sul display i simboli e .

Formato delle righe: vedi pagina precedente.

## Configurazione dell'emissione a stampa

La configurazione avviene mediante il menù numerico (livello 6, vedi il diagramma a sinistra).

L'utente può configurare un protocollo diverso per ogni interfaccia. Ogni protocollo è composto da diversi blocchi di informazione:

- Righe d'intestazione: riga d'intestazione 1, riga d'intestazione 2
- Data, ora
- Linea tratteggiata e interlinea (per l'applicazione «Pesata») non sono configurabili.
- Dati di inizializzazione (per es. numero di riferimento, peso del pezzo di riferimento) seguiti da un'interlinea.

Questo blocco manca nel protocollo di stampa del risultato delle applicazioni «Sommatoria» e «Totale netto».

- Numero di serie della cella di carico
- Dati di risultato: valore lordo, di tara e netto, interlinea e risultato dipendente dall'applicazione, per es. numero dei pezzi, seguito da una linea tratteggiata.

Per mezzo del menù si possono selezionare singolarmente i blocchi d'informazione (Selezione multipla, impostazione di fabbrica: Seleziona tutti i blocchi). Un blocco non selezionato, non viene stampato.

### Blocchi di informazione

Qui di seguito sono rappresentati i singoli blocchi di informazione come esempi di stampa. Una visione generale dei singoli protocolli (esempi di protocolli) si trova alla fine di questa sezione.

### Righe d'intestazione

In questo esempio il nome della ditta viene stampato centralmente: 4 o 5 spazi all'inizio e alla fine.

EISENSCHMIDT  
GOETTINGEN

### Identificatore

Il codice (per es. ID1) è stampato a sinistra, mentre la parola o il valore a destra. Se il nome insieme al valore sono troppo lunghi per una riga di stampa, vengono stampati in più righe

Esempio per 4 identificatori:

ID1 Nr. di lotto 1234  
ID2 Eisenmeier GmbH  
ID3 Viti M4x6  
ID4 Sig. Schmidt  
-----

### Data/ora

Esempio di stampa:

21.01.2002 16:02

Per ottenere un'ora unitaria si può eseguire l'impostazione «Solo data». In questo modo, l'ora può essere introdotta da un controllo preposto per avere nel sistema sempre l'ora uguale (per es. mediante PC).

### Blocco di separazione = linea tratteggiata

Questo blocco viene inserito automaticamente prima della stampa di altri blocchi di informazione.

-----

### Dati di inizializzazione dell'applicazione

Il contenuto di questo blocco dipende dall'applicazione. Per esempio, nell'applicazione «Conteggio» vengono stampati il numero di riferimento e il peso dei pezzi di riferimento. Il blocco finisce con una interlinea. Esempio di stampa per «Conteggio»:

nRef 10 pcs  
wRef + 0.035 kg

### Identificazione della bilancia

Esempio di stampa per numero di serie della piattaforma di pesata:

Nr. di serie 1234567890


### Risultato applicativo

Il contenuto di questo blocco dipende dall'applicazione. Se l'applicazione lo permette, verranno stampati sempre il peso lordo, netto e tara seguito da un'interlinea. Il blocco finisce con una linea tratteggiata. Esempio di stampa per «Conteggio»:


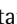
G# + 1.402 kg  
T + 0.200 kg  
N + 1.202 kg


Qnt 34 pcs  
-----

### Protocollo GMP

Per mezzo dell'impostazione di menù «Protocollo ISO/GMP», il protocollo di stampa può essere completato stampando un'intestazione e un piè di pagina GMP. Se il protocollo GMP è attivato (impostazione di fabbrica: protocollo GMP disattivato) sul display appare il simbolo  fino all'emissione del protocollo GMP. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Protocollo GMP disattivato (impostazione di fabbrica)
- Protocollo GMP attivato per 1 risultato di misura
- Formato GMP attivato per più risultati di misura

L'intestazione GMP viene stampata non appena si stamperà il primo risultato di misura dopo l'attivazione del protocollo GMP. Il piè di pagina GMP viene stampato dopo un singolo risultato di misura oppure dopo una serie di risultati di misura se è stato premuto a lungo il tasto . Il simbolo  rimane visibile sul display fino alla stampa del piè di pagina GMP.

Se la bilancia deve essere cambiata mentre viene emessa una stampa GMP per più risultati di misura, premendo il tasto  viene stampato il piè di pagina GMP per la bilancia finora usata. Alla stampa successiva viene stampata l'intestazione GMP per la nuova bilancia selezionata.

Al termine delle operazioni di «Calibrazione, regolazione», «Linearizzazione» e «Impostazione/cancellazione del precario» viene sempre creata automaticamente una stampa GMP.

Usando una stampante di etichette in certe condizioni la lunghezza delle etichette può non essere sufficiente per la stampa. Mediante l'impostazione nel menù, dopo la stampa dell'intestazione GMP e del risultato, si ha un avanzamento automatico della carta.

A pagina seguente sono rappresentati 3 esempi per l'intestazione di protocollo GMP e il piè di pagina del protocollo GMP (vedi sezione «Esempi di protocolli»).

## Esempi di protocolli

Per la spiegazione dei singoli blocchi di informazione, vedi la sezione «Configurazione dell'emissione a stampa» alle pagine precedenti. Per l'identificazione dei dati di risultato (Header), vedi il capitolo dell'applicazione relativa.

### Applicazione «Pesata»

Il blocco di informazione «Dati di inizializzazione» è vuoto. Se selezionato, viene stampata una interlinea.

Rappresentazione del codice di identificazione della piattaforma di pesata

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.01.2002      09:43
-----
```

Nr. di serie 80705337

```

G#    +    1.402 kg
T      +    0.200 kg
N      +    1.202 kg
-----
```

### Applicazione «Conteggio»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero dei pezzi di riferimento e il peso del pezzo di riferimento. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato il numero dei pezzi.

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
nRef      10 pcs
wRef    +    0.035 kg

G#    +    1.402 kg
T      +    0.212 kg
N      +    1.190 kg

Qnt      34 pcs
-----
```

### Applicazione «Misurazione neutrale»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero di riferimento e il peso di riferimento. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato il numero dei pezzi.

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
Ref      2 o
wRef    +    1.200 kg

G#    +    14.700 kg
T      +    0.300 kg
N      +    14.400 kg

Qnt      12 o
-----
```

### Applicazione «Pesate in percentuale»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il valore percentuale di riferimento e il peso di riferimento. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato il valore percentuale rappresentato come valore residuo o di perdita.

Rappresentazione del valore residuo

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
pRef      100 %
Wxx%    +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg
T      +    0.200 kg
N      +    1.659 kg

Prc      79 %
-----
```

Rappresentazione del valore di perdita

```

      :
      :
      :
D      21 %
-----
```

### Applicazione «Pesate di controllo +/-»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il peso nominale, il peso minimo e il peso massimo. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e della tara. I risultati ulteriori possono essere emessi in 2 modi di rappresentazione diversi:

- Rappresentazione del peso:  
nel campo dei valori accettati e valori non accettati viene sempre stampato lo scostamento dal peso nominale come scostamento percentuale e assoluto.
- Rappresentazione del valore limite:  
nel campo dei valori accettati lo scostamento dal peso nominale viene stampato come scostamento percentuale e assoluto.  
Nel campo dei valori non accettati viene stampato «HH» per il sovraccarico e «LL» per il peso insufficiente.

Campo dei valori accettati nella rappresentazione del peso e del valore limite

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
Setp    +    1.300 kg
Min      +    1.235 kg
Max      +    1.365 kg

G#    +    1.312 kg
T      +    0.000 kg
N      +    1.312 kg

Lim      +    0.92 %
W.Diff+    0.012 kg
-----
```

Campo dei valori non accettati nella rappresentazione del peso

```

      :
      :
      :
Lim      -    7.69 %
W.Diff-    0.100 kg
-----
```

Campo dei valori non accettati (peso insufficiente) nella rappresentazione del valore limite

```

      :
      :
      :
Stat      LL
-----
```



Campo dei valori non accettati (sovraccarico) nella rappresentazione del valore limite

:

Stat HH

#### Applicazione «Classificazione»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene i limiti superiori delle classi di peso 1, 2, 3, 4. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato la classe di peso assegnata (1 fino a 5, dove la classe 5 significa il superamento della classe 4).

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
Lim1 + 10.000 kg
Lim2 + 11.000 kg
Lim3 + 12.000 kg
Lim4 + 13.000 kg

G# + 9.700 kg
T + 0.000 kg
N + 9.700 kg

Class 11)
-----

```

<sup>1)</sup> La classificazione può accettare i valori da 1 a 5. Il campione di pesata viene assegnato alla classe 5 se il suo peso supera il valore limite «Lim4» e precedentemente nel menù è stato selezionato il parametro «5 classi».

#### Applicazione «Pesata di animali»

Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero dei valori di misura per la formazione della media. Il blocco del risultato contiene il peso della tara e il valore medio.

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
mDef 8

T + 0.000 kg
x-Net + 4.202 kg
-----

```

#### Applicazione «Totale netto»

Il blocco dei dati di inizializzazione è vuoto. I valori rappresentati nel blocco del risultato dipendono dallo stato del programma nel quale l'utente genera la stampa.

Ci sono le seguenti possibilità:

- Stampa della somma e del risultato (premere il tasto **[CF]**)
- Stampa singola e dei componenti (premere l'Help di linea **M+** per la registrazione dei componenti oppure il tasto **[E]** per la stampa singola)

Stampa della somma

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
n 3
Tot.cp+ 3.400 kg
Cont.T+ 0.200 kg
-----

```

Stampa singola e dei componenti  
Premendo il tasto **[OK]** si stampa solo una volta la testa del protocollo. I singoli componenti vengono stampati automaticamente uno dopo l'altro alla pressione dell'Help di linea **M+**. Se la stampa deve avvenire con una stampante di etichette, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la stampa di questi componenti. Inoltre, utilizzando una stampante YDP01IS e YDP04IS, nel menù si può impostare il parametro «Avanzamento carta manuale». Se si utilizza la stampante YDP02IS, ad ogni comando di stampa si ha un avanzamento automatico della pagina (non disattivabile).

Se durante la memorizzazione del componente si genera una stampa automatica, il peso del componente è uguale al valore netto corrente. Per questo motivo viene stampato il componente e non il valore netto.

Impostazione nel menù «Stampa dei componenti» con 3 componenti:

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
Cmp001+ 1.200 kg
Cmp002+ 2.000 kg
-----

```

Stampa del 3° componente con il tasto **[E]**

```

G# + 4.400 kg
T + 0.200 kg
T2 + 4.200 kg
N + 0.000 kg

```

Stampa singola durante la memorizzazione di un componente nella memoria di tara (premere il tasto **[OK]**).

Impostazione di menù «Stampa dei componenti»:  
esempio: stampa del 2° componente

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
Cmp002+ 1.000 kg

```

Stampa singola del componente con il tasto **[E]**, esempio: 2° componente:

```

      INSTAZIONE1
      INSTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
G# + 2.400 kg
T + 0.200 kg
T2 + 2.200 kg
N + 0.000 kg

```

#### Applicazione «Sommatoria»

Il blocco dei dati di inizializzazione è vuoto. Se è stata fatta l'impostazione, viene stampata un'interlinea. I valori rappresentati nel blocco del risultato dipendono dallo stato del programma nel quale l'utente genera la stampa. Ci sono le seguenti possibilità:

- Stampa del risultato (premere il tasto **[CF]**): Stampa della memoria di somma del lordo «\*L», memoria di somma del netto «\*N» e del numero delle transazioni «n».
- Stampa singola e dei componenti automatica (con l'Help di linea **M+**)
- Stampa singola e dei componenti manuale (con il tasto **[E]**). Durante la stampa dei componenti, la testa del protocollo viene stampata solo una volta. I singoli componenti vengono stampati automaticamente uno dopo l'altro. Se la stampa deve avvenire con una stampante di etichette, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la stampa di questi componenti (vedi applicazione «Totale netto»).

Per la stampa manuale (premere il tasto **[E]**), il contatore delle transazioni non viene stampato.

Stampa dei componenti  
Esempio con 3 transazioni:

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
G#    +      1.400 kg
T      +      0.200 kg
N      +      1.200 kg
n              1

G#    +      3.400 kg
T      +      0.200 kg
N      +      3.200 kg
n              2

G#    +      4.400 kg
T      +      0.200 kg
N      +      4.200 kg
n              3

```

Stampa della somma (premere il tasto  
(CF)) per l'esempio precedente:

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
*G          9.200 kg
*N      +    8.600 kg
n              3
-----

```

Stampa singola durante la memorizza-  
zione di una voce nella memoria  
di somma (premere il tasto (OK)).  
Esempio: stampa della 2° transazione

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
G#    +      2.400 kg
T      +      0.200 kg
N      +      2.200 kg
n              2

```

Stampa singola (premere il tasto (F7)),  
esempio: stampa della 2° transazione

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----
G#    +      2.400 kg
T      +      0.200 kg
N      +      2.200 kg

```

#### Protocollo GMP

Il protocollo GMP è composto da  
3 campi (vedi a riguardo la sezione  
«Protocollo GMP»):

- Intestazione GMP
- Stampa del protocollo  
(per es. per l'applicazione «Pesata»)
- Piè di pagina GMP

#### Protocollo «Linearizzazione»

```

-----
14.07.2002      13:00
Typ              CIS3
Ser.no          12345678
Vers.          1.0103.11.2
BVers.          01-26-02
-----

```

#### Linearizzazione

```

Pes.1 +      7.00 kg
Pes.2 +     15.00 kg
Pes.3 +     22.00 kg
Pes.4 +     30.00 kg
Terminato

```

```

-----
14.07.2002      13:02
Nome:
-----

```

#### Protocollo «Regolazione»

```

-----
14.07.2002      13:50
Typ              CIS3
Ser.no          12345678
Vers.          1.0103.11.2
BVers.          01-26-02
-----

```

#### Calibrazione esterna

```

Nom. +      30.00 kg
Diff. -      0.03 kg
Regolazione esterna
Diff. +      0.00 kg

```

```

-----
14.07.2002      13:52
Nome:
-----

```

#### Protocollo «Impostazione del precarico»

```

-----
14.07.2002      13:50
Typ              CIS3
Ser.no          12345678
Vers.          1.0103.11.2
BVers.          01-26-02
-----

```

#### Impostaz. precarico Terminata

```

-----
14.07.2002      13:52
Nome:
-----

```

#### Protocollo «Cancellazione precarico»

```

-----
14.07.2002      13:50
Typ              CIS3
Ser.no          12345678
Vers.          1.0103.11.1
BVers.          01-26-02
-----

```

#### Cancellazione precarico Terminata

```

-----
14.07.2002      13:52
Nome:
-----

```

Protocollo «Pesata» con più  
risultati di misura  
(esempio: 2 risultati di misura):

```

-----
14.07.2002      09:43
Typ              CIS3
Ser.no          12345678
Vers.          1.0103.11.2
BVers.          01-26-02
-----

```

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:43
-----

```

```

G#    +      2.40 kg
T      +      0.20 kg
N      +      2.20 kg
-----

```

```

      INTESTAZIONE1
      INTESTAZIONE2
14.07.2002      09:44
-----

```

```

G#    +      3.40 kg
T      +      0.30 kg
N      +      3.10 kg
-----

```

```

14.07.2002      09:45
Nome:
-----

```



Messaggio di errore

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	*	*	*	*	C	R	L	F	
oppure	S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	*	#	#	#	*	*	*	*	C	R	L	F

\*: Spazio  
 #: Cifra (numero di errore di 2 o 3 posti)

Caratteri per l'identificatore K <sup>1</sup>	Significato
G#	Valore lordo
N	Valore netto
T	Applicazione tara 1
T2	Applicazione tara 2
Diff	Differenza durante la regolazione
Nom	Esatto valore del peso di regolazione
Nom.	Esatto valore del peso di regolazione per l'emissione del protocollo SBI
nRef	Numero dei pezzi di riferimento
pRef	Numero percentuale di riferimento
wRef	Peso del pezzo di riferimento
Qnt	Risultato per l'applicazione «Conteggio» (numero dei pezzi) e «Misurazione neutrale»
mDef	Numero di misura nominale per la pesata di animali
x-Net	Risultato della pesata di animali
Setp	Valore nominale nella pesata di controllo +/-
W.Diff	Scostamento assoluto (per es. in kg) per la pesata di controllo +/-
Lim	Scostamento in % per la pesata di controllo +/-
Max	Limite superiore nella pesata di controllo +/-
Min	Limite inferiore nella pesata di controllo +/-
Stat	Stato
Class	Classificazione
Limx	Limite della classe
D	Numero percentuale (rappresentazione della perdita)
Prc	Numero percentuale (rappresentazione del residuo)
Wxx%	Peso percentuale di riferimento
Cmpxxx	Componente xxx
Cont.T	Contenuto della memoria di tara per il totale netto
Tot.cp	Somma del dosaggio per il totale netto
PT2	Tara preimpostata
n	Contatore di transazioni
*G	Somma dei valori lordi per la sommatoria
*N	Somma dei valori netti per la sommatoria
Nr. serie	Numero di serie della piattaforma di pesata o dell'indicatore

<sup>1)</sup> Dipendente dalla versione, per es. sulle balance omologate non tutte le unità e i codici di identificazione sono disponibili.

Uscita dati in automatico (SBI)

Il risultato di misura può essere stampato automaticamente<sup>1</sup>. Questo può avvenire in base al numero di cicli del lettore<sup>2</sup> e in relazione alla stabilità della bilancia<sup>3</sup>. L'intervallo di lettura dipende dallo stato operativo della bilancia e dal modello di bilancia.

Esempi:			
N	+	153.00 g	Peso netto
Stat			Blanking del lettore
Stat	L		Indicazione di carico insufficiente
Stat	H		Indicazione di sovraccarico

- Impostazione uscita dei dati:
- <sup>1) 3)</sup> «Automatica senza stabilità» oppure «Automatica con stabilità». Impostazione di fabbrica: Stampa manuale dopo la stabilità, cioè stampa automatica disattivata
  - <sup>2)</sup> Stampa automatica in funzione del tempo In funzione del tempo: 1, 2, 10 oppure 100 aggiornamenti del lettore. Impostazione di fabbrica: 1 aggiornamento del lettore

Funzioni della tastiera esterna (tastiera di PC)

Impostazione Setup: Parametri dello strumento: Codice a barre: Tastiera esterna

I «Keycodes» numerici realizzati si riferiscono esclusivamente al layout di una tastiera tedesca. Tasti alfanumerici, in parte utilizzando il tasto [Shift]:  
a - z, A - Z, 0 - 9, spazio, ,,.,\'+<>/“\$@%/();=:\_?\*


Tasti funzione:


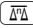
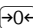
Tastiera di PC	Combiics 3
F1	tasto
F2	tasto
F3	tasto
F4	Help di linea F5 (ultimo a sinistra)
F5	Help di linea F4 (2° da sinistra)
F6	Help di linea F3 (centrale)
F7	Help di linea F2 (2° da destra)
F8	Help di linea F1 (ultimo a destra)
F9	tasto
F10	tasto  – a lungo (funzione Info)
F11	tasto
F12	tasto
Print	tasto
Return	Help di linea F1 (ultimo a destra)
Cursor Up	Help di linea F3 (centrale)
Cursor Left	Help di linea F4 (2° da sinistra)
Cursor Down	Help di linea F2 (2° da destra)
Cursor Right	Help di linea F1 (ultimo a destra)
POS 1	tasto
Backspace	tasto
ESC	tasto

## Formato dei dati in entrata

È possibile trasmettere comandi all'indicatore tramite il computer collegato all'interfaccia per poter attivare le funzioni della bilancia e le funzioni dei programmi applicativi. Tutti i comandi hanno un formato di base comune: iniziano con il carattere ESC (ASCII: 27) e terminano con una sequenza di caratteri CR (ASCII: 13) e LF (ASCII: 10). La loro lunghezza varia da un minimo di 4 caratteri (1 carattere di comando) fino a 7 caratteri (4 caratteri di comando).

I comandi rappresentati nella tabella sottostante devono essere completati dal formato di base ESC ... CR LF. Esempio: si deve inviare il comando di stampa «P» (Print) («invia valore di lettura») all'indicatore. A tal scopo viene inviato la sequenza di caratteri «ESC P CR LF».

Comando	Significato
K	Modo di pesata 1
L	Modo di pesata 2
M	Modo di pesata 3
N	Modo di pesata 4
O	Blocco della tastiera
P	Print (invia il valore di lettura all'interfaccia)
Q	Emissione del segnale acustico
R	Sblocco della tastiera
T	Taratura e azzeramento (funzione combinata della tara)
f3_	Azzeramento (Zero), come comando «kZE_»
f4_	Taratura (senza azzeramento), come comando «kT_»
i_	Informazioni sull'indicatore, Esempio di emissione: «C13/012502/1» Significato: Indicatore: Combics 3, versione del software: 012502, piattaforma di pesata attiva: 1
kF1_	Attivazione dell'Help di linea F1
kF2_	Attivazione dell'Help di linea F2
kF3_	Attivazione dell'Help di linea F3
kF4_	Attivazione dell'Help di linea F4
kF5_	Attivazione dell'Help di linea F5
kP_	Attiva il tasto  Stampare sull'interfaccia per stampante

Comando	Significato
kT_	Attiva il tasto  (taratura)
kNW_	Attiva il tasto  (commutazione della piattaforma di pesata)
kZE_	Attiva il tasto  (azzeramento)
x1_	Emissione del modello della piattaforma di pesata corrente, esempio: «LP6200S-OCE »
x2_	Emissione del numero di serie della piattaforma di pesata corrente, esempio: «0012345678 »
x3_	Emissione della versione del software della piattaforma di pesata corrente, esempio: « 00-20-05 »
x4_	Emissione della versione del software dell'indicatore, esempio: « 01-26-01 »
x9_	Emissione del numero di serie dell'indicatore, esempio: «0012345678 »
x10_	Emissione del modello dell'indicatore, esempio: «CIS3 »
z1_	Immissione: 1° riga d'intestazione del protocollo
z2_	Immissione: 2° riga d'intestazione del protocollo

Il carattere «\_» (Underline) è il carattere ASCII decimale 95. Formato per l'immissione delle righe d'intestazione del protocollo: «ESC z x a ... a \_ CR LF» con x=1 oppure 2 e a ... a: 1 fino a 20 caratteri per la riga di intestazione x seguito da un carattere Underline, CR e LF.

### Sincronizzazione

Nello scambio di dati fra la bilancia e l'indicatore vengono trasmesse, attraverso l'interfaccia, stringhe costituite da caratteri ASCII. Affinché lo scambio dei dati avvenga senza errore, occorre che i parametri dell'interfaccia (velocità, parità, modo di handshake e formato dei caratteri) siano gli stessi su entrambe le unità.

E' possibile variare questi parametri nel Setup (menù) in modo che concordino con quelli dell'indicatore.

Un'interfaccia dati aperta (nessun apparecchio periferico collegato) non genera nessun messaggio di errore.

### Handshake

L'interfaccia della bilancia (SBI = Sartorius Balance Interface) ha una memoria tampone per la trasmissione e la ricezione. Nel Setup dell'indicatore si possono impostare diversi modi di handshake:

Con l'handshake via hardware (CTS/DTR) con interfaccia a 4 fili si può inviare ancora 1 segnale dopo CTS.

L'handshake via software (XON, XOFF) viene comandato da XON e XOFF. All'accensione dello strumento si deve inviare un «XON» onde abilitare lo strumento collegato alla ricezione.

Se nel Setup è impostato l'handshake via software, l'handshake via hardware è attivato ogni volta dopo l'handshake via software.

Sequenza della trasmissione dati:

Bilancia (trasmettitore)	---	byte	---	computer (ricevitore)
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	<---	XOFF	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	...			
		(pausa)		
	...			
	<---	XON	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	
	---	byte	---	

### Dispositivo trasmittente

La ricezione di «XOFF» inibisce ulteriori trasmissioni di caratteri. La ricezione di «XON» riabilita l'unità trasmittente ad inviare altri dati.

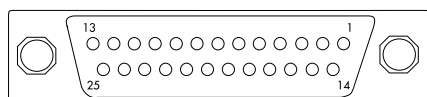
### Dispositivo ricevente

Per non caricare la trasmissione con troppi identificatori di comando, il comando di abilitazione «XON» viene trasmesso dopo che la memoria tampone si è quasi svuotata.

## Schema di assegnazione dei pin

**Modello CISL3 (livello di protezione IP44):**  
Prese di collegamento COM1 e COM2:

Pres a 25 pin D-Submini DB25S con  
raccordo a vite



Vista frontale

Connettore maschio dell'interfaccia  
richiesto (consigliato):  
25 piedini D submini DB 25 S con morsetto  
per il cavo di schermatura, piastrina  
di protezione (Amp tipo 826 985-1C)  
e viti di fissaggio (Amp tipo 164 868-1)


Assegnazione dei pin COM1 (RS232)

Pin 1: schermo  
Pin 2: uscita dati (TxD)  
Pin 3: entrata dati (RxD)  
Pin 4: non collegato  
Pin 5: Clear to Send (CTS)  
Pin 6: collegato internamente  
Pin 7: massa interna (GND)  
Pin 8: massa interna (GND)  
Pin 9: non collegato  
Pin 10: non collegato  
Pin 11: +12V per stampante  
Pin 12: RES\_OUT  
Pin 13: +5V  
Pin 14: massa interna (GND)  
Pin 15: tasto universale  
Pin 16: uscita di controllo «più leggero»  
Pin 17: uscita di controllo «uguale»  
Pin 18: uscita di controllo «più pesante»  
Pin 19: uscita di controllo «set»  
Pin 20: Data Terminal Ready (DTR)  
Pin 21: massa (GND)  
Pin 22: non collegato  
Pin 23: non collegato  
Pin 24: +15...15V  
Pin 25: +5V

Modelli CIS3:

morsetti di collegamento sulla piastra dei circuiti

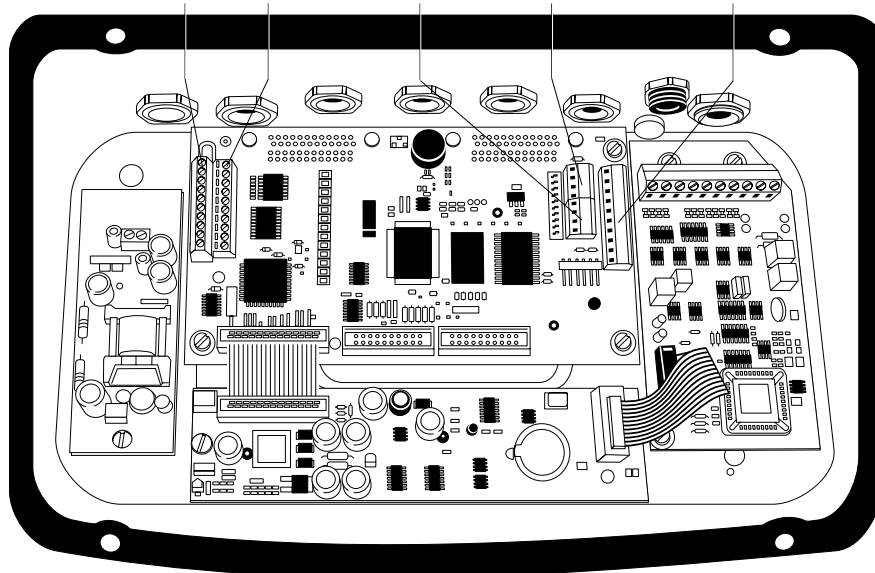COM1 : 11-20 1-10 UniCOM: 1-4 Batterie ricaricabili: 1-4 COM2: 1-10



Assegnazione dei pin COM2: RS232,  
RS422 oppure RS485 (interfaccia opzionale  
UniCOM non installata)  
Opzione A11: RS232 impostata in fabbrica,  
Opzione A12: RS485 impostata in fabbrica  
RS422: vedi pagina seguente «Codificazione  
dei ponticelli»


Pin 1: schermo  
Pin 2: RS232: uscita dati (TxD),  
RS422: uscita dati + (TxD+),  
RS485: dati + (TxD-RxD+)  
Pin 3: RS232: entrata dati (RxD),  
RS422: entrata dati + (RxD+),  
RS485: non collegato  
Pin 4: Masse interno (GND)  
Pin 5: RS232: Clear to Send (CTS),  
RS422: entrata dati - (RxD-),  
RS485: non collegato  
Pin 6: non collegato  
Pin 7: massa interna (GND)  
Pin 8: non collegato  
Pin 9: non collegato  
Pin 10: non collegato  
Pin 11: +12V per stampante  
Pin 12: RES\_OUT  
Pin 13: +5V commutatore  
Pin 14: massa interna (GND)  
Pin 15: Keyboard Data  
Pin 16: non collegato  
Pin 17: non collegato  
Pin 18: non collegato  
Pin 19: Keyboard Clock  
Pin 20: RS232: Data Terminal Ready (DTR),  
RS422: uscita dati - (TxD-),  
RS485: dati - (TxD-RxD-)  
Pin 21: LINE\_GND  
Pin 22: LOW\_BATT <sup>1)</sup>  
Pin 23: BATT\_ON\_OFF <sup>2)</sup>  
Pin 24: LINE\_1\_B  
Pin 25: +5V

**Modello CIS3**

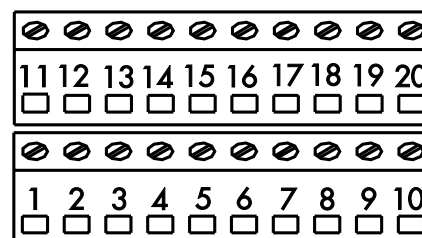**(livello di protezione IP67):**

Collegamento delle estremità libere del  
cavo per mezzo dei morsetti a vite presenti  
nello strumento

Attacco per l'interfaccia COM 1 (LV1):




Vista dall'alto

Assegnazione dei morsetti LV1

N° 1: tasto universale  
N° 2: uscita di controllo «più leggero»  
N° 3: uscita di controllo «uguale»  
N° 4: uscita di controllo «più pesante»  
N° 5: uscita di controllo «set»  
N° 6: Clear to Send (CTS)  
N° 7: uscita dati (TxD)  
N° 8: entrata dati (RxD)  
N° 9: Data Terminal Ready (DTR)  
N° 10: massa interna (GND)  
N° 11: Line\_A  
N° 12: Line\_A  
N° 13: GND  
N° 14: GND  
N° 15: +12 V per stampante  
N° 16: uscita Reset  
N° 17: +5 V  
N° 18: +5 V  
N° 19: massa (GND)  
N° 20: massa (GND)

<sup>1)</sup> Segnale dall'unità di batterie ricaricabili:  
batterie scariche
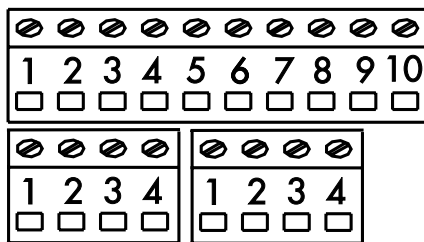
<sup>2)</sup> Spegnimento dell'unità delle batterie quando  
si spegne la bilancia



## Attacchi CIS3

Figura a sinistra: vista dall'alto

Assegnazione dei 10 morsetti «COM2» (LV2):

	RS232	RS422	RS485
N° 1:	non collegato	non collegato	non collegato
N° 2:	GND	GND	GND
N° 3:	GND	GND	GND
N° 4:	+5V commutatore	+5V commutatore	+5V commutatore
N° 5:	Data Terminal Ready (DTR)	uscita dati - (TxD-)	dati - (TxD-RxD-)
N° 6:	Keyboard Clock	Keyboard Clock	Keyboard Clock
N° 7:	Keyboard Data	Keyboard Data	Keyboard Data
N° 8:	Clear to Send (CTS)	entrata dati - (RxD-)	non collegato
N° 9:	entrata dati (RxD)	entrata dati + (RxD+)	non collegato
N° 10:	uscita dati (TxD)	uscita dati + (TxD+)	Daten + (TxD-RxD+)

Assegnazione dei 4 morsetti a sinistra «batterie ricaricabili» (LV3)

N° 1:	GND_LINE
N° 2:	LINE_B
N° 3:	LOW_BATT
N° 4:	BATT_ON_OFF

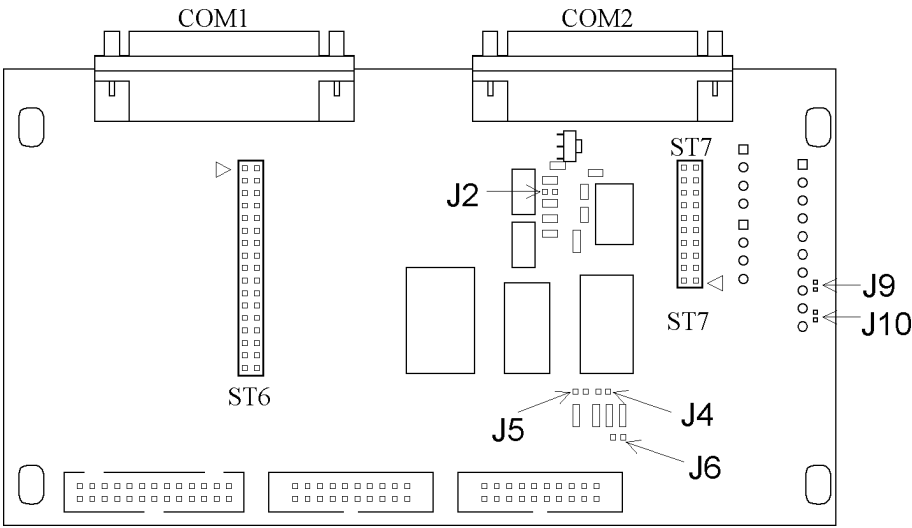
Assegnazione dei 4 morsetti a destra «UniCOM» (LV4)

	RS232	RS422	RS485
N° 1:	Clear to Send (CTS)	entrata dati - (RxD-)	non collegato
N° 2:	entrata dati (RxD)	entrata dati + (RxD+)	non collegato
N° 3:	uscita dati (TxD)	uscita dati + (TxD+)	dati + (TxD-RxD+)
N° 4:	Data Terminal Ready (DTR)	uscita dati - (TxD-)	dati - (TxD-RxD-)

Profibus


N° 1:	non collegato
N° 2:	non collegato
N° 3:	non collegato
N° 4:	non collegato

Configurazione del modo operativo delle interfacce per COM2



Codificazione per COM2 sul modello CISL3

	RS232	RS422	RS485
Ponticello J2:	aperto	chiuso	chiuso
Ponticello J9:	aperto	aperto	chiuso
Ponticello J10:	aperto	aperto	chiuso

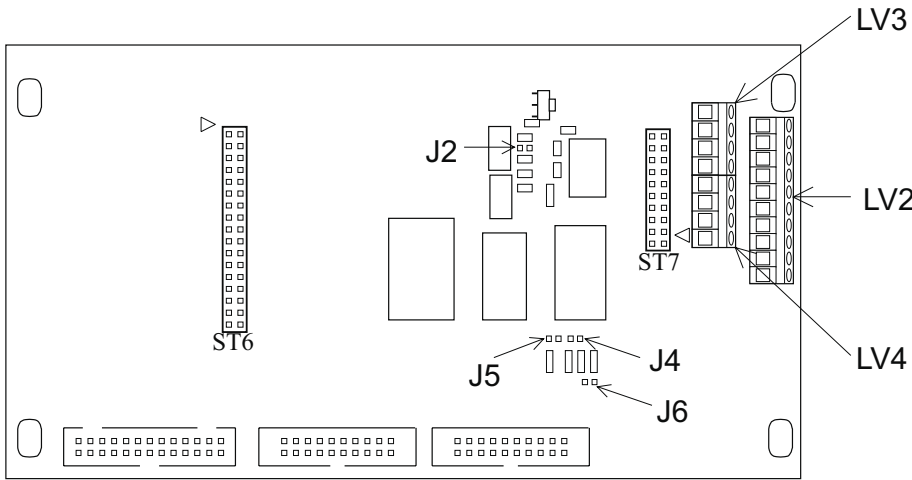

Codificazione per COM2 sul modello CIS3

	RS232	RS422	RS485
Ponticello J2:	aperto	chiuso	chiuso
Morsetto 5 e 8 dei dieci morsetti «COM2»:	aperto	aperto	chiuso
Morsetto 9 e 10 dei dieci morsetti «COM2»:	aperto	aperto	chiuso

Resistenze terminali 120 Ohm per RS422 e RS485

	RS422	RS485
Ponticello J4:	chiuso	chiuso

Resistenze BIAS (solo per RS485)


	RS485
Ponticello J5:	chiuso
Ponticello J6:	chiuso



### Montaggio del cavo sulle interfacce

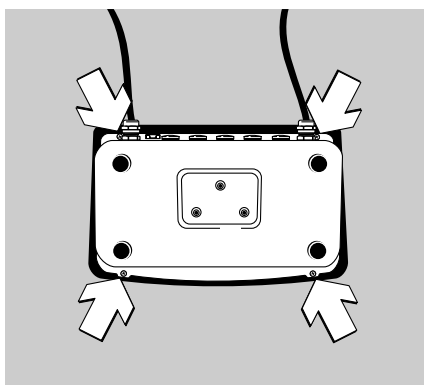
La connessione del cavo di collegamento dovrebbe essere eseguita solo da tecnici specializzati del Servizio Sartorius.

- Utilizzare il cavo corrispondente con il pressacavo (accessori)
- △ Staccare lo strumento dalla rete elettrica prima di iniziare il montaggio.
- △ I lavori che possono influenzare il livello di protezione IP67 devono essere eseguiti con estrema cura.
- △ Un'installazione non corretta comporta la perdita dei diritti di garanzia.
- △ Non eseguire lavori di riparazione o manutenzione sullo strumento quando è ancora sotto tensione.
- △ Il passaggio del cavo (livello di protezione IP67) per il collegamento della piattaforma di pesata con l'indicatore è già preinstallato sull'indicatore; gli altri passaggi per cavo sono chiusi con tappi ciechi. Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta cura.




- Svitare le 4 viti per togliere il pannello frontale.

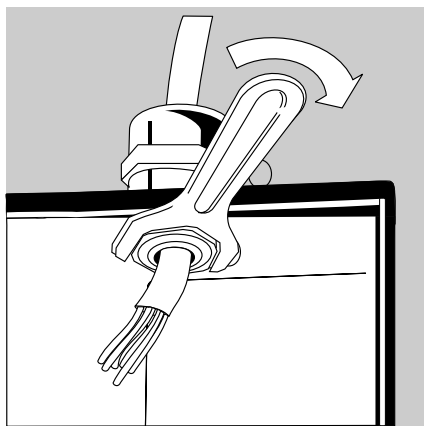
- Collegare il cavo di collegamento della periferica all'indicatore per mezzo del pressacavo.
- △ Il cavo di collegamento è già pronto per il montaggio nell'indicatore Combics. Il pressacavo è già inserito sul cavo e premontato.
- △ Il pressacavo è già preinstallato. Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta cura. Usare una chiave torsiometrica. Il momento torcente di questo pressavo è: 5 Nm.




- Montaggio del cavo di collegamento
  - Togliere il tappo cieco del foro apposito dell'indicatore. Se un cavo occupa già gli attacchi di COM1 (morsetto a vite LV1) e della 2° interfaccia COM2 (morsetti a vite LV2 e LV3), utilizzare i fori al centro dell'alloggiamento.
  - Far passare il cavo con il pressacavo già inserito attraverso il foro.
  - Montare il pressacavo a regola d'arte.
  - Controllare che tra i morsetti e la schermatura ci sia contatto. Il collegamento di massa avviene tramite la schermatura!

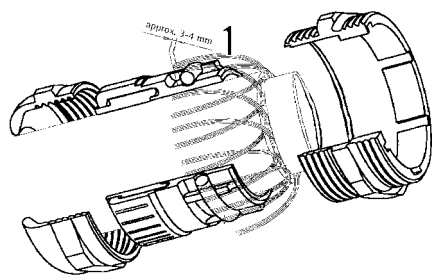

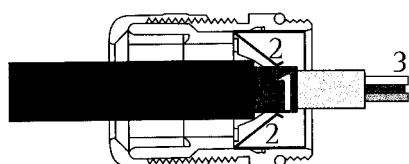- Togliere l'isolamento dall'estremità del cavo e montarlo:
  - Inserire il cavo attraverso il pressacavo.
  - Montare il pressacavo in modo corretto.
  - Togliere l'isolamento protettivo dall'estremità del cavo. La schermatura (1) deve avere contatto con i morsetti (2).



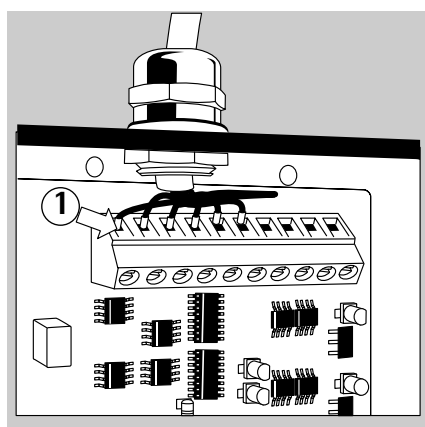- Per l'installazione i fili (3) del cavo devono avere una lunghezza di circa 15 cm.
- Inserire il cavo attraverso il pressacavo.
- Controllare che ci sia contatto tra i morsetti e la schermatura perché il cavo è messo a terra tramite la schermatura!



- Montare il cavo di collegamento:
  - Togliere l'isolamento del cavo e lasciare i fili lunghi circa 5 cm per l'installazione.
  - Togliere l'isolamento dei fili per 1 cm circa e applicare le boccole.
  - Avvitare saldamente i fili ai morsetti secondo lo schema di assegnazione dei morsetti.
- Al termini dei lavori di montaggio, controllare il livello di protezione IP67 utilizzando un manometro della pressione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sartorius.

### Schema di collegamento (cavo di collegamento al PC)

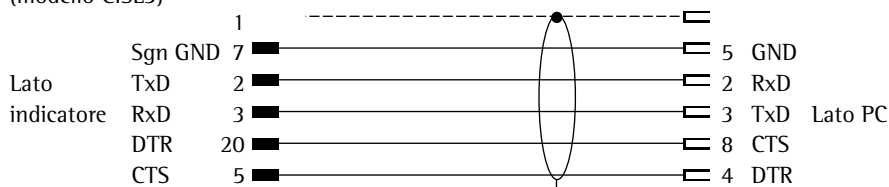
(Modello CISL3: cavo di collegamento 7357312, modello CIS3: cavo di collegamento YCC02-D9F6) per il collegamento di un PC all'indicatore secondo lo standard RS232-C/V24 per le linee di trasmissione fino a 15 m di lunghezza.

#### Schemi del cavo

Assegnazione degli attacchi per il cavo dall'indicatore ad una interfaccia di PC RS232.


Connettore maschio a 25 pin D-Sub  
(modello CISL3)

Pres a 25 pin DSub




Estremità del cavo libera  
(modello CIS3)

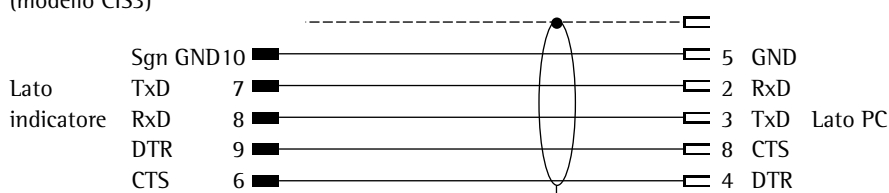Pres a 25 pin DSub



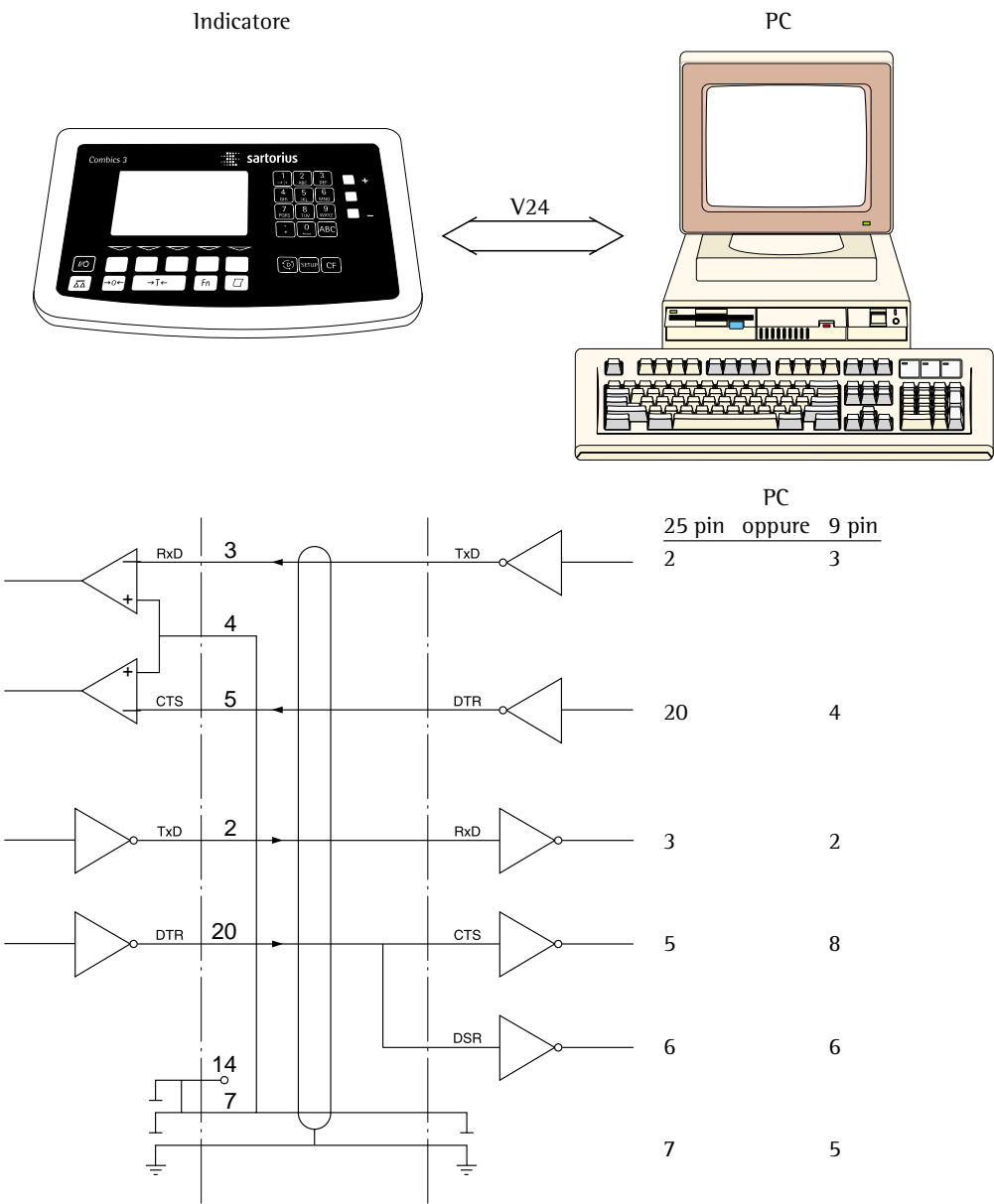Schema di collegamento (cavo di collegamento al PC)



Cavo tipo AWG 24

# Service

## Attivazione del modo di Service

### Scopo

Il modo di Service permette l'accesso ad un menù ampliato del Setup. È la condizione per poter eseguire le importantissime operazioni di calibrazione e regolazione

sull'indicatore e sulla(e) piattaforma(e) di pesata. Il modo di Service attivato è contrassegnato dalla lettera «S» che si trova nell'angolo superiore destro del display. Questo viene disattivato quando l'indicatore viene riavviato.

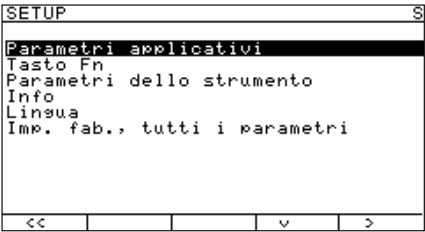
## Configurazione del modo di Service



Una volta accesa, la bilancia si trova in un programma applicativo (qui «Conteggio»).


Immettere la password di service (vedi allegato) e premere il tasto **SETUP**.

Nota:  
Nella figura a sinistra il numero visualizzato non è la password di servizio.




Lo strumento si trova nel modo di Service. Nella riga di intestazione del menù di Setup appare a destra la lettera **S**. Rispetto al menù dell'utente, il menù del Setup contiene voci di menù aggiuntive, per esempio **Imb. fab., tutti i parametri**.

## 2 volte l'Help di linea ↵

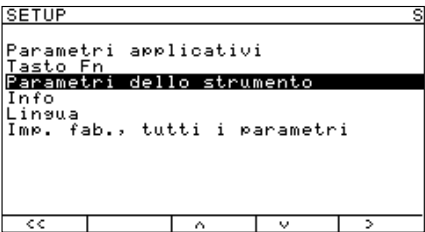

Per visualizzare o modificare i parametri dello strumento nel modo di Setup:  
Selezionare **Parametri dello strumento**.

## Help di linea ➤

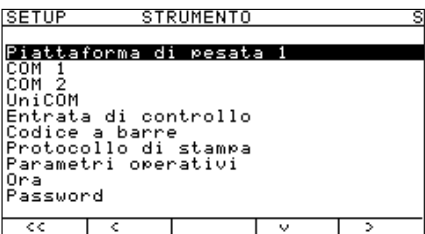

Aprire il menù. Viene aperto il sottomenù **Strumento**.

Selezionare ed aprire la voce di menù desiderata. Ripetere l'operazione tante volte fino ad aprire la voce di menù desiderata nel livello più basso del menù. Leggere e se necessario modificare la voce di menù (confermare con l'Help di linea **↵**) e ritornare al menù principale premendo l'Help di linea **↵**.

### Uscire dal modo di Service

Spegnere e riaccendere Combics 3. Lo strumento si trova nel modo applicativo normale. Se si esce dal menù di Setup senza effettuare delle modifiche delle impostazioni premendo il tasto **SETUP** oppure l'Help di linea **↵**, il modo di Service rimane attivo. Premendo di nuovo il tasto **SETUP** viene riaperto il menù di Setup.



### Funzioni supplementari

Quando il modo di Service è attivato, i tecnici del servizio hanno a disposizione un numero maggiore di voci di menù che non sono visibili quando il modo di Service è disattivato:

Nel menù principale:

- **Imp. fab., tutti i parametri**

Nel menù **Parametri dello strumento**:

- **Manutenzione** (data di servizio)
- **Numero memoria** (codice di transazione per un'eventuale memoria Alibi)
- **Dati terminale** (numero di serie e nome del modello dell'indicatore)

Il menù dei parametri dello strumento per il collegamento **PP1**

**Interno** contiene il sottomenù:

- **Configurazione convertitore A/D.**

Il menù **Calibrazione/ regolazione** del menù dei parametri dello strumento per il collegamento **PP1 Interno** contiene i seguenti sottomenù:

- **Regolazione senza pesi**
- **Dati geografici.**

I sottomenù del menù di calibrazione/ regolazione **Funzione tasto CAL** e **Peso utente** sono ampliati.

Se una delle interfacce è stata configurata per il collegamento di una 2° piattaforma di pesata, anche per la piattaforma di pesata configurata sotto PP2 valgono le espansioni del menù di calibrazione/ regolazione sopra nominate. Collegando una piattaforma di pesata adatta anche il menù «Configurazione convertitore A/D» è accessibile per PP2.

Se la cella di carico in questione non trasmette determinati parametri oppure questi parametri non possono essere modificati, non vengono visualizzate le voci di menù corrispondenti. Perciò nel menù di calibrazione/regolazione per esempio, non viene visualizzata la voce **Attivazione risoluzione esterna** se la cella di carico è stata configurata per l'impiego in metrologia legale, cioè possiede un gruppo di dati di configurazione per la metrologia legale.

Il diagramma dei menù del Setup nel modo di Service è rappresentato nelle pagine 64-65.

### Nota

Per l'esecuzione della configurazione del convertitore A/D e per immettere o modificare i parametri nel menù di calibrazione/regolazione, posizionare il commutatore di accesso al menù nella posizione di «sbloccato» spingendo il commutatore verso destra (nella direzione degli attacchi d'interfaccia). Vedi a riguardo anche le sezioni «Configurazione del convertitore A/D» e «Calibrazione, regolazione e linearizzazione» in questo capitolo, così come la sezione «Calibrazione, regolazione» nel capitolo «Modo operativo».

## Configurazione del convertitore analogico/digitale

L'adattamento dello strumento all'impiego con tutte le celle di carico (con sistema a dilatometro a lamella) disponibili in commercio e le piattaforme analogiche Sartorius CAPP, CAPS, IU, IF, avviene mediante la selezione ed immissione di parametri nel modo di Service.

Sbloccare il commutatore di accesso al menù (posizione a destra) per configurare i seguenti campi:

- Commutazione tra la configurazione standard e la configurazione per l'impiego in metrologia legale
- Divisione di verifica e
- Divisione di lettura d
- Portata minima
- Portata massima
- Portata massima per il campo corrispondente
- Divisione di verifica e per il campo corrispondente
- Unità di peso selezionabili liberamente
- Unità di peso per regolazione/calibrazione

L'attivazione dell'impostazione di fabbrica **Imp. fab., tutti i parametri** non riguarda questi parametri.

Per l'impostazione di tutti gli altri parametri mediante la selezione «Configurazione standard» oppure «Configurazione per la metrologia legale» per la configurazione del convertitore analogico/digitale, valgono le stesse limitazioni come per le bilance non configurabili Sartorius.

Il richiamo del menù **Configurazione convertitore A/D** avviene mediante il menù **Parametri dello strumento** (piattaforma di pesata 1: **PP 1**, piattaforma di pesata 2: **COM 1** oppure **COM 2**). Una rappresentazione si trova a partire da pagina 20. Per il richiamo del menù di Setup vedi anche il capitolo «Impostazioni», pagina 14. La configurazione del convertitore A/D è possibile solo nel modo di Service e con il commutatore di accesso al menù sbloccato.

Salvare le impostazioni con la voce di menù **Memoriz. dati di configurazione**.

Ritornando al livello di menù superiore del Setup con l'Help di linea  $\leftarrow$ , all'utente viene chiesto se i dati di configurazione debbano essere memorizzati. Se la risposta è «Sì» premere l'Help di linea  $\rightarrow$ , se la risposta è «No», premere l'Help di linea  $\leftarrow$ . Premendo l'Help di linea  $\leftarrow\leftarrow$  si esce dal menù di Setup nel modo di Servizio senza salvataggio dei dati di configurazione.

Al termine della configurazione del convertitore A/D chiudere il commutatore di accesso al menù (17) spingendolo a sinistra e spegnere e riaccendere lo strumento con il tasto.

Dopo non sarà più possibile influenzare i risultati di pesata mediante l'indicatore. Selezionare l'unità di peso per la configurazione delle portate massime dei campi di pesata relativi nel menù dei parametri applicativi della piattaforma di pesata corrispondente sotto **Unità di peso 1**. Determinare l'unità di pesata in modo che la configurazione avvenga senza decimali, in quanto quest'ultimi vengono tagliati mediante arrotondamento nella piattaforma di pesata. Determinare le portate massime di tutti i campi di pesata in modo che questi siano rappresentabili per tutte le unità attivate, con un massimo di quattro cifre diverse da «0».

Se l'unità di peso necessaria per la configurazione non è ancora attivata, procedere alla sua attivazione per mezzo della voce di menù **Unità selezionabili** (voce del sottomenù «Configurazione del convertitore A/D»). Nei menù «Unità di peso x» (x = 1, 2) sono elencate soltanto quelle unità di peso che sono state attivate. L'unità di peso selezionata per la configurazione non può essere bloccata.

### Impiego dello strumento in metrologia legale

I dati metrologici della piattaforma attivata appaiono nelle righe metrologiche, riga 1 e riga 2, sul display (vedi a riguardo anche il capitolo «Sistema di funzionamento», sezione «Visualizzazione/display»). Nel menù **Unità di peso 1** si può controllare che solo le unità di peso ammesse siano selezionabili.

### Descrizione delle singole voci di menù

#### Standard/Legale

Prima di iniziare la configurazione del convertitore A/D, selezionare se la piattaforma di pesata debba essere impiegata nel funzionamento standard o in metrologia legale:

Se la configurazione desiderata non è ancora impostata, selezionarla con l'Help di linea  $\rightarrow$  oppure  $\swarrow$ . Confermare la selezione con l'Help di linea  $\rightarrow$  e aprire il menù di configurazione del convertitore A/D.

#### Classe di precisione

Se è attivata la «Configurazione standard», questa voce di menù è soppressa.

Se è attivata la «Configurazione legale», si può selezionare solo classe di precisione  $\text{III}/\text{III}$ .

Richiamare la voce di menù

**Classe di precisione e**  
selezionare **Classe III/III**  
e confermare la selezione con l'Help di linea  $\downarrow$ .

#### Campi

Il campo di pesata della piattaforma di pesata può essere diviso in uno o più campi:

- **Bilancia a campo unico**  
Il campo di pesata totale viene suddiviso in valori di divisione relativi alla divisione più piccola d e al peso massimo.
- **Bilancia a divisioni plurime**  
Divisione del campo in un massimo di 4 campi ognuno con una precisione di lettura differente. Il cambio avviene ogni volta automaticamente al raggiungimento del limite di campo predefinito. Dopo la taratura, è disponibile la risoluzione più alta possibile anche se la piattaforma di pesata è carica. Nella configurazione per la metrologia legale, questa funzione è permessa solo nelle classi di precisione  $\text{III}$  e  $\text{III}$ .
- **Bilancia a campi plurimi**  
Bilancia con due o tre campi di pesata. Superando il limite di campo del campo di pesata inferiore, la bilancia si commuta nel campo di pesata immediatamente superiore (risoluzione più bassa) e rimane in questo. Per ritornare al campo di pesata più basso (risoluzione più alta) bisogna scaricare completamente la bilancia premendo il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .

Selezionare la configurazione desiderata con l'Help di linea  $\rightarrow$  oppure  $\swarrow$ . Confermare la selezione con l'Help di linea  $\rightarrow$  e aprire le voci di menù subordinate per fissare il valore di divisione d e la divisione di verifica e, la portata minima (solo per la configurazione legale), i limiti di campo (solo per le bilance a divisioni plurime o a campi plurimi) e la portata massima. Confermare con l'Help di linea  $\downarrow$  oppure annullare la modifica con l'Help di linea **Esc**.

#### Divisione di lettura d

La divisione di lettura d indica la risoluzione della bilancia. L'immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.

#### Divisione di verifica e

La divisione di verifica e indica la risoluzione della bilancia impiegata in metrologia legale. L'immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.. Per le bilance della classe  $\text{III}$  o  $\text{III}$  vale e = d. Quindi scegliendo la «Configurazione legale» non viene richiesta la divisione di lettura d.

#### Portata minima Min.

La portata minima per le bilance della classe è di 20 e mentre per la classe  $\text{III}$  è  $\text{III}$  di 10 e. Al di sotto di questo carico un'addizione delle tolleranze può portare a degli errori di misurazione.




#### Campo 1, campo 2, campo 3

Per ogni singolo campo vengono introdotti i limiti corrispondenti. Il superamento di questi limiti provoca il cambio di precisione. Durante l'immissione vale quanto segue:  
Campo 1  $\leq$  Campo 2  $\leq$  Campo 3  $\leq$  Portata massima  
In questo modo il campo di pesata può essere suddiviso fino ad un numero di 4 campi. La risoluzione cambia in intervalli di 1, 2, 5, 10, 20, ecc. La risoluzione minore corrisponde alla divisione di lettura d inferiore che è stata introdotta. Azzerare i campi che non sono impiegati.

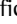



### Portata massima Max.

La portata massima è il carico massimo che può essere posto sulla bilancia. Se il peso supera la portata massima, sul display si visualizza la lettera H. Le divisioni della bilancia si calcolano dalla portata massima e dalla divisione di lettura inferiore d. Nell'impiego legale, il valore delle divisioni non deve essere superiore a 3000 e (oppure a 3000 e per ogni campo sulle bilance a divisioni plurime). Nel funzionamento standard, si può definire una bilancia «SuperRange» aumentando le divisioni ammesse: per es. portata massima = 30.000 kg, divisione di lettura inferiore d = 0.001 kg, risultano 30000 divisioni. Tuttavia si dovranno prendere in considerazione le eventuali restrizioni fisiche che potrebbero manifestarsi.




### Unità selezionabili

Con questa funzione si possono bloccare le unità di peso che non devono essere selezionabili nel modo operativo («Unità di peso x», x = 1, 2). Solo le unità contrassegnate con il simbolo (\*) a destra sono attivate (possibile la selezione multipla). La disattivazione e attivazione dell'unità selezionata con l'Help di linea  oppure  avviene con l'Help di linea .

### Unità di calibrazione/regolazione

Con questa voce di menù viene fissata l'unità di peso con la quale si deve eseguire la calibrazione. Ciò vale anche se per il modo operativo è stata scelta un'altra unità. L'unità selezionata è indicata dal simbolo «». La modifica avviene selezionando l'unità con l'Help di linea  oppure  e confermando con l'Help di linea .

### Memorizzazione dei dati di configurazione

Selezionare il parametro «Si» con l'Help di linea  e memorizzare la configurazione del convertitore A/D premendo l'Help di linea . Lo strumento esegue un reset del software e passa al modo di pesata normale. Se la configurazione del convertitore A/D non deve essere memorizzata, uscire dalla voce di menù con l'Help di linea .

Dopo aver eseguito e memorizzato la configurazione del convertitore A/D, il convertitore A/D in collegamento con la cella di carico può essere definito come bilancia e può essere trattato come una piattaforma di pesata standard. Inoltre si deve fissare l'unità di peso per la piattaforma di pesata ed eseguire le operazioni di calibrazione, regolazione e linearizzazione. La descrizione dettagliata di queste funzioni si trova nella sezione «Regolazione nel modo di Service», pagina 81.

### Menù «Regolazione senza pesi»

Sottomenù di **Calibrazione/regolazione**. Aprendo il sottomenù **Immissione dei parametri** si possono immettere i parametri «Carico nominale» (specificazione della barra di pesata del sistema a dilatometro a lamella), «Risoluzione» in kg e «Sensibilità» in mV/V (**Sensibilità 1**). Essi vengono convertiti in grandezze interne. Dopo la memorizzazione dei dati di configurazione del convertitore A/D per mezzo del sotto menù **Memorizzazione dei parametri**, i parametri non possono più essere selezionati. Per le piattaforme con più di una cella di carico, le sensibilità delle altre celle vengono registrate

- sotto **Sensibilità 2** fino a **Sensibilità 4** (cella 4) oppure
- come **Valore medio** su tutte le celle sotto **Sensibilità 1**, in questo caso le altre sensibilità **Sensibilità 2** fino a **Sensibilità 4** devono essere azzerate. Memorizzare i parametri immessi con **Memorizzazione dei parametri**.

### Menù «Dati geografici»

Sottomenù di **Calibrazione/regolazione**. Vedi sezione speciale a partire da pagina 75 e seguenti.

#### **Nota**

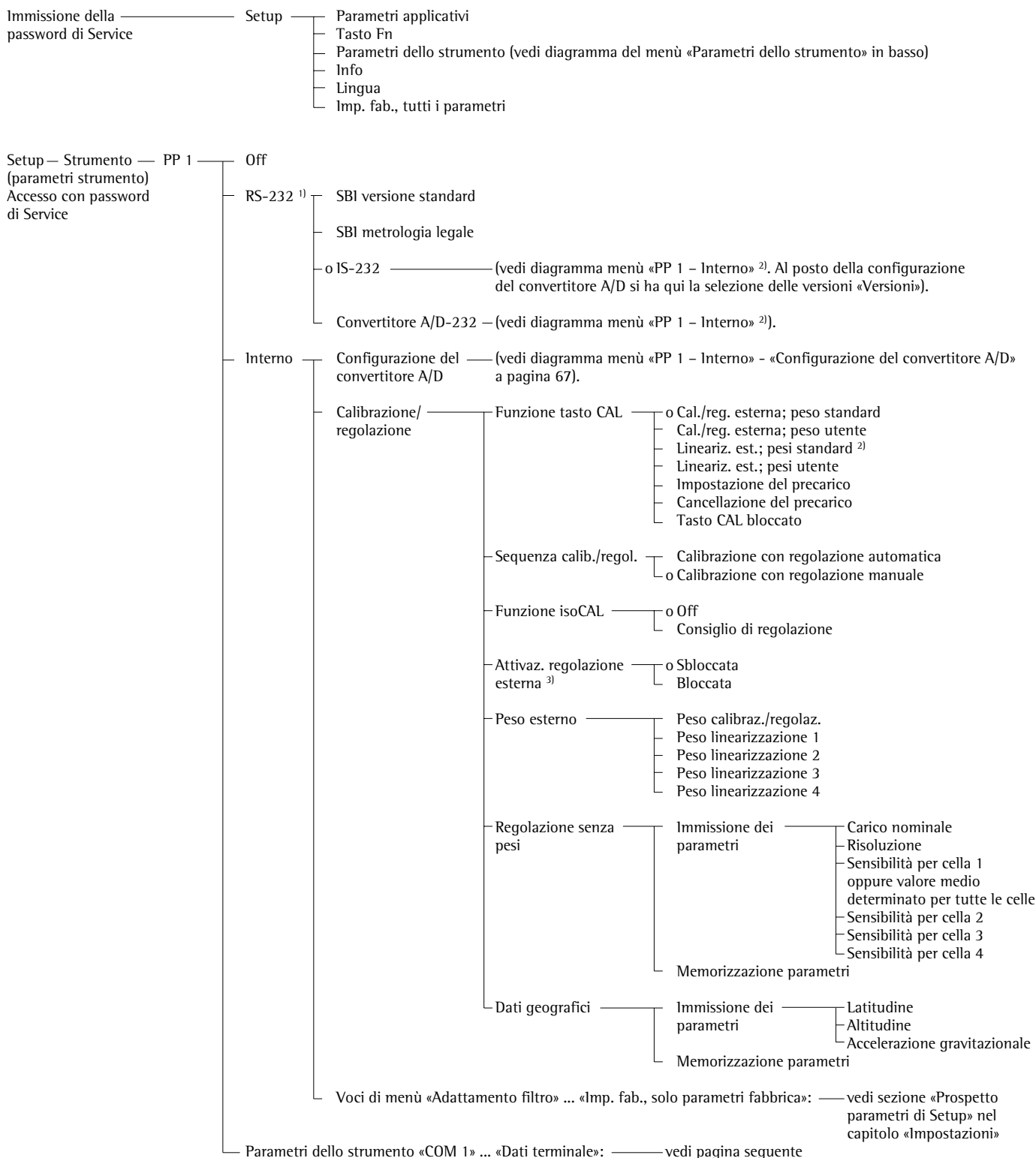
Dopo la configurazione del convertitore A/D e terminate le operazioni di calibrazione, regolazione e linearizzazione, spingere il commutatore di accesso al menù (17) nella posizione di «bloccato».

Dopo il blocco della configurazione del convertitore A/D, non è più possibile influenzare i risultati di pesata mediante l'indicatore. Il numero delle funzioni possibili della bilancia è fissato nel convertitore A/D. Le funzioni della bilancia che possono essere richiamate, sono per es.:

- lettura dei valori di peso
- taratura
- regolazione
- lettura del valore di tara
- memorizzazione/cancellazione del valore di tara introdotto

# Diagramma del menù di Setup nel modo di Service

o = impostazione di fabbrica  
x = impostazione dell'utente




<sup>1)</sup> La funzionalità sarà messa a disposizione successivamente

<sup>2)</sup> Le voci di menù impostabili dipendono dal software e dalla funzionalità della piattaforma di pesata collegata
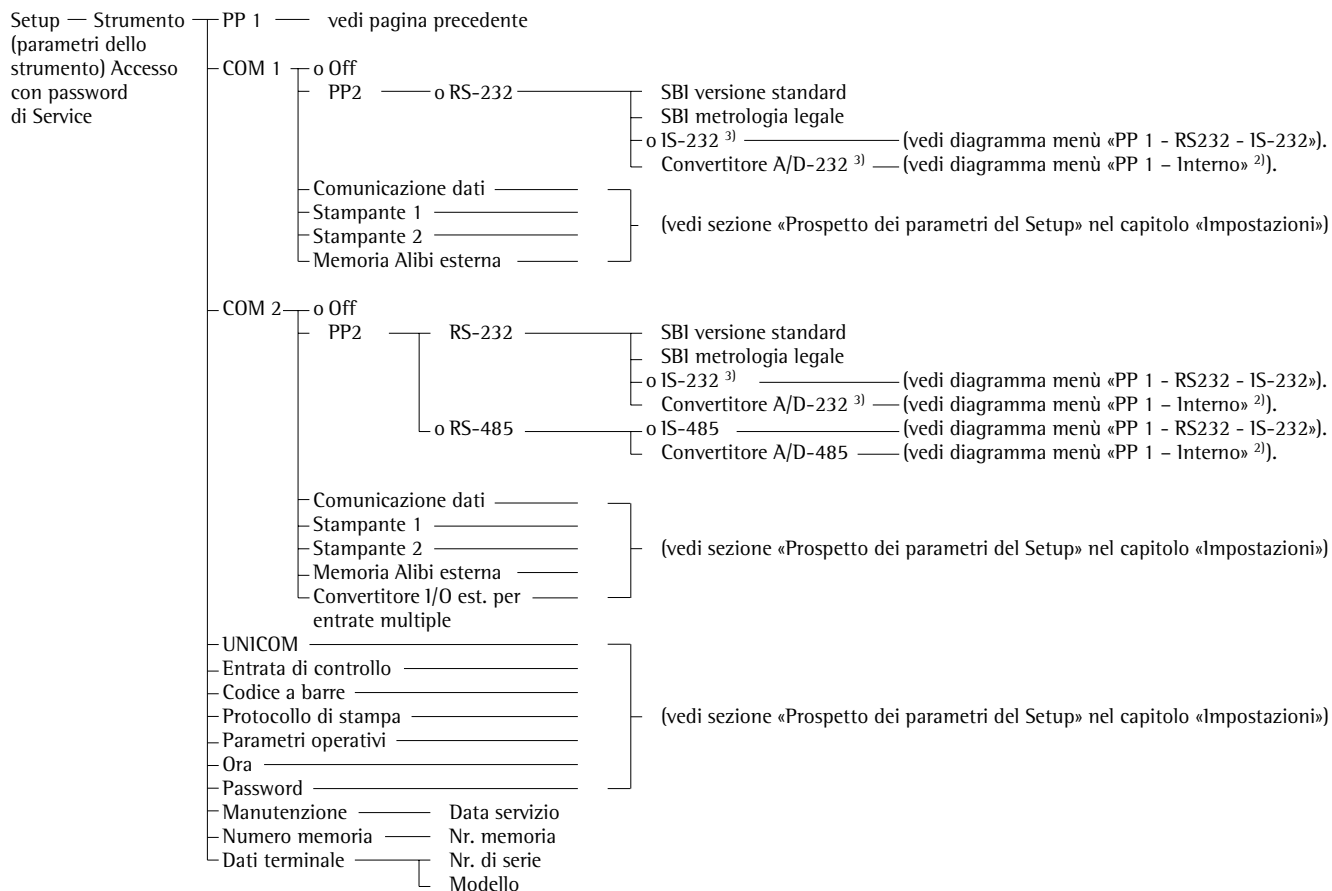
<sup>3)</sup> Voce di menù manca sugli strumenti omologati





<sup>1)</sup> La funzionalità sarà messa a disposizione successivamente


<sup>2)</sup> Le voci di menù impostabili dipendono dal software e dalla funzionalità della piattaforma di pesata collegata

<sup>3)</sup> Voce di menù manca sugli strumenti omologati

## Menù di Setup, configurazione del convertitore A/D

Accesso al Setup  
nel modo di Service

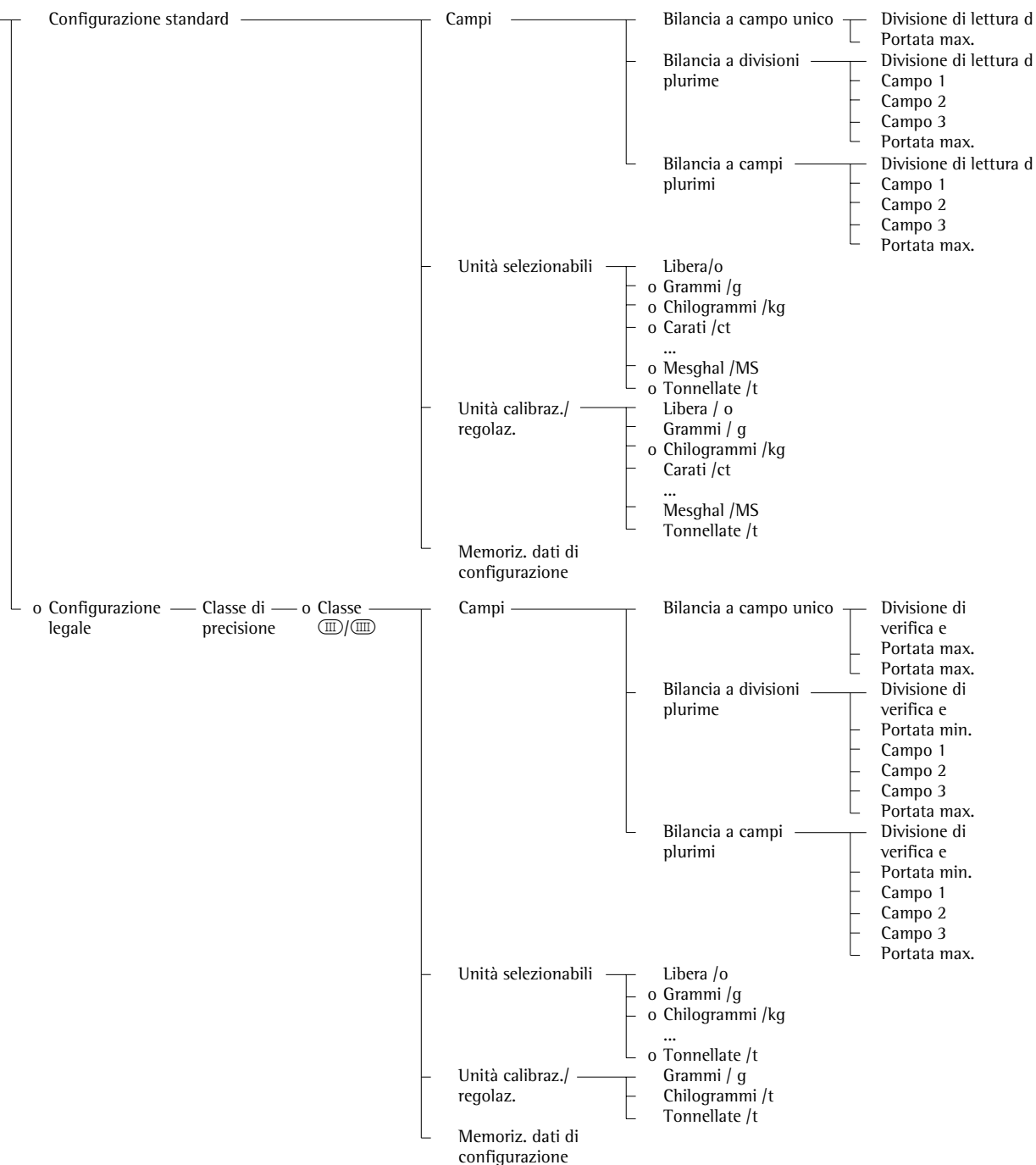PP 1 - Interno -  
Configurazione del  
convertitore A/D



## Configurazione del convertitore A/D (esempi)

Esempio 1: configurazione del convertitore A/D con piattaforma di pesata collegata

### Preparazione

(Configurazione con celle di carico: vedi pagina 71)

- Togliere il cappuccio di copertura, a sinistra dell'alloggiamento
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso destra
- Impostare il modo di Service, e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento**

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		
Protocollo di stampa		
Parametri operativi		
Ora		
Password		
<<	<	>

Selezionare **Piattaforma di pesata 1**.

Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (simbolo **O**) selezionare questo parametro con l'Help di linea **▲** oppure **▼** e confermare la selezione con l'Help di linea **➤**. Appare brevemente il messaggio **Funzione attivata**, poi viene aperto il menù **PP 1 INTERNO**.

Help di linea **➤** event.

Help di linea **▲** | **▼**, Help di linea **➤**

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/risoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			
Ritardo di stabilità			
Autoazzeramento			
Unità di peso 1			
Precisione di lettura 1			
Campo di zero			
<<	<	>	

Help di linea **➤**

PP 1	INTERNO	CONF.C.A/D	S
Standard			
O Legale			

Richiamare il menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Selezionare con l'Help di linea **▲** oppure **▼** i dati della configurazione:

**Standard** oppure **Legale** (impiego della piattaforma di pesata in metrologia legale). La configurazione **Legale** è preimpostata in fabbrica (simbolo **O**).

Help di linea **➤**

INTERNO	CONF.C.A/D	LEGALE	S
Classe di precisione			
Campi			
Unità selezionabili			
Unità calibraz./resolaz.			
Memoriz. dati di configurazione			

Aprire il menù per registrare i parametri per la configurazione del convertitore A/D.

Nell'esempio mostrato è stato aperto il menù per la configurazione del convertitore A/D di una piattaforma di pesata per l'impiego in metrologia legale.

Se invece si seleziona la **Configurazione standard**, non viene visualizzata la voce **Classe di precisione**.

Help di linea **➤**


Aprire la prima voce di menù. Per la «Configurazione standard»: la voce di menù **Campi**; per la «Configurazione legale»: la voce di menù **Classe di precisione**.

Con la «Configurazione legale» aprire sempre per prima la voce di menù **Classe di precisione**!


Impostare la classe di precisione **III/III**. Il simbolo «**O**» indica l'impostazione selezionata.


Uscire dalla voce di menù con l'Help di linea **◀**.

## Event. Help di linea | Help di linea

CONF.C.A/D	LEGALE	CAMPI	S
	Bilancia a campo unico		
	Bilancia a divisioni plurime		
	Bilancia a campi plurimi		



Aprire la voce di menù **Campi**.

Nell'esempio mostrato è impostato **Bilancia a campo unico** (con il simbolo «»).

Per modificare la configurazione del campo di pesata, spostare la barra di selezione e aprire il menù selezionato. La configurazione è ora attivata. Ritornando nel livello di menù superiore, la nuova configurazione è indicata dal simbolo «».

Informazioni più precise relative alla configurazione si trovano nella sezione «Descrizione delle singole voci di menù» all'inizio del capitolo.

## Help di linea



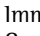
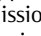
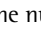
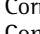
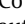
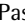
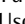
LEGALE	CAMPI	CAMP.UNICO	S
E:			0.001 kg
Portata min.:			0.010 kg
Portata max.:			6.000 kg






Aprire il menù per l'impostazione del campo di pesata. I parametri sono:



- divisione di verifica e oppure divisione di lettura d
- portata minima (per la configurazione legale)
- limiti di campo (per bilance a divisioni plurime, bilance a campi plurimi)
- portata massima


I valori visualizzati dipendono dal gruppo di dati caricato e quindi, se necessario, devono essere cambiati. Nell'esempio viene eseguita una configurazione come bilancia a campo unico con un gruppo di dati per la configurazione legale.

### Navigazione e immissione dei parametri

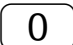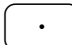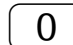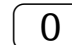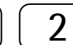

- Spostare la barra di selezione sul campo di immissione usando gli Help di linea  oppure 
- Immissione numerica con i tasti  ...  e  (punto decimale).  
Correzione con il tasto .
- Confermare con . Se nel menù seguono altri parametri, la barra di selezione passa automaticamente al campo successivo.
- Annullare l'immissione numerica: con l'Help di linea **ESC**.
- Passare al livello di menù immediatamente superiore con l'Help di linea .
- Tutti i parametri visualizzati sul display vengono memorizzati.
- Uscire dal menù di Setup e dal modo di Service: premere l'Help di linea .

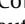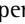
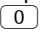

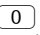
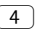

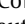
LEGALE	CAMPI	CAMP.UNICO	S
E:			0.002 kg
Portata min.:			0.020 kg
Portata max.:			6.000 kg


Nell'esempio mostrato di una bilancia a campo unico nella configurazione legale con una portata massima Max. di 6.000 kg, la divisione di verifica è stata modificata da 0,001 kg a 0,002 kg, in quanto sono ammesse solo un massimo di 3000 divisioni di verifica. Il valore modificato viene confermato con l'Help di linea . La barra di selezione passa automaticamente al campo **Portata min.**

Per le bilance omologate le portate minime sono prestabilite:

- per la classe : portata min. = 20 e
- per la classe : portata min. = 10 e

Modificando il valore di omologate e, si modifica anche automaticamente la portata minima. La modifica può essere fatta anche manualmente.

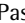Nell'esempio per la classe  si è dovuta aumentare la portata minima a 0,04 kg. Immettere      e confermare con l'Help di linea . La barra di selezione passa automaticamente nel campo **Portata max.**

Il valore per la portata massima non viene modificato. Nell'esempio qui mostrato di una bilancia a campo unico nella configurazione legale, l'immissione dei parametri è terminata. Premere l'Help di linea  per passare nel livello di menù immediatamente superiore.

LEGALE	CAMPI	DIV. PLUR.	S
E:	0.001	kg	
Portata min.:	0.010	kg	
Campo 1:	3.000	kg	
Campo 2:	0.000	kg	
Campo 3:	0.000	kg	
Portata max.:	6.000	kg	
<<	<	>	>>

Help di linea <

Help di linea <

INTERNO	CONF.C.A/D LEGALE	S
Classe di precisione		
Campi		
Unità selezionabili		
Unità calibraz./regolaz.		
Memoriz. dati di configurazione		

Help di linea v,  
event. Help di linea >

CONF.C.A/D LEGALE	UNITA	S
Definibili utente /o		
Grammi /g		*
Chilogrammi /kg		*
Carati /ct		
Libbre /lb		
Once /oz		
Once troy /ozt		
Tael Hongkong /tlh		
Tael Siampur /tls		
Tael Taiwan /tlt		
<<	<	>

Help di linea <

Help di linea v,  
event. Help di linea >

CONF.C.A/D LEGALE	UNITA CAL.	S
Grammi /g		
Chilogrammi /kg		
Tonnellate /t		

Help di linea <

Help di linea v, Help di linea >

### Bilancia a divisioni plurime

L'esempio a sinistra mostra il menù di immissione della configurazione dei campi per una bilancia a divisioni plurime. Si tratta di una configurazione legale con 2 campi di pesata con una portata massima di 6.000 kg.

- Campo 1: 0-3.000 kg con e1 = 0.001 kg
- Campo 2: 3.002 -6.000 kg con e2 = 0.002 kg

Nel campo **E**: immettere il valore di verifica per il campo 1. La portata minima per una bilancia della classe **III** deve essere impostata 0,02 kg.

Ritornando nel livello di menù superiore, la configurazione attivata è indicata dal simbolo «**O**».

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Aprire la voce di menù **Unità selezionabili**.

Menù per l'attivazione/disattivazione delle unità di peso impostabili sotto **Unità di peso x** (x = 1, 2).

Selezionare l'unità desiderata con gli Help di linea **v** oppure **v** e confermare con l'Help di linea **↓**. Nella maggioranza dei casi non è necessaria una modifica dei valori proposti. Le unità selezionabili sono contrassegnate con «**\***».

L'unità impiegata per la configurazione dei campi non può essere disattivata.

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.

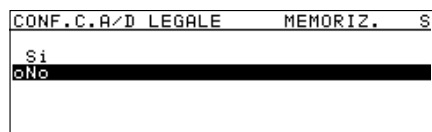
Aprire la voce di menù **Unità di calibraz./regolaz.** Per impostare l'unità di peso per la calibrazione e regolazione. Di regola non è necessaria una modifica dei valori proposti. Nel menù vengono visualizzate tutte le unità che sono attivate nel menù **Unità selezionabili**.

L'unità impostata è contrassegnata dal simbolo «**O**». Essa viene sempre visualizzata nel menù **Unità selezionabili** indipendentemente dalla sua condizione di attivazione.

Per cambiare l'unità di calibrazione/regolazione, selezionare l'unità con gli Help di linea **v** oppure **v** e confermare con l'Help di linea **↓**.

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.


Aprire la voce di menù **Memorizzazione dei dati di configurazione**.



Per memorizzare la configurazione, selezionare «Si» con l'Help di linea  $\uparrow$  e confermare con l'Help di linea  $\downarrow$ . Appare brevemente il messaggio **Dati memorizzati**. Poi il programma ritorna al normale funzionamento di pesata.


Se la configurazione non viene memorizzata: uscire dal menù premendo l'Help di linea  $\leftarrow$ . Il programma ritorna al livello di menù superiore successivo.

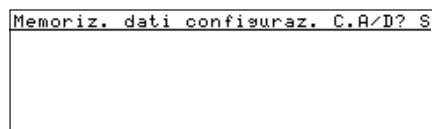Se dopo la modifica dei parametri si è usciti dal menù di configurazione senza memorizzare, ritornando al menù **PP 1 INTERNO** appare una domanda di sicurezza.





- Memorizzare i dati con l'Help di linea  $\rightarrow$
- Non memorizzare i dati con l'Help di linea  $\leftarrow$ . Il programma ritorna nel menù **PP 1 INTERNO**.

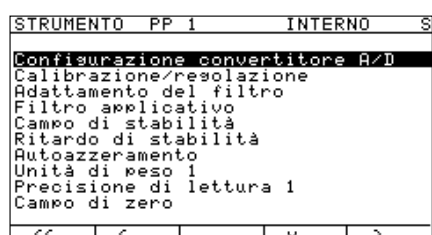Regolazione della bilancia: vedi il capitolo «Modo operativo», sezione «calibrazione, regolazione» oppure il manuale di Service.




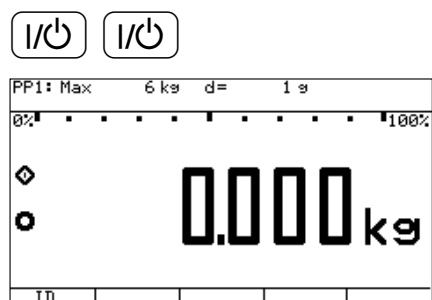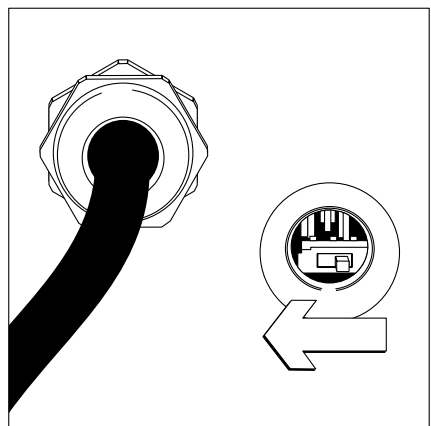- Dopo aver memorizzato la configurazione, chiudere il commutatore di accesso al menù (17), spingendolo verso sinistra. Rimettere la copertura sul commutatore di accesso al menù.



Spegnere e riaccendere lo strumento. Lo strumento si trova nel funzionamento di pesata.

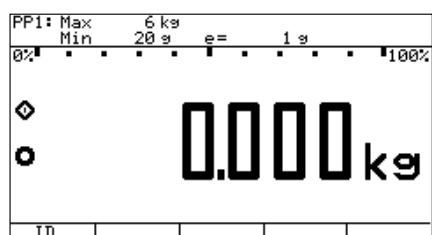Nelle due figure a sinistra (sopra e sotto) è raffigurato il display per una bilancia a divisioni plurime oppure per una bilancia a campi plurimi.



Se la configurazione è stata eseguita con un gruppo di dati di configurazione legale, vengono visualizzati anche i dati metrologici per l'impiego in metrologia legale nelle righe 1 e 2 del display.

## Esempio 2: Configurazione del convertitore A/D con cella di carico collegata

### Regolazione senza pesi

#### Preparazione

- Togliere il cappuccio di copertura, a sinistra dell'alloggiamento
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso destra
- Impostare il modo di Service, e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento**

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UnICOM		
Entrata di controllo		

Selezionare **Piattaforma di pesata 1**.

Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (simbolo **0**) selezionare questo parametro con l'Help di linea **↵** oppure **▼** e confermare la selezione con l'Help di linea **➤**.

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/risoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			

Appare brevemente il messaggio **Funzione attivata**, poi viene aperto il menù **PP 1 INTERNO**.

#### Help di linea ➤

PP 1	INTERNO	CONF.C.A/D	S
Standard			
oLesale			

Richiamare il menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Nell'esempio verranno mostrate l'immissione e memorizzazione dei parametri della(e) cella(e) di carico di una piattaforma di pesata. Questo riguarda solo l'impiego nel funzionamento standard.

Selezionare con l'Help di linea **➤** il gruppo di dati di configurazione **Standard**.

Nella figura a sinistra è impostata ancora la configurazione legale (simbolo «**0**»).

Aprendo il menù avviene il caricamento della configurazione Standard.

Ritornando nel menù **PP 1 INTERNO** risulterà contrassegnata con il simbolo «**0**».

#### Help di linea ➤

INTERNO	CONF.C.A/D	STANDARD	S
Campi			
Unità selezionabili			
Unità calibraz./risolaz.			
Memoriz. dati di configurazione			

Aprire il menù per la configurazione **Standard** del convertitore A/D.

#### Help di linea ➤

CONF.C.A/D	STANDARD	CAMPI	S
oBilancia a campo unico			
Bilancia a divisioni plurime			
Bilancia a campi plurimi			

Aprire la voce di menù **Campi**.

Nell'esempio mostrato è impostato **Bilancia a campo unico** (simbolo «**0**»). La configurazione di una bilancia a divisioni plurime oppure a campi plurimi è descritta nell'esempio 1 (pagine 71 – 73).

#### Help di linea ➤

STANDARD	CAMPI	CAMP.UNICO	S
D:		0.0005 kg	
Portata max.:		6.0000 kg	

Aprire il menù per l'impostazione del campo di pesata.

Nell'esempio mostrato viene eseguita la configurazione del convertitore A/D con un gruppo di dati per la configurazione standard come bilancia a campo unico. Immettere la divisione di lettura d e la portata massima. Eventualmente i valori visualizzati devono essere cambiati.

0 . 0 0 2

STANDARD	CAMPI	CAMP.UNICO	S
D:		0.002 kg	
Portata max.:		6.000 kg	

Help di linea <

Help di linea <

INTERNO	CONF.C.A/D	STANDARD	S
Campi			
Unità selezionabili			
Unità calibr./resolaz.			
Memoriz. dati di configurazione			

Help di linea √,  
event. Help di linea >

Help di linea <

Help di linea √,  
event. Help di linea >

Help di linea <

Help di linea √, Help di linea >

CONF.C.A/D	LEGALE	MEMORIZ.	S
Si			
No			

Memoriz. dati configuraz. C.A/D?	S



## Navigazione e immissione dei parametri

Vedi esempio 1, da pagina 67.

Nell'esempio mostrato di una bilancia a campo unico nella configurazione standard con una portata massima Max. di 6.000 kg, la divisione di lettura d preimpostata è stata modificata da 0,005 kg (12.000 divisioni) a 0,002 kg (3.000 divisioni). Il valore modificato viene confermato con l'Help di linea ↓. La barra di selezione passa automaticamente nel campo **Portata max..**

Se necessario modificare e confermare questo valore. La portata massima è in generale inferiore al carico nominale della(e) cella(e) di carico che si deve immettere nel menù **Resolazione senza pesi** in quanto quest'ultima viene caricata con elementi aggiuntivi. Ulteriori spiegazioni a riguardo si trovano a pagina seguente. Nell'esempio mostrato il valore non viene modificato.

Dopo il ritorno al livello di menù superiore **Campi** la configurazione attiva è contrassegnata dal simbolo «O».

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Aprire la voce di menù **Unità selezionabili**.

Menù per l'attivazione/disattivazione delle unità di peso impostabili sotto

**Unità di peso** × (x = 1, 2). Si veda l'esempio 1, pagina 67.

Nella maggioranza dei casi non è necessaria una modifica dei valori proposti.

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Aprire la voce di menù **Unità di calibr./resolaz.** per impostare

l'unità di peso per la calibrazione e regolazione. Si veda l'esempio 1, pagina 67.

Di regola non è necessaria una modifica dei valori proposti.

Ritorno al livello di menù **Configurazione del convertitore A/D**.

Aprire la voce di menù **Memorizzazione dei dati di configurazione**.

Per memorizzare la configurazione, selezionare «Si» con l'Help di linea √ e confermare con l'Help di linea ↓. Appare brevemente il messaggio **Dati memorizzati**. Poi il programma ritorna al normale funzionamento di pesata.

Se la configurazione non viene memorizzata: uscire da menù premendo l'Help di linea <. Il programma ritorna al livello di menù superiore successivo.

Se dopo la modifica dei parametri si è usciti dal menù di configurazione senza memorizzare, ritornando al menù **PP 1 INTERNO** appare una domanda di sicurezza.

- Memorizzare i dati con l'Help di linea >
- Non memorizzare i dati con l'Help di linea <. Il programma ritorna nel menù **PP 1 INTERNO**.

Una volta spento e riacceso, lo strumento si trova nel funzionamento normale di pesata.



STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/risoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			

Help di linea ↵, Help di linea ↵  
5 volte l'Help di linea ↵

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./resol.			
Funzione isoCAL			
Attivaz. risoluzione esterna			
Parametri per peso esterno			
Risoluzione senza pesi			
Dati geografici			
<<	<	^	v
>			

Help di linea ↵

INTERNO	CAL./REG.	REG.S.PES.	S
Immissione dei parametri			
Memorizzazione parametri			

Help di linea ↵

CAL./REG.	REG.S.PES.	PARAMETRI	S
Carico nom.: 0.00 kg			
Risoluzione: 0.000 kg			
Sensibilità 1: 0.0000000			
Sensibilità 2: 0.0000000			
Sensibilità 3: 0.0000000			
Sensibilità 4: 0.0000000			
<<	<	v	>

1 0 . 0 0

Help di linea ↵

0 . 0 0 2

Help di linea ↵

## Regolazione

Per la regolazione, ritornare nel modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento**. Selezionare il menù di Setup per **PP 1 INTERNO**.

Selezionare il menù **Calibrazione/risoluzione**.

Selezionare il menù **Risoluzione senza pesi**.

Aprire il menù **Risoluzione senza pesi**.

Aprire il menù per l'immissione dei parametri della(e) cella(e) di carico.

Immettere il carico nominale e la risoluzione della cella di carico in kg, e la(e) sensibilità(e) della(e) cella(e) di carico in mV/V nei campi rispettivi. Il carico nominale è in generale inferiore al valore nominale che si deve immettere nel menù **Risoluzione senza pesi**, in quanto quest'ultima viene caricata con elementi aggiuntivi.

Navigazione ed immissione: vedi esempio 1, pagina 68.

Nel caso di una piattaforma di pesata costituita da più celle di carico, il carico nominale deve essere moltiplicato secondo il numero delle celle di carico. Esempio: la piattaforma di pesata è costituita da 4 celle di carico ciascuna di 50 kg, il carico nominale è di  $4 \times 50 \text{ kg} = 200 \text{ kg}$ .

Nell'esempio qui mostrato la piattaforma di pesata è costituita da una cella di carico con una portata massima di 10 kg.

Confermare il valore immesso. La barra di selezione viene posta automaticamente sul campo **Risoluzione**. Immettere qui la divisione di lettura  $d$  più piccola  $d$  in kg. Questo valore deve concordare con il valore immesso nel menù di configurazione del convertitore A/D sotto in **D**.

Nell'esempio mostrato si ha  $d = 0,002 \text{ kg}$ .

Confermare il valore immesso. La barra di selezione viene posta automaticamente sul campo **Sensibilità 1**.

Per una piattaforma di pesata costituita da più celle di carico, si può immettere la sensibilità in questo campo

- sotto **Sensibilità 1** fino a **Sensibilità 4** come valore singolo oppure
- sotto **Sensibilità 1** come valore medio

Se è stato immesso un valore medio, cioè sono state collegate meno di 4 celle di carico, i campi rimanenti devono essere azzerati.  
Campo dei valori ammessi: 0,01–5 mV/V.

1 . 9 4 4

## Help di linea ↵

CAL./REG.	REG.S.PES.	PARAMETRI	S
Carico nom.:	10.00	kg	
Risoluzione:	0.002	kg	
Sensibilità 1:	1.9440000		
Sensibilità 2:	0.0000000		
Sensibilità 3:	0.0000000		
Sensibilità 4:	0.0000000		

Immettere la sensibilità di 1,944 mV/V.

Confermare il valore immesso. La barra di selezione viene posta automaticamente sul campo **Sensibilità 2**.

Se la piattaforma di pesata è costituita da più celle di carico e non è stato immesso il valore medio nel campo di immissione **Sensibilità 1**, immettere le altre sensibilità nei campi **Sensibilità 2** fino a **Sensibilità 4**.  
Tutti i campi di immissione vuoti devono essere azzerati.

## Help di linea <

## Help di linea ↵, Help di linea >

CAL./REG.	REG.S.PES.	MEMORIZ.	S
Si			
No			

Ritornare al livello di menù **Regolazione senza pesi**.

Aprire il menù **Memorizzazione dei parametri**.

Per memorizzare la configurazione, selezionare «Si» e confermare con l'Help di linea ↵. Appare brevemente il messaggio **Dati memorizzati**. Poi il programma ritorna alla voce «No».

## Help di linea <

## Help di linea <

## Help di linea <

Ritorno al livello di menù **Regolazione senza pesi**.

Ritorno al livello di menù **Calibrazione/regolazione**.

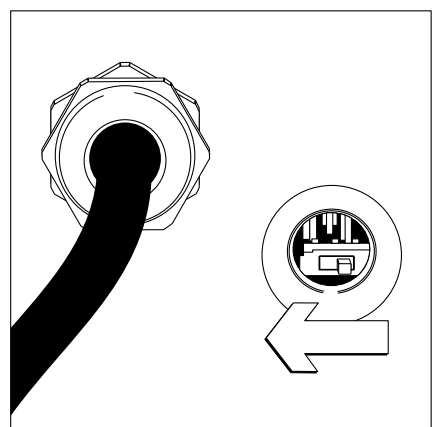
Ritorno al menù di Setup per i parametri dello strumento **PP 1 INTERNO**.

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/regolazione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			

Impostare/cancellare il precarico: vedi pagina 90.

Ritorno al modo di pesata normale.

<< oppure SETUP



I/O	I/O
WP1: Max	6 kg
Min	20 g
e=	1 g
0%	100%
0.000	kg
ID	

- Al termine della configurazione del convertitore A/D e della regolazione, chiudere il commutatore di accesso al menù (17), spingendolo a sinistra.
- Rimettere la copertura sul commutatore di accesso al menù.

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel funzionamento di pesata.

# Registrazione dei dati geografici

Cambiando il luogo d'utilizzo di una bilancia si modifica la sua sensibilità, in quanto dipende dalla forza di gravità, o più precisamente dall'accelerazione terrestre. L'accelerazione gravitazionale aumenta andando verso i poli (cioè con un grado di latitudine crescente) e diminuisce aumentando la distanza dal punto centrale gravitazionale (cioè con altitudine crescente). Si può cambiare facilmente il luogo di installazione della bilancia, poiché questa permette la memorizzazione dei dati corrispondenti. Oltretutto la bilancia può essere regolata esternamente (presso il fabbricante o rivenditore) ed essere messa in funzione sul luogo di installazione dopo la modifica dei dati geografici senza una nuova regolazione.

## Regolazione esterna

Per la regolazione esterna si usano come riferimento i dati geografici del luogo di fabbricazione. Per la Sartorius a Göttingen sono i seguenti:

- latitudine: 51° 32'
- altitudine: 151 s.l.m.
- accelerazione gravitazionale 9,811590 m/s<sup>2</sup>

Se i dati sono registrati nella bilancia viene a meno la modifica del fattore di regolazione sul luogo di installazione; si devono inserire solo i nuovi dati geografici. Naturalmente questo può essere eseguito già in fabbrica.

## Zona di tolleranza

La regolazione vale sul luogo di installazione all'interno di una zona di tolleranza. La zona di tolleranza per 3000 e è per esempio, ± 100 km dalla latitudine e ± 200 m dalla altitudine impostate s.l.m.

Per l'impostazione Germania (Zona D) vale la seguente eccezione: la bilancia può essere impiegata in tutta la Germania solo se sono stati registrati i seguenti dati geografici

- latitudine: 51,00°
- altitudine: 513 m s.l.m.

Questi dati corrispondono alla seguente accelerazione gravitazionale: 9,810 m/s<sup>2</sup>.

Questa impostazione viene consigliata per esempio ai rivenditori di bilance per consegne limitate alla Germania. L'immissione dei dati geografici esatti porta ad una maggiore precisione, ma limita la zona di tolleranza.

Alla consegna, nello strumento sono registrati i dati geografici «Germania (Zona D)».

## Immissione dei valori

Aprire il commutatore di accesso al menù (17). Si immette la coppia di valori **Latitudine** (in gradi) e **Altitudine** (in metri sul s.l.m.) oppure il valore **Accelerazione gravitazionale**. L'immissione avviene nel menù Parametri dello strumento della piattaforma di pesata sotto **Calibrazione/Regolazione: Dati geografici**.

Se il valore di accelerazione gravitazionale è già stato registrato, ha una priorità rispetto alla latitudine e alla altitudine. Aprendo il menù di immissione, si visualizza per la latitudine il valore 999999.99 e per l'altitudine il valore 999999. Nel caso in cui siano registrati solo i valori della latitudine e altitudine, si visualizza per l'accelerazione gravitazionale il valore 0000000.

Assicurarsi che i dati geografici siano stati immessi correttamente per il luogo di installazione. Se la regolazione esterna non è ancora stata effettuata, inserire i dati del luogo d'installazione. I dati possono essere richiesti presso l'ufficio del catasto di competenza oppure presso l'ufficio per il rilevamento topografico.

Terminata l'immissione, chiudere il commutatore di accesso al menù. Le bilance verificate per l'impiego legale devono essere sottoposte ad una nuova verifica.

## Regolazione

Una regolazione del valore caratteristico da parte del tecnico del Service (per es. dopo la sostituzione di una o più celle di carico) viene eseguita senza dover modificare i dati geografici memorizzati.

La visualizzazione dei dati per una regolazione dipende se è stato attivato questo parametro sotto **Parametri operativi: Visualizzazione dei dati geografici**. In caso affermativo, l'operazione di regolazione si svolge nel seguente modo:

Dopo l'avvio della regolazione **CAL**, utilizzando la latitudine e l'altitudine, appaiono brevemente la parola **Altitud** e il valore sul s.l.m.; premere **→T←** per confermare (annullamento con **→0←**). Poi appaiono **Latitud** e il valore impostato, premere **→T←** per confermare (annullamento con **→0←**). Poi viene richiesta la collocazione del peso di regolazione.

Impiegando il valore di accelerazione gravitazionale, dopo **CAL** appare la parola **Gravity** seguita dal valore impostato. Confermare con il tasto **→T←**, oppure annullare con **→0←**.

## Esempio: Immissione del luogo di regolazione e regolazione esterna

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/resoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			

### Help di linea $\nabla$ , Help di linea $\triangleright$

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./resol.			
Funzione isoCAL			
Parametri per peso esterno			
Regolazione senza pesi			

### 5 volte gli Help di linea $\nabla$ , Help di linea $\triangleright$

INTERNO	CAL./REG.	DATI GEOG.	S
Immissione dei parametri			
Memorizzazione parametri			

### Help di linea $\triangleright$

CAL./REG.	DATI GEOG.	PARAMETRI	S
Latitudine:			
Altitudine:			
Accel. gravit.:			
51.53			
151			
0.000000			

CAL./REG.	DATI GEOG.	PARAMETRI	S
Latitudine:			
Altitudine:			
Accel. gravit.:			
99999.99			
9999999			
0.000000			

- Togliere il cappuccio di copertura posto dietro, a sinistra sull'alloggiamento
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso destra
- Impostare il modo di Service, e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento**

Selezionare **PP 1**. Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (contrassegnato con «O»), selezionare questo parametro con gli Help di linea  $\nabla$  oppure  $\nabla$  e confermare con  $\triangleright$ . Appare brevemente il messaggio **Funzione attivata**, poi si apre il menù **PP 1 INTERNO**.

Si visualizza il menù per i parametri dello strumento **PP 1 INTERNO**.

Aprire **Calibrazione/resoluzione**.

Aprire **Dati geografici**.

Aprire **Immissione dei parametri**.

Nell'esempio mostrato i dati geografici sono registrati come coppia di valori **Latitudine** e **Altitudine** per la piattaforma corrispondente. Dopo la memorizzazione e riaprendo il menù di immissione questa coppia di valori sarà visualizzata di nuovo. Il campo di immissione per l'accelerazione gravitazionale è vuoto.

Nell'esempio seguente è registrato il valore dell'accelerazione gravitazionale sul luogo di installazione. I campi **Latitudine** e **Altitudine** sono vuoti. Dopo la memorizzazione e riaprendo il menù di immissione il valore impostato non verrà visualizzato. Il campo di immissione corrispondente è vuoto così che si può eseguire una nuova immissione. Richiede il valore attuale selezionando il menù **Info** della piattaforma di pesata.

#### Modifica dei dati

Selezionare il campo di immissione con l'Help di linea  $\nabla$  oppure  $\nabla$ , immettere il valore numerico e confermare con l'Help di linea  $\nabla$ . La barra di selezione si sposta automaticamente sul campo di immissione successivo.

#### Navigazione ed immissione

Vedi esempio 1, pagina 68.

Immissione della latitudine e altitudine immettere i valori nei campi di immissione.

#### Campi dei valori ammessi:

- latitudine nord o sud in gradi: 0 d «latitudine d» 90.00
  - altitudine in metri s.l.m.: -10000 d «altitudine d» 10000
- Immettere la latitudine del luogo d'installazione come numero decimale positivo (convertire il minuto angolare in decimali).

CAL./REG. DATI GEOG. PARAMETRI		S
Latitudine:	51.00	
Altitudine:	513	
Accel.gravit.:	0.000000	

La figura a sinistra mostra la coppia di valori **Latitudine** e **Altitudine** per la «Germania (Zona D)». Questa impostazione permette l'impiego della bilancia in tutta la Germania.

#### Immissione dell'accelerazione gravitazionale

Immettere l'accelerazione gravitazionale in  $\text{m/s}^2$  nel campo di immissione. Campo di valore ammesso: **9.700000** d «accelerazione gravitazionale 2 d» **9.900000**

Nell'esempio mostrato il valore per l'accelerazione gravitazionale è stato modificato. Il nuovo valore **9.810000**  $\text{m/s}^2$  vale per «Germania (zona D)»

CAL./REG. DATI GEOG. PARAMETRI		S
Latitudine:	99999.99	
Altitudine:	9999999	
Accel.gravit.:	9.810000	

#### Help di linea <

#### Help di linea ↵ , Help di linea >

CAL./REG. DATI GEOG. MEMORIZ.		S
Si		
No		

Ritorno al livello di menù immediatamente superiore.

Aprire il menù **Memorizzazione dei parametri**.

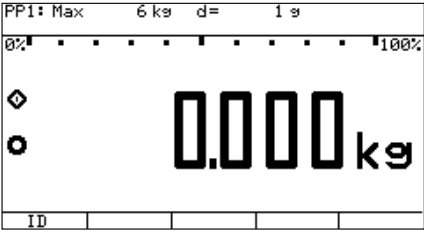
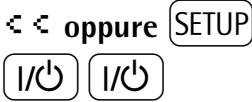
Per la memorizzazione dei dati geografici, selezionare con l'Help di linea ↵ «Si» e confermare con l'Help di linea ↵. Appare brevemente il messaggio **Dati memorizzati**.

Poi il programma ritorna nella schermata «No».

Help di linea <

Help di linea <

Help di linea <



Ritorno al livello di menù **Dati geografici**.

Ritorno al livello di menù **Calibrazione/resoluzione**.

Ritorno al menù di Setup per **PP 1 INTERNO**.

Ritorno al normale funzionamento di pesata.


Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel funzionamento di pesata.


**Regolazione della bilancia**

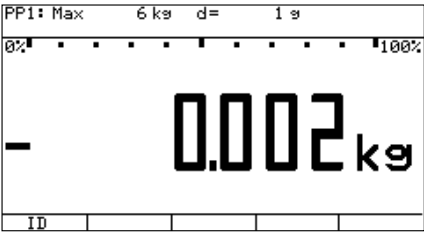(Si veda anche il capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione» pagina 38.)


- Richiamare il menù dei parametri dello strumento per la piattaforma di pesata relativa (per es. **PP 1 INTERNO**), e aprire il sottomenù **Calibrazione/resoluzione**.
  - Voce di menù **Funzione tasto CAL**: impostazione **Cal./res. est.: peso standard** (impostazione di fabbrica).
  - Voce di menù **Sequenza calib./resol.**: impostazione **Cal. con resol. manuale** (impostazione di fabbrica).
  - Voce di menù **Attivaz. risoluzione esterna** (non per la configurazione legale): impostazione **Sbloccata** (impostazione di fabbrica).
  - Per la visualizzazione dei dati geografici nel menù «Parametri dello strumento» aprire il sottomenù **Parametri operativi**. Voce di menù **Visualizzazione dati geografici** > On.




Scaricare e azzerare la bilancia.

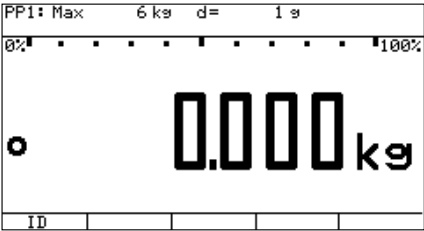

Avviare la regolazione esterna.

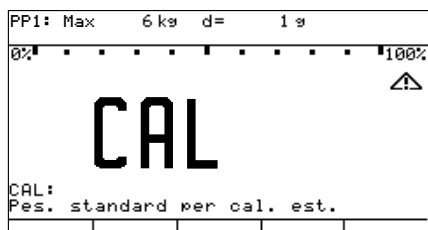


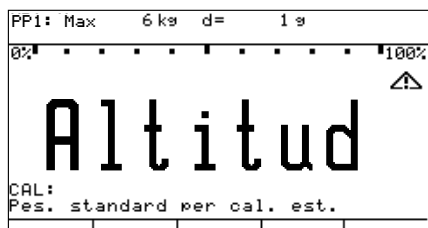L'indicazione **CAL** appare brevemente.



Nell'esempio è registrata la latitudine e l'altitudine del luogo di installazione.

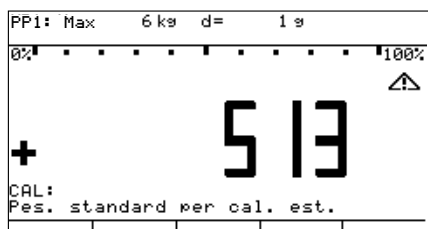
L'indicazione «Altitud» appare per 2 secondi.




Appare l'altitudine del luogo d'installazione in metri s.l.m.; qui l'altitudine per «Germania (Zona D)».



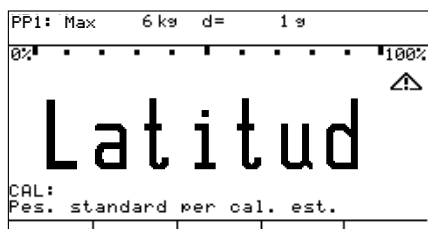Confermare il valore visualizzato oppure annullare l'operazione di regolazione con [Icon].




Appare l'indicazione «Latitud».

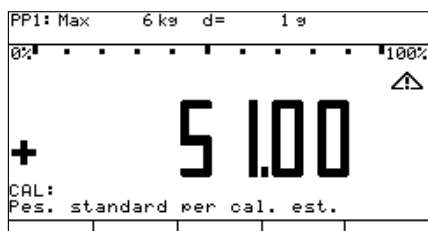

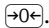
Si visualizza La latitudine del luogo d'installazione in gradi (latitudine nord o sud), qui per «Germania (Zona D)».




Confermare il valore visualizzato oppure annullare l'operazione di regolazione con .



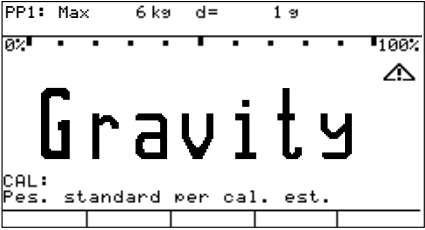Appare la richiesta di collocare il peso di regolazione (qui: 5 kg).  
L'ulteriore descrizione dell'operazione si trova nel capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione», pagina 38.



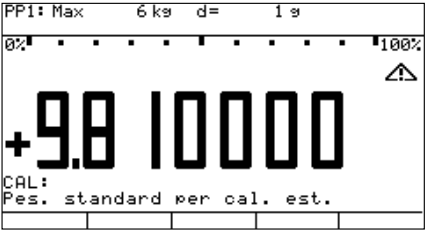Se al posto della latitudine e altitudine è stato registrata l'accelerazione gravitazionale, dopo CAL appare brevemente Gravity.




Appare il valore registrato in  $m/s^2$ ; qui per l'impostazione «Germania (Zona D)».



Confermare il valore visualizzato oppure annullare con .



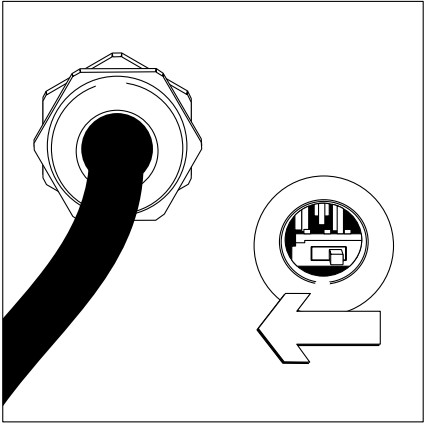
Appare la richiesta di collocare il peso di regolazione (qui: 5 kg).  
L'ulteriore descrizione dell'operazione si trova nel capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione», pagina 38.




- Al termine della regolazione togliere la copertura, a sinistra dell'alloggiamento e chiudere il commutatore di accesso al menù (17) spingendolo a sinistra.
- Rimettere la copertura sul commutatore di accesso al menù.



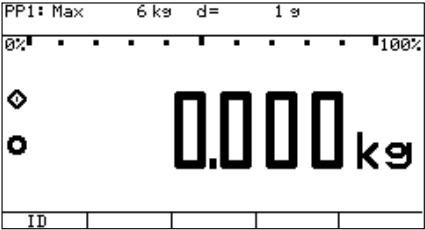Riavvio: dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel funzionamento di pesata.



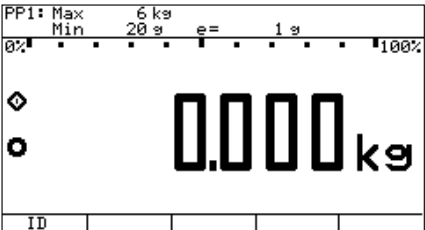Se la configurazione è stata eseguita con un gruppo di dati di configurazione legale, dopo il blocco del commutatore vengono visualizzati i dati metrologici nelle righe 1 e 2 del display per l'impiego in metrologia legale.  
Si veda anche «Impiego dello strumento in metrologia legale», pagina 62.





# Calibrazione/regolazione, linearizzazione, registrazione e cancellazione de precarico

## Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione»)

- Togliere il cappuccio di copertura posto dietro, a sinistra sull'alloggiamento dell'indicatore.
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso destra (nella direzione degli attacchi d'interfaccia) nella posizione di «sbloccato».
- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

Selezionare la piattaforma di pesata

(nell'esempio: **Piattaforma di pesata 1**).

Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (contrassegnato con **0**), selezionare questo parametro con l'Help di linea **↖** oppure **↙** e confermare la selezione con l'Help di linea **→**. Nella prima riga del display appare brevemente il messaggio **Funzione attiva**, poi viene aperto il menù di Setup per «PP 1 – Interno».

Help di linea **→**  
event. Help di linea **↖** | **↙**,  
Help di linea **→**

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/regolazione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			
Ritardo di stabilità			

Si visualizza il menù di Setup per i parametri dello strumento «PP 1 – Interno».

Help di linea **↙**, Help di linea **→**

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./resol.			
Funzione isoCAL			
Parametri per peso esterno			
Regolazione senza pesi			
Dati geografici			

Selezionare ed aprire il menù **Calibrazione/regolazione**.

3 volte l'Help di linea **↙**,  
Help di linea **→**

INTERNO	CAL./REG.	PESO ESTER	S
Peso cal/reg.:	5.000	kg	
Peso linear.1:	2.000	kg	
Peso linear.2:	4.000	kg	
Peso linear.3:	0.000	kg	
Peso linear.4:	6.000	kg	
<< < > >>			

Selezionare ed aprire il menù **Peso esterno**.

La prima voce di menù «Peso cal./reg.» per la selezione del peso di regolazione definito dall'utente, è disponibile anche senza l'impostazione del modo di Service. Tuttavia le voci di menù per la selezione dei pesi di linearizzazione da «Peso linear.1» fino a «Peso linear.4» possono essere richiamate solo dopo la selezione del modo di Service.

Sul display appaiono i valori attuali per il peso di regolazione definito dall'utente e i pesi di linearizzazione da 1 a 4. Tali valori possono essere confermati oppure modificati.

### Navigazione nel menù: immissione/modifica dei parametri

per ulteriori informazioni a riguardo: vedi l'esempio 1 della sezione «Configurazione del convertitore A/D» e il capitolo «Sistema di funzionamento».

Nell'esempio mostrato il valore per i pesi di regolazione esterni definiti dall'utente viene modificato nel valore 6.000 kg. Confermare il valore modificato con l'Help di linea **↵**. La barra di selezione si sposta automaticamente sul campo per il peso di linearizzazione 1 («Peso linear.1»).

6 . 0 0 0

Help di linea **↵**

INTERNO	CAL./REG.	PESO ESTER	S
Peso cal/res.:	6.000	kg	
Peso linear.1:	2.000	kg	
Peso linear.2:	4.000	kg	
Peso linear.3:	0.000	kg	
Peso linear.4:	6.000	kg	

Modifica del peso di linearizzazione 1:

1 . 5 0 0

Help di linea ↵

INTERNO	CAL./REG.	PESO ESTER	S
Peso cal/res.:	6.000	kg	
Peso linear.1:	1.500	kg	
Peso linear.2:	0.000	kg	
Peso linear.3:	6.000	kg	
Peso linear.4:	2.000	kg	

Immettere il nuovo valore (qui 1,5 kg) e confermare con l'Help di linea ↵. La barra di selezione si sposta automaticamente sul campo per il peso di linearizzazione 1 2 («Peso linear.2»).

Se necessario, immettere o modificare uno dopo l'altro i valori dei pesi di linearizzazione. Per i punti di linearizzazione che non servono, si cancella il valore di peso attuale immettendo il valore «0.000». Dopo l'immissione la barra di selezione passa automaticamente al campo seguente. Uscendo dal menù dopo aver premuto il tasto <, i valori immessi vengono memorizzati direttamente.

Nell'esempio mostrato sono stati immessi 4 punti di linearizzazione (1,5 kg, 3,0 kg, 4,5 kg e 6,0 kg).

INTERNO	CAL./REG.	PESO ESTER	S
Peso cal/res.:	6.000	kg	
Peso linear.1:	1.500	kg	
Peso linear.2:	3.000	kg	
Peso linear.3:	4.500	kg	
Peso linear.4:	6.000	kg	

Help di linea <

Ritorno al livello di menù immediatamente superiore, memorizzazione dei valori di immissione.

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./regol.			
Funzione isoCAL			
Parametri per peso esterno			
Regolazione senza pesi			
Dati geografici			

## Funzioni di calibrazione/regolazione e linearizzazione

### Impostazioni

- Richiamare il menù dei parametri dello strumento per la piattaforma di pesata corrispondente (per es. «PP 1 Interno») e aprire il sottomenù «Calibrazione/regolazione».
- Voce di menù «Sequenza calib./regol.»: impostazione «Cal. con regol. manuale» (impostazione di fabbrica).
- Voce di menù «Attivaz. Regolazione esterna» (non per la configurazione legale): impostazione «Sbloccata» (impostazione di fabbrica).
- I dati geografici non vengono visualizzati durante la calibrazione/regolazione (impostazione di fabbrica).

Attivazione dei dati geografici: Menù «Parametri dello strumento» - «Parametri operativi» - «Dati geografici» - impostazione «On» (impostazione di fabbrica: «Off»).

L'operazione di calibrazione/regolazione con la voce Dati geografici attivata è descritta nella sezione «Registrazione della latitudine, altitudine e accelerazione gravitazionale».

### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione» e il manuale di Service per le bilance complete e gli indicatori Combics).

- Togliere il cappuccio di copertura posto dietro, a sinistra sull'alloggiamento dell'indicatore.
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso destra (nella direzione degli attacchi d'interfaccia) nella posizione di «Sbloccato».
- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

Selezionare la piattaforma di pesata  
(nell'esempio: **Piattaforma di pesata 1**).

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (contrassegnato con 0), selezionare questo parametro con l'Help di linea ↵ oppure ↵ e confermare la selezione con l'Help di linea >. Nella prima riga del display appare brevemente il messaggio **Funzione attivata**, poi viene aperto il menù di Setup per «PP 1 Interno».

## Help di linea ➤ event. Help di linea ↖ | ↗, Help di linea ➤

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/risoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			
Ritardo di stabilità			

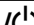
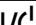


## Help di linea ↗, Help di linea ➤

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./resol.			
Funzione isoCAL			
Parametri per peso esterno			
Risoluzione senza pesi			
Dati geografici			

## Help di linea ➤

INTERNO	CAL./REG.	TASTO CAL	S
Cal./reg. esterna; peso standard			
Cal./reg. esterna; peso utente			
Lineariz. est.; pesi utente			
Impostazione del precarico			
Cancellazione del precarico			
Tasto CAL bloccato			

## Event. Help di linea ↖, Help di linea ↵

			
PP1: Max      6 kg    d=    2 g			
0% . . . . . 100%			
 		0.000 kg	
ID			

Si visualizza il menù di Setup per i parametri dello strumento «PP 1 Interno».

Selezionare ed aprire il menù **Calibrazione/risoluzione**.

Si visualizza il sottomenù «Calibrazione/risoluzione» per la piattaforma di pesata selezionata (nell'esempio mostrato «PP 1 Interno»).

Aprire il sottomenù **Funzione tasto CAL**.

Si visualizza il sottomenù «Funzione tasto CAL».

### Nota

Le funzioni impostabili nel sottomenù «Funzione tasto CAL» dipendono dalla piattaforma selezionata e dai dati di configurazione corrispondenti. Le funzioni non eseguibili non sono rappresentate nella maschera di selezione (nell'esempio è mostrata la funzione «Cal./reg. esterna; peso standard»).

### Nota

La funzione «Funzione tasto CAL» impostata nel menù viene eseguita nel modo di pesata normale (visualizzazione: **CAL**), in quanto uscendo dal menù di Setup, il modo di Service viene disattivato. Se la funzione deve essere eseguita con una piattaforma di pesata digitale (per es. una piattaforma di pesata IS), allora deve essere eseguita nel modo di Service. A questo proposito, dopo l'impostazione della funzione desiderata e dopo essere usciti dal menù di Setup, riattivare il modo di Service e uscire dal menù di Setup con il tasto **SETUP** oppure l'Help di linea **↖**. La bilancia si trova ora nel modo di Service senza che questo sia visualizzato. Attivare la funzione impostata in precedenza con il tasto **↵** (premere a lungo). Sul display appare **S-CAL** come conferma che lo strumento si trova nel modo di Service. Annullando la funzione con il tasto **↵** oppure con il riavvio della bilancia con il tasto **I/O**, si esce dal modo di Service.

## Regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard

Se la voce di menù **Cal./reg. est.; peso standard** (regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard) non è stata ancora impostata (contrassegnata con **0**), selezionare questa voce. Con l'Help di linea **↖** (in caso premere più volte) posizionare la barra di selezione su questa voce di menù e confermare con l'Help di linea **↵**. Quando la voce di menù è impostata appare il simbolo **0**.

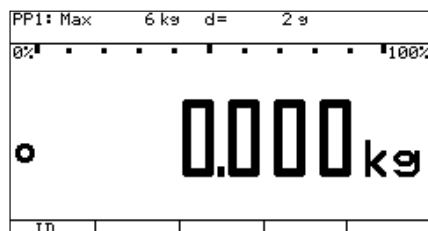
### Nota

Le voci di menù «Cal./reg. est.; peso standard» (regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard), «Cal./reg. est.; peso utente» (regolazione esterna con un peso definito dall'utente), e «Tasto Cal bloccato» sono disponibili anche senza l'impostazione del modo di Service.




Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.


Event. 



 a lungo

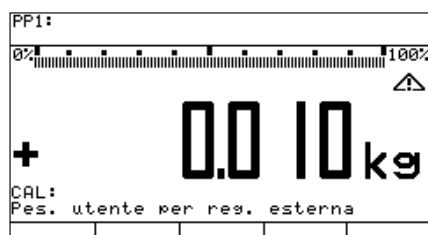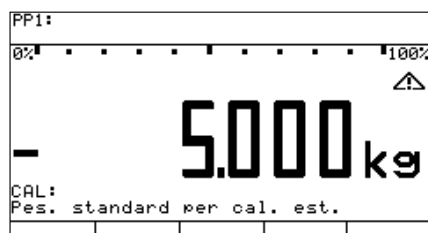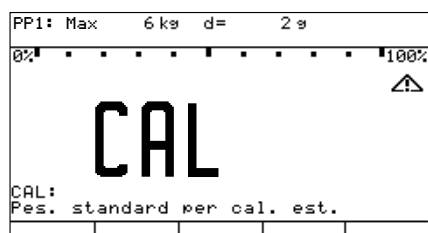




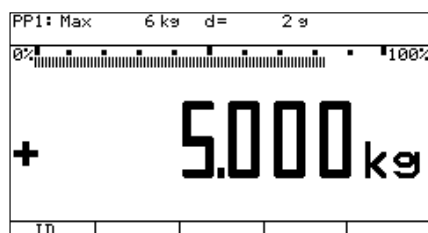


Scaricare la bilancia e azzerare.

Avvio della regolazione esterna.

Questa visualizzazione appare per 2 secondi.

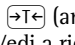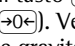Nota

Se è attivata la visualizzazione dei dati geografici (altitudine, latitudine e accelerazione terrestre) (vedi le impostazioni all'inizio di questa sezione), questi vengono visualizzati e confermati premendo il tasto  (annullamento dell'operazione di calibrazione/regolazione con il tasto ). Vedi a riguardo la sezione «Registrazione della latitudine, altitudine e accelerazione gravitazionale» in questo capitolo.

Il valore nominale del peso di regolazione richiesto (nell'esempio: 5,000 kg) appare sul display come valore negativo.

- Collocare il peso di regolazione richiesto.

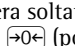
Nota

Se per l'operazione di calibrazione e regolazione è stata impostata la regolazione automatica (menù «Calibrazione/regolazione» - «Sequenza calib./regol.» - impostazione «Cal. con regol. autom.», vedi le impostazioni all'inizio di questa sezione) e il peso di regolazione costituito da diversi pesi, collocare quest'ultimi in successione a brevi intervalli. **Se la bilancia raggiunge la stabilità, allo scadere di un intervallo di tempo prestabilito, il carico posto viene accettato come peso di regolazione richiesto e la bilancia viene regolata con questo peso.** La differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche non viene visualizzata, ma emessa solo nel protocollo GMP (vedi pagina seguente).

Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione).

Nota

Questa visualizzazione appare solo con l'impostazione «Cal. con regol. manuale» (vedi nota precedente). Nel caso in cui sia stata fatta l'impostazione «Cal. con regol. autom.» non è possibile l'annullamento dell'operazione di calibrazione/regolazione.

- Se si desidera soltanto la calibrazione, annullare l'operazione di calibrazione/regolazione con il tasto  (possibile solo con l'impostazione «Cal. con regol. manuale»).

Regolare la bilancia (solo con l'impostazione «Cal. con regol. manuale»).

Al termine dell'operazione di regolazione, il valore di regolazione viene visualizzato come valore positivo.

```

-----
14.01.2002      13:50
Typ      CW3P1-6DC-LCE
Ser.no.   12345678
Vers.    1.0103.11.2
BVers.   01-26-02
-----
Calibrazione esterna
Nom. +    5.000 kg
Diff. +    0.010 kg
Regolazione esterna
Diff. +    0.000 kg
-----
14.01.2003      13:52
Nome:
-----

```



- Scaricare la bilancia.

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

#### Attenzione!

Se per errore la bilancia è stata regolata in modo sbagliato (per es. usando l'impostazione «Cal. con regol. autom.» e un peso di regolazione troppo piccolo), forse la bilancia non raggiunge più la stabilità e di conseguenza non visualizza nessuno zero. In questo caso si deve immettere tramite il menù «Regolazione senza pesi» una sensibilità media della barra di pesata del sistema a dilatometro a lamella di 2.0 mV/V e poi memorizzare. Successivamente regolare di nuovo la bilancia. Vedi a riguardo la sezione «Configurazione A/D», esempio 2: Regolazione senza pesi.

#### Regolazione esterna con un peso definito dall'utente

##### Preparazione

Come per la voce di menù «Cal./reg. est.; peso standard» (regolazione esterna con il peso di fabbrica– peso standard), ma impostando la voce di menù **Cal./reg. est.;** **peso utente** (regolazione esterna con un peso definito dall'utente).

- In aggiunta:  
immettere il valore nominale del peso di regolazione nel menù «Calibrazione/regolazione» sotto la voce di menù «Peso esterno» nel campo di immissione «Peso cal/reg.:».

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

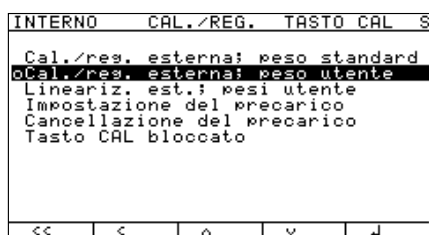
Scaricare la bilancia e azzerare.

Avvio dell'operazione di calibrazione/regolazione.

Questa visualizzazione appare per 2 secondi.

##### Nota

Se è attivata la visualizzazione dei dati geografici (altitudine, latitudine e accelerazione terrestre) (vedi le impostazioni all'inizio di questa sezione), questi vengono visualizzati e confermati premendo il tasto  $\rightarrow T \leftarrow$  (annullamento dell'operazione di calibrazione/regolazione con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ ). Vedi a riguardo la sezione «Registrazione della latitudine, altitudine e accelerazione gravitazionale» in questo capitolo.






Il valore nominale del peso di regolazione richiesto (nell'esempio: 6,000 kg) appare sul display come valore negativo.

- Collocare il peso di regolazione richiesto.

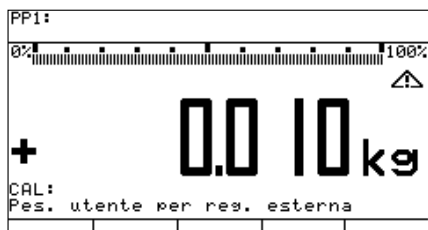Se per l'operazione di calibrazione e regolazione è stata impostata la regolazione automatica, osservare la nota nella sezione «Regolazione esterna con un peso di fabbrica».




Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione).

- Se si desidera soltanto la calibrazione, annullare l'operazione di calibrazione/regolazione con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .



Regolare la bilancia.

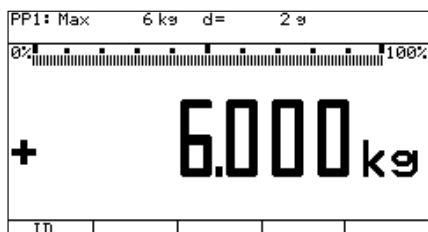Al termine dell'operazione di regolazione, il valore di regolazione viene visualizzato come valore positivo.



Al termine dell'operazione di calibrazione/regolazione, viene stampato il protocollo GMP rappresentato qui a sinistra. Se l'operazione di regolazione è stata annullata (solo calibrazione), mancano le due righe «Regolazione esterna» e «Diff. + 0.000 kg».

```

-----
14.01.2002      13:50
Typ    CW3P1-6DC-LCE
Ser.no.   12345678
Vers.    1.0103.11.2
BVers.    01-26-02
-----
Calibrazione esterna
Nom.  +   6.000 kg
Diff. +   0.010 kg
Regolazione esterna
Diff. +   0.000 kg
-----
14.01.2003      13:52
Nome:
-----

```

- Scaricare la bilancia.

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

#### Attenzione!

In caso di una regolazione sbagliata in modo grossolano, osservare le indicazioni date nei paragrafi precedenti!

#### Calibrazione/regolazione interna

Questa funzione esiste solo se è collegata una piattaforma di pesata digitale (per es. una piattaforma di pesata IS) alla piattaforma di pesata 2, come 2° piattaforma di pesata oppure come piattaforma singola senza l'impiego del convertitore interno A/D per PP1. La connessione avviene tramite l'interfaccia COM1 o COM2 secondo la configurazione corrispondente. Questa funzione è disponibile anche senza l'impostazione del modo di Service.



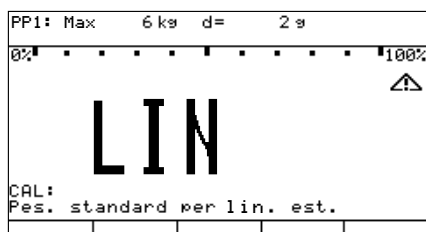
### Linearizzazione esterna con pesi di fabbrica – pesi standard

Questa funzione è disponibile solo se il software e la funzionalità della piattaforma di pesata la permettono.

#### Preparazione

Come per la voce di menù «Cal./reg. est.; peso utente» (regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard) e «Lineariz. est.; pesi utente». Per questa funzione non è importante l'attivazione della visualizzazione dei dati geografici.

- Nel menù «Calibrazione/regolazione impostare il sottomenù «Funzione tasto CAL» e la voce di menù **Lineariz. est.; pesi utente** (linearizzazione esterna con pesi di fabbrica).



Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Scaricare la bilancia e azzerare.

Avvio dell'operazione di linearizzazione.

Questa visualizzazione appare per 2 secondi.

L'ulteriore svolgimento dell'operazione di linearizzazione è uguale allo svolgimento descritto sotto la voce di menù «Lineariz. est.; pesi utente» (linearizzazione esterna con pesi definiti dall'utente).

### Linearizzazione esterna con pesi definiti dall'utente

#### Preparazione

Come per la voce di menù «Cal./reg. est.; peso utente» (regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard) e «Lineariz. est.; pesi di fabbrica». Per questa funzione non è importante l'attivazione della visualizzazione dei dati geografici.

- Nel menù «Calibrazione/regolazione impostare il sottomenù «Funzione tasto CAL» e la voce di menù **Lineariz. est.; pesi utente** (linearizzazione esterna con pesi dell'utente).
- In aggiunta:  
immettere il valore nominale del peso di linearizzazione nel menù «Calibrazione/regolazione» sotto la voce di menù «Peso esterno» nel campo di immissione «Peso linear.1» fino a «Peso linear.4», come descritto all'inizio di questo capitolo.



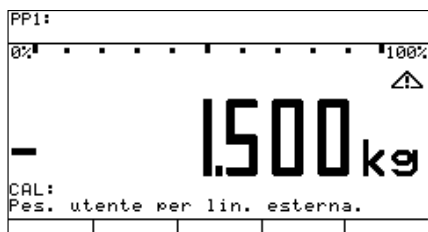
Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Scaricare la bilancia e azzerare.

Avvio dell'operazione di linearizzazione.

Questa visualizzazione appare per 2 secondi.



Dopo circa 2 secondi appare sul display il valore nominale del peso di linearizzazione 1 (nell'esempio: 1,500 kg) come valore negativo.

- Collocare il peso di linearizzazione 1.

Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione)

- Annullare l'operazione di linearizzazione con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .



Regolare la bilancia, cioè memorizzare il peso di linearizzazione 1.

Dopo la memorizzazione del peso di linearizzazione 1 appare sul display il valore nominale del peso di linearizzazione 2 (nell'esempio: 3,000 kg) come valore negativo.

- Collocare il peso di linearizzazione 2.

Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione).

- Annullare l'operazione di linearizzazione con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .



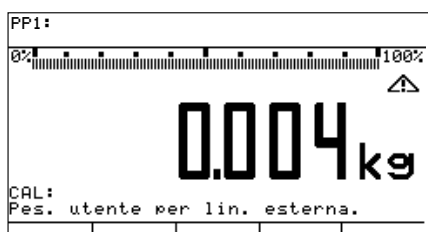
Regolare la bilancia, cioè memorizzare il peso di linearizzazione 2.

Dopo la memorizzazione del peso di linearizzazione 2 appare sul display il valore nominale del peso di linearizzazione 3 (nell'esempio: 4,500 kg) come valore negativo.

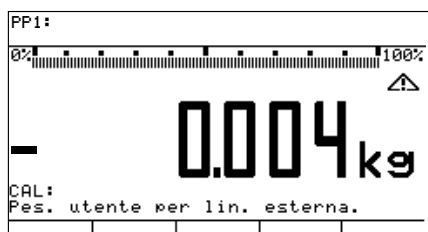
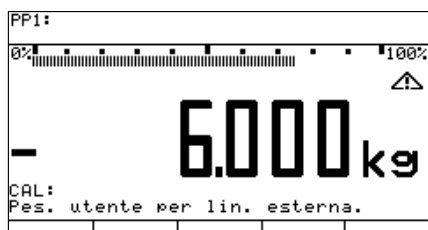
- Collocare il peso di linearizzazione 3.

Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione).

- Annullare l'operazione di linearizzazione con il tasto  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .







```
-----
14.01.2002      13:00
Typ      CW3P1-6DC-LCE
Ser.no.    12345678
Vers.     1.0103.11.2
BVers.    01-26-02
-----
```

```
Linearizzazione
Pes. 1  +   1.500 kg
Pes. 2  +   3.000 kg
Pes. 3  +   4.000 kg
Pes. 4  +   6.000 kg
      Terminato
-----
```

```
14.01.2003      13:02
Nome:
-----
```

Regolare la bilancia, cioè memorizzare il peso di linearizzazione 3.

Dopo la memorizzazione del peso di linearizzazione 3 appare sul display il valore nominale del peso di linearizzazione 4 (nell'esempio: 6,000 kg) come valore negativo.

- Collocare il peso di linearizzazione 4.

Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione delle caratteristiche (calibrazione).

- Annullare l'operazione di linearizzazione con il tasto

Regolare la bilancia, cioè memorizzare il peso di linearizzazione 4.

Dopo la memorizzazione del peso di linearizzazione 4 viene richiesto lo zero.

- Togliere tutti i pesi di linearizzazione dalla bilancia.

Dopo la memorizzazione automatica dello zero, l'indicatore si commuta automaticamente nel modo operativo di pesata.

Al termine dell'operazione di linearizzazione viene stampato il protocollo GMP mostrato qui a sinistra.

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

Help di linea ➤  
event. l'Help di linea ▲ | ▼,  
Help di linea ➤

STRUMENTO	PP 1	INTERNO	S
Configurazione convertitore A/D			
Calibrazione/risoluzione			
Adattamento del filtro			
Filtro applicativo			
Campo di stabilità			
Ritardo di stabilità			

Help di linea ▼, Help di linea ➤

PP 1	INTERNO	CAL./REG.	S
Funzione tasto CAL			
Sequenza calib./resol.			
Funzione isoCAL			
Parametri per peso esterno			
Risoluzione senza pesi			
Dati geografici			

Help di linea ➤

INTERNO	CAL./REG.	TASTO CAL	S
Cal./reg. esterna: peso standard			
Cal./reg. esterna: peso utente			
Lineariz. est.: pesi utente			
Impostazione del precarico			
Cancellazione del precarico			
Tasto CAL bloccato			

Event. più volte l' Help  
di linea ▲ | ▼

Help di linea ↵

INTERNO	CAL./REG.	TASTO CAL	S
Cal./reg. esterna: peso standard			
Cal./reg. esterna: peso utente			
Lineariz. est.: pesi utente			
Impostazione del precarico			
Cancellazione del precarico			
Tasto CAL bloccato			



→0← oppure →T←

## Registrazione e cancellazione del precarico

### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione» e il manuale di Service per le bilance complete e gli indicatori Combics).

- Togliere il cappuccio di copertura posto dietro, a sinistra sull'alloggiamento dell'indicatore.
- Spingere il commutatore di accesso al menù verso sinistra (posizione «sbloccato»).
- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

Selezionare la piattaforma di pesata desiderata (nell'esempio: **Piattaforma pesata 1**).

Se il parametro **Interno** non è stato ancora impostato (contrassegnato con **Q**), selezionare questo parametro con l'Help di linea ▲ oppure ▼ e confermare la selezione con l'Help di linea ➤. Per breve tempo nella prima riga del display appare il messaggio **Funzione attivata**, poi viene aperto il menù di Setup per «PP 1 Interno».

Si visualizza il menù di Setup per i parametri dello strumento «PP1 Interno».

Selezionare ed aprire il menù **Calibrazione/risoluzione**.

Aprire il sottomenù **Funzione tasto CAL**.

La funzione attualmente impostata (nell'esempio «Cal./reg. est.; peso standard», regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard) è contrassegnata dal simbolo «**Q**».

### Registrazione del precarico

Se la voce di menù **Registraz. precarico** non è stata ancora impostata (contrassegnata con **Q**), selezionare menù questa voce. Con l'Help di linea ▲ (in caso premere più volte) posizionare la barra di selezione su questa voce di menù e confermare con l'Help di linea ↵.

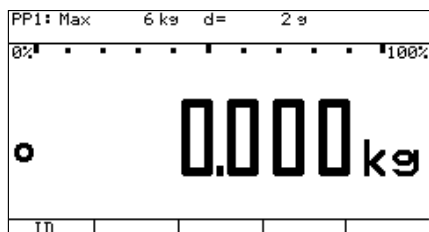
La voce di menù «Registrazione del precarico» è impostata quando appare il simbolo «**Q**».

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.


Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Scaricare la bilancia, poi tarare o annullare.

Dopo il comando di taratura, può ancora apparire sul display **NET**.



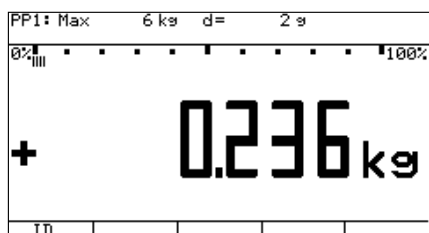Display dopo l'azzeramento della bilancia.



- Collocare il peso del precarico sulla piattaforma di pesata.

→T← a lungo



Avviare la funzione «Registrazione del precarico».

Questa visualizzazione appare per 2 secondi. Il carico posto viene registrato come precarico.

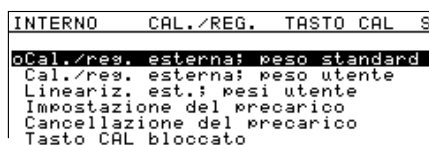
```

-----
14.01.2002      13:50
Typ      CW3P1-6ED-LCE
Ser.no.    12345678
Vers.     1.0103.11.2
BVers.    01-26-02
-----
Registraz. precarico
Terminato
-----
14.01.2003      13:52
Nome:
-----

```

Dopo l'esecuzione della funzione «Registrazione del precarico», la bilancia viene azzerata. Lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Al termine della funzione «Registrazione del precarico», viene stampato il protocollo GMP raffigurato a sinistra.



#### Cancellazione del precarico

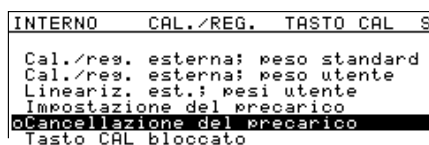
Aprire il sottomenù **Funzione tasto CAL**.

La funzione attualmente impostata (nell'esempio «Cal./reg. est.; peso standard», regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard) è contrassegnata dal simbolo «o».

Event. più volte l'Help di linea ^ | v

Help di linea ↓

Se la voce di menù **Cancellaz. precarico** non è stata ancora impostata (contrassegnata con o), selezionare menù questa voce. Con l'Help di linea ^ (in caso premere più volte) posizionare la barra di selezione su questa voce di menù e confermare con l'Help di linea ↓.



La voce di menù «Cancellazione del precarico» è impostata quando appare il simbolo «o».



Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

- Togliere il peso del precarico dalla piattaforma di pesata.  
Sul display il precarico tolto è rappresentato come valore negativo.



Avviare la funzione «Cancellazione del precarico».

Questa visualizzazione appare per 2 secondi. Il precarico viene cancellato.



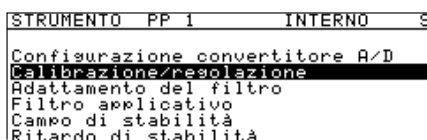
Dopo l'esecuzione della funzione «Cancellazione del precarico», la bilancia viene azzerata. Lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Al termine della funzione «Cancellazione del precarico», viene stampato il protocollo GMP raffigurato a sinistra.

```
-----
14.01.2002      13:50
Typ      CW3P1-6DC-LCE
Ser.no.    12345678
Vers.     1.0103.11.2
BVers.    01-26-02
-----
Cancellaz. precarico
          Terminato
-----
14.01.2003      13:52
Nome:
-----
```

Al termine delle funzioni «Calibrazione/regolazione», «Linearizzazione» e «Registrazione/cancellazione del precarico»


- Nel menù Parametri dello strumento richiamare la piattaforma di pesata corrispondente (per es. per PP 1) il menù «Calibrazione/regolazione».



Il menù «Calibrazione/regolazione» viene aperto.

- Richiamare il sottomenù «Funzione tasto CAL» e impostare la funzione «Cal./reg. est.; peso di fabbrica» (regolazione esterna con il peso di fabbrica – peso standard). Questa è l'impostazione di fabbrica per questo sottomenù e quindi è disponibile anche quando il modo di Service non è attivato.
- Per l'esecuzione di lavori di servizio ripristinare le impostazioni di fabbrica per le impostazioni dei sottomenù «Sequenza cal./reg.» (sequenza dell'operazione di calibrazione/regolazione) e «Attivaz. regolazione esterna» (attivazione della regolazione esterna, non per la configurazione legale).  
Le impostazioni di fabbrica sono:
  - voce di menù «Sequenza cal./reg.»: «Cal. con regol. manuale»
  - voce di menù «Attivaz. regolazione esterna» (non per la configurazione legale): impostazione «Sbloccata»

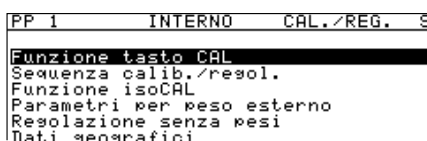Help di linea ➤



### 3 volte l'Help di linea ◀

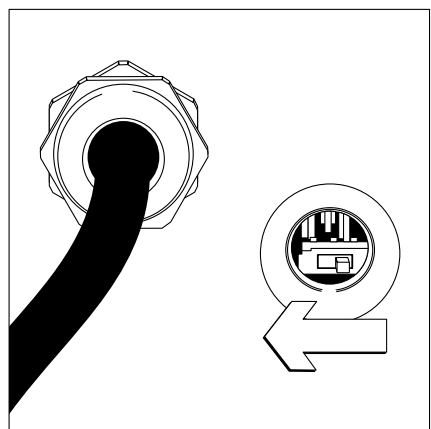
SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
Unicom		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

### Più volte l'Help di linea ▽

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
Unicom		
Entrata di controllo		
Codice a barre		
Protocollo di stampa		
Parametri operativi		
Ora		
Password		
<<	<	^
	▽	>

### 6 volte l'Help di linea ▽, Help di linea ➤

STRUMENTO	MOD. OPER.	VIS. DATI G S
Off		
On		





PP1: Max	6 kg	d=	2 g
0%			100%
0	0.000	kg	
ID			

PP1: Max	6 kg	e=	2 g
Min			
0%			100%
0	0.000	kg	
ID			

Ritorno al menù dei parametri dello strumento.

Selezionare il menù **Parametri operativi**.

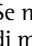Selezionare ed aprire il sottomenù **Dati geografici**.

Se non è ancora stata disattivata (contrassegno con il simbolo «»), disattivare la voce di menù Dati geografici (impostazione di fabbrica). Con l'Help di linea ▽ posizionare la barra di selezione su «Disattivata» e confermare questa impostazione con l'Help di linea ↵. La nuova impostazione è contrassegnata dal simbolo «».

#### Nota

La voce di menù «Ripristinare tutti i parametri», che si trova nel livello di menù più alto nel modo di Service, se attivata, ripristina tutti i parametri operativi sulle impostazioni di fabbrica. Questo riguarda anche le impostazioni specifiche dell'utente che sono state fatte. Vedi a riguardo la sezione «Ripristinare tutti i parametri operativi sulle impostazioni di fabbrica» in questo capitolo.

- Posizionare il commutatore di accesso al menù dalla posizione «Sbloccato» nella posizione di «Bloccato»:
- In caso, togliere il cappuccio di copertura posto dietro, a sinistra sull'alloggiamento dell'indicatore.
- Spingere il commutatore di accesso al menù a sinistra, nella posizione di «Bloccato». Vedi anche il capitolo «Modo operativo», sezione «Calibrazione, regolazione» oppure il manuale di Service.
- Rimettere il cappuccio di copertura per chiudere il commutatore di accesso al menù.

Riavvio della bilancia: spegnere e riaccendere l'indicatore.

Dopo la visualizzazione del logo Sartorius, lo strumento si trova nel modo operativo di pesata.

Se la configurazione del convertitore A/D è stata eseguita con un gruppo di dati per la configurazione legale e il commutatore di accesso al menù è bloccato, appariranno nelle righe metrologiche (riga 1 e 2) del display i dati metrologici per l'impiego della bilancia in metrologia legale. Vedi a riguardo anche la sezione «Controllo e configurazione per l'impiego in metrologia legale» in questo capitolo.

(interfaccia COM1 oppure COM2):

Dopo la chiusura del commutatore di

piattaforma di pesata).



Mediante l'attivazione della voce di menù «Ripristinare tutti i parametri» nel livello più alto del menù di Setup, tutti i parametri operativi (cioè tutte le impostazioni memorizzate nella EEPROM e RAM dell'indicatore) vengono ripristinati sulle impostazioni di fabbrica. La lingua dell'utente viene ripristinata sull'impostazione di fabbrica («Inglese») e se è attivata una password dell'utente questa viene disattivata. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riguarda anche le configurazioni delle interfacce (per es. «SBI» per COM1 oppure «PP-2» per COM2) e tutte le impostazioni specifiche dell'utente, se sono state fatte. Il contatore interno per la memoria Alibi viene azzerato. Ne consegue che dopo il riavvio si visualizzerà l'errore «Err 343». L'impostazione della impostazione delle piattaforme di pesata PP 1 oppure PP2 rimane invariata.

(vedi anche il capitolo «Impostazioni», sezione «Prospetto del menù operativo»)

- Impostare il modo di Service (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

**Help di linea ➤**

Selezionare ed aprire il menù **Ripristinare tutti i parametri**.

- Ripristinare tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica: con l'Help di linea  posizionare la barra di selezione su «Si» e confermare con l'Help di linea  il ripristino sulle impostazioni di fabbrica. Nella 1° riga del display appare per breve tempo il messaggio **Parametri ripristinati**. Successivamente il programma ritorna al display precedente «No» (versione in lingua inglese: Non ripristinare i parametri).

Ritorno al menù di Setup nel modo di Service.

Lo strumento è impostato sulla lingua inglese.

Eventualmente nel menù di Setup sotto «Language» impostare la versione in lingua italiana.

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

## Più volte l'Help di linea ↵

SETUP	STRUMENTO	S
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		
Protocollo di stampa		
Parametri operativi		
Ora		
Password		
Manutenzione		
Numero memoria		
Dati terminale		
<<	<	^
	v	>

## Help di linea ↵

SETUP	STRUMENTO	MANUTENZ.	S
Data servizio:		01.02.03	

## Help di linea ↵

SETUP	STRUMENTO	S
Piattaforma di pesata 1		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

### Registrazione della data di service

#### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Impostazioni», sezione «Prospetto del Setup» e il manuale di Service per le balance complete e gli indicatori Combics).

- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

Richiamare la voce di menù **Manutenzione**.

Aprire la voce di menù **Manutenzione**.

Si visualizza il campo per l'immissione della data di Service.

#### Navigare nel menù: immissione/modifica dei parametri

Vedi a riguardo le spiegazioni nell'esempio 1 della sezione «Convertitore A/D» nel capitolo «Sistema di funzionamento».

Registrazione la data del Service successivo e confermare con l'Help di linea ↵.

Nota

La data di Service viene visualizzata nel menù di Setup sotto «Setup» - «Info» - «Service». Qui non è necessaria l'impostazione del modo di Service.

Ritorno nel menù dei parametri dello strumento.

#### Immissione del numero di transazione per la memorizzazione dei dati nella memoria Alibi

L'indicatore Combics utilizza un numero di transazione per la chiara identificazione dei gruppi di dati depositati nella memoria Alibi. È un numero composto da un massimo di 8 cifre che viene incrementato dopo ogni trasmissione del gruppo di dati nella memoria Alibi. Il valore iniziale viene può essere fissato dall'indicatore (valore iniziale = 1) oppure dall'utente. Supponiamo per esempio che sia stata sostituita una piattaforma di pesata difettosa da parte dei tecnici del Service, l'utente può fare in modo che, mediante l'immissione del valore iniziale del numero di transazione, si continui a mantenere il gruppo numerico finora impiegato.

#### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Impostazioni», sezione «Prospetto del Setup» e il manuale di Service per le balance complete e gli indicatori Combics).

- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

## Più volte l'Help di linea ↵

SETUP	STRUMENTO	S
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		
Protocollo di stampa		
Parametri operativi		
Ora		
Password		
Manutenzione		
<b>Numero memoria</b>		
Dati terminale		
<<	<	>

## Help di linea ➤

SETUP	STRUMENTO	NR. MEM.	S
Nr. memoria:		<b>1</b>	

## Help di linea <

SETUP	STRUMENTO	S
<b>Piattaforma di pesata 1</b>		
COM 1		
COM 2		
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		

## Più volte l'Help di linea ↵

SETUP	STRUMENTO	S
UniCOM		
Entrata di controllo		
Codice a barre		
Protocollo di stampa		
Parametri operativi		
Ora		
Password		
Manutenzione		
<b>Numero memoria</b>		
<b>Dati terminale</b>		
<<	<	>

## Help di linea ➤

SETUP	STRUMENTO	TERMINALE	S
Nr. di serie:		<b>12345678</b>	
Modello:		<b>CW3P1-6ED-LCE</b>	

## Help di linea <

## Help di linea <

< oppure **SETUP**

Richiamare la voce di menù **Numero memoria**.

Aprire la voce di menù **Numero memoria**.

Si visualizza il campo per l'immissione della data di Service.

### Navigare nel menù: immissione/modifica dei parametri

Vedi a riguardo le spiegazioni nell'esempio 1 della sezione «Convertitore A/D» nel capitolo «Sistema di funzionamento».

Registrare il nuovo valore iniziale per il numero di transizione e confermare con l'Help di linea ↵.

Ritorno al menù dei parametri dello strumento.

### Registrazione del numero di serie e del nome del modello

Dopo una sostituzione della scheda digitale si devono registrare il numero di serie e il nome del modello dell'indicatore oppure dello strumento completo nell'indicatore.

### Preparazione

(vedi anche il capitolo «Impostazioni», sezione «Prospetto del Setup» e il manuale di Service per le bilance complete e gli indicatori Combics).

- Impostare il modo di Service e richiamare la voce di menù **Parametri dello strumento** (vedi la sezione corrispondente all'inizio di questo capitolo).

Richiamare la voce di menù **Dati terminale**.

Aprire la voce di menù **Dati terminale**.

Si visualizza il campo per l'immissione della data di Service.

### Navigare nel menù: immissione/modifica dei parametri

Vedi a riguardo le spiegazioni nell'esempio 1 della sezione «Convertitore A/D» nel capitolo «Sistema di funzionamento».

Registrare il numero di serie nel campo «Nr. di serie» e confermare con l'Help di linea ↵. La barra di selezione viene posta automaticamente sul campo «Modello» (nome del modello).

Registrare il nome del modello nel campo «Modello» e confermare con l'Help di linea ↵.

Ritorno nel menù dei parametri dello strumento.

Ritorno nel menù di Setup nel modo di Service.

Ritorno nel normale modo operativo di pesata.



# Messaggi di errore

I messaggi di errore sono visualizzati sul display principale. I messaggi di errore **ERR** sono visualizzati sul display in modo permanente; i messaggi **INF** sono visualizzati per 2 secondi, poi il programma ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

Codice/messaggio di errore	Causa	Soluzione
ERR 101 - 104	Tasto inceppato Premere un tasto all'accensione	Sbloccare il tasto oppure Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica
ERR 320	Memoria del programma operativo difettosa	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
ERR 335	Piattaforma di pesata omologata non compatibile con il terminale collegato	Collegare la piattaforma di pesata adatta
ERR 340	Parametro operativo (EEPROM) difettoso	Spegnere e riaccendere la bilancia; se permane il codice di errore Err 340: rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
ERR 341	Perdita di dati dalla RAM, batterie ricaricabili scariche	Lasciare acceso lo strumento per almeno 10 ore
ERR 343	Perdita di dati nella memoria per i numeri di transazione nei moduli della memoria Alibi esterna	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
INF 01 «Sovraccarica del display»	L'uscita dati non è compatibile con il formato di uscita	Cambiare la configurazione nel Setup del menù
INF 02 «Err. punto zero all'avvio calib.»	La condizione di calibrazione/regolazione non è stata rispettata, per es. la bilancia non è stata tarata oppure il piatto di pesata è carico	Calibrare/regolare solo dopo l'azzeramento del display Scaricare la bilancia Premere $\rightarrow T \leftarrow$ per tarare
INF 03	La calibrazione/ regolazione non si è potuta concludere in un certo intervallo di tempo	Attendere il tempo di riscaldamento e ripetere la regolazione.
INF 06 «Peso interno mancante o difettoso»	Peso di calibrazione/regolazione interno difettoso	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
INF 07 «Funz. non permessa p. bil. verif.»	Funzione non ammessa sulle bilance omologate per l'uso in metrologia legale	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius per informazioni sulle modifiche delle impostazioni
INF 08	Il carico sulla bilancia è troppo pesante per eseguire l'azzeramento	Controllare se è impostato «Campo di azzeramento iniziale».
INF 09	La taratura non è possibile se il peso lordo è $\leq$ zero	Azzerare la bilancia
INF 10	Tasto di tara è bloccato se ci sono dati nella memoria di tara	Si devono cancellare i dati memorizzati per il programma applicativo (cancellare la memoria) prima di tarare.
INF 22	Errore nella memorizzazione del valore di riferimento, carico troppo leggero	Collocare sulla bilancia un campione più pesante
INF 23 «Errore all'inizializ. applicaz.»	Errore durante l'inizializzazione di una applicazione	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
INF 29 «Carico minimo bil. non raggiunto»	Non è stato raggiunto il carico minimo	Definire un valore più basso per il carico minimo (sotto Applicazione: Carico minimo per inizializzazione automatica)
INF 71 «Valore non accettato», «Valore troppo piccolo/grande» oppure «Selezione non possibile»	Non si può memorizzare il valore di peso attuale (per es. i limiti di controllo sono troppo bassi o troppo alti)	Nessuna
INF 72 «Quantità massima raggiunta»	Non si può memorizzare il valore di peso attuale (per es. il contatore di transizioni ha raggiunto il suo massimo)	Nessuna
INF 73 «Contenuto memoria cancellato/memoria non disponibile»	I dati sono stati cancellati o non sono leggibili	Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius
INF 74 «Funzione non disponibile» oppure «Funzione bloccata»	La funzione è bloccata (per es. il menù è bloccato)	Nessuna
INF 88 «Funzione attivata»	Una funzione è stata attivata	Nessuna
INF 98	Nessuna piattaforma di pesata collegata	Collegare la piattaforma di pesata
INF 99	Nessuna piattaforma di pesata collegata	Collegare la piattaforma di pesata
NO WP	Nessuna piattaforma di pesata collegata	Collegare la piattaforma di pesata

### Service

Una regolare manutenzione dello strumento da parte del Servizio di Assistenza Tecnica Sartorius garantisce una continua precisione di misurazione. Sartorius può offrire contratti di manutenzione con ogni tipo di frequenza, da un mese, fino a due anni. La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni di funzionamento e dalle richieste di tolleranza dell'utente.

### Riparazioni

- ⚠ Lo strumento difettoso deve essere subito staccato dalla rete elettrica. Le riparazioni devono essere eseguite solo da parte personale specializzato autorizzato Sartorius e impiegando ricambi originali Sartorius. In caso di riparazioni non idonee possono insorgere dei pericoli rilevanti per l'operatore. Se l'indicatore è in garanzia, rispedire lo strumento completo di tutto.

- ⚠ Sostituire completamente i cavi o i raccordi a vite del cavo che sono difettosi o danneggiati.

- ⚠ Non aprire l'indicatore quando è sotto tensione! Dopo aver staccato la tensione, aspettare almeno 10 secondi prima di aprirlo. Dato che le superfici di posizione sulle parti dell'alloggiamento influiscono sul livello di protezione IP, lo strumento deve essere aperto e chiuso solo da personale qualificato.

### Pulizia

Gli indicatori soddisfano le direttive di EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) per quanto riguarda le misure di prevenzione contro le contaminazioni. Per questo possono essere puliti e disinfettati facilmente.

- ⚠ Staccare l'indicatore dall'alimentazione e, se collegato, anche il cavo per la trasmissione dei dati.

- ⚠ Non deve entrare liquido all'interno dell'indicatore.

- ⚠ Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili).

- Pulire l'indicatore con un panno leggermente inumidito con acqua saponata.
- Per l'impiego nell'industria alimentare, usare dei detergenti adatti.
- Asciugare l'indicatore con un panno morbido.
- ⚠ Non è ammesso l'uso di acqua a getto o aria compressa.

### Pulizia delle superfici in acciaio inossidabile

Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile in intervalli regolari. Togliere il piatto di carico per poterlo pulire a fondo. Per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile della bilancia, utilizzare dei detergenti appositi disponibili in commercio e un panno umido o una spugna. Strofinare leggermente tutte le superfici in acciaio inossidabile e poi sciacquare a fondo per togliere ogni residuo. Lasciare asciugare lo strumento. Per una maggiore protezione si può applicare un olio di manutenzione.

L'uso di solventi deve essere limitato esclusivamente alla pulizia delle parti in acciaio inossidabile.

### Cambio della copertina antipolvere

- Cambiare la copertina antipolvere danneggiata.
- Premere la nuova copertina antipolvere sulla parte anteriore e posteriore dell'indicatore lungo il bordo, finché si fissa.

### Controllo di sicurezza

La sicurezza operativa dello strumento non è più garantita quando

- lo strumento oppure il cavo di collegamento alla rete presenta segni visibili di danneggiamento,
- l'alimentatore incorporato nell'indicatore non funziona più correttamente,
- lo strumento è stato conservato per lungo tempo in condizioni ambientali non adatte (per es. ambiente molto umido),
- dopo forti sollecitazioni dovute al trasporto.

In questi casi, procedere come segue:

- Staccare lo strumento dalla rete elettrica e
- assicurarlo contro un eventuale utilizzo
- Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius.

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale specializzato che ha accesso alla documentazione e alle istruzioni per la riparazione necessarie, e ha partecipato ai relativi corsi di formazione.

- ⚠ I sigilli adesivi posti sullo strumento indicano che questo può essere aperto e sottoposto a manutenzione, solo da parte di tecnici specializzati e autorizzati, al fine di garantire un funzionamento perfetto ed affidabile dello strumento ed il mantenimento dei diritti di garanzia.

L'imballaggio degli strumenti Sartorius garantisce una protezione sicura durante il trasporto. L'imballaggio consiste completamente di materie non inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie pregiate che possono essere portate al centro locale di riciclo e di smaltimento dei rifiuti. Lo stesso vale anche per gli strumenti non più in uso.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte prima della rottamazione dello strumento. Le batterie ricaricabili appartengono alla categoria dei rifiuti speciali.

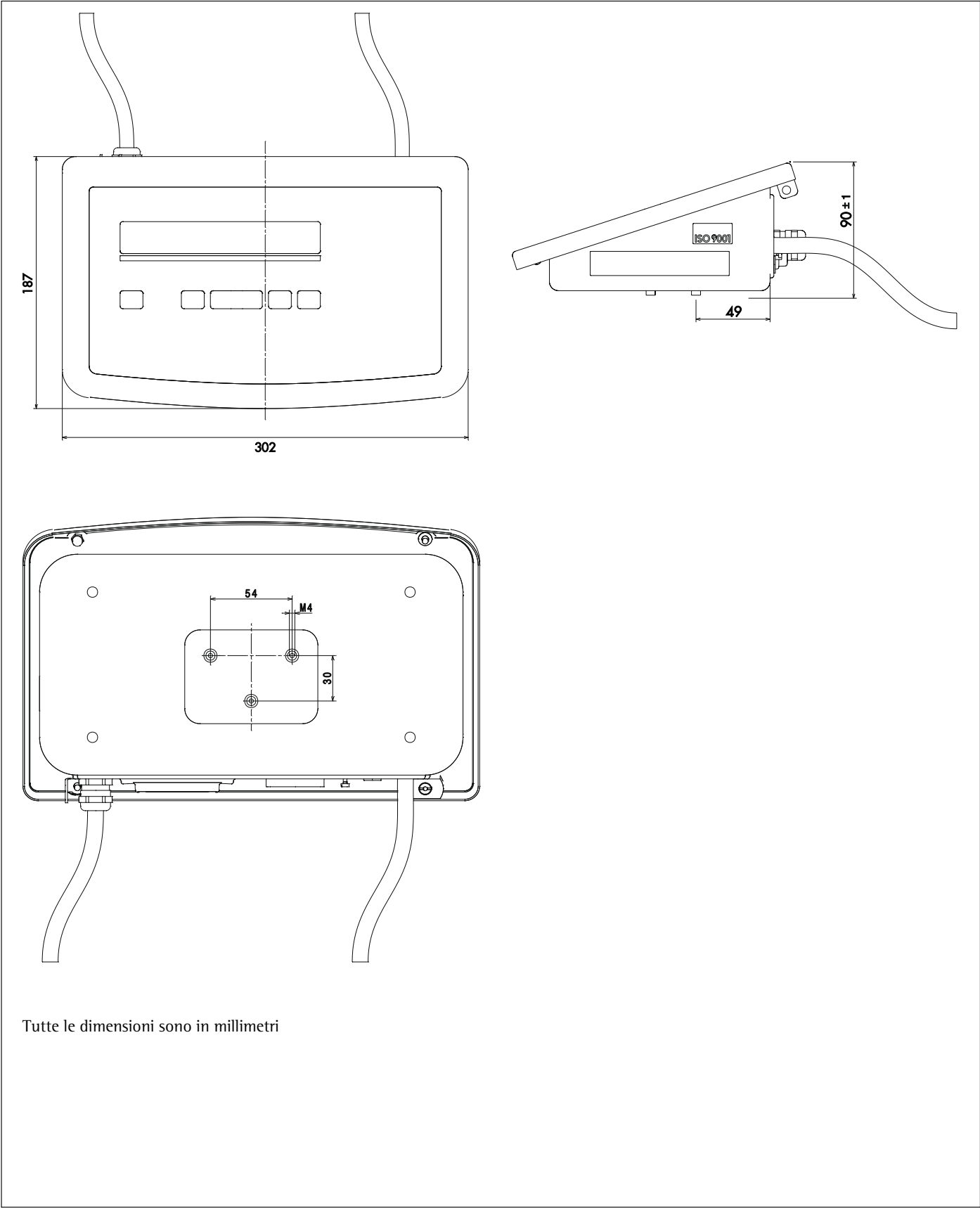
Per maggiori informazioni sulle possibilità di smaltimento/riciclaggio, rivolgersi all'azienda comunale.

# Prospetto

## Dati tecnici

Impiego non soggetto alla metrologia legale:	
- Numero delle divisioni	≤ 31250 d
Impiego in metrologia legale:	
Classe di precisione	III, IIII
Numero delle divisioni di verifica per l'impiego come	
- bilancia con campo di pesata unico	≤ 3125e
- bilancia a divisioni plurime massimo e1	≤ 3125e 6250e
- bilancia a campi plurimi	≤ 3125e
Collegamento delle celle di carico:	
- Tensione di alimentazione	9 V (± 4,5 V)
- Impedenza del ponte	83 Ω fino a 2000 Ω
- Tecnica a sensori disponibile	a 6 o a 4 conduttori
Per l'impiego in metrologia legale:	
- Tecnica a sensori disponibile	a 6 conduttori
- Lunghezza del cavo max. per sezione di cavo	150 m/mm <sup>2</sup>
- Tensione minima di ingresso per P <sub>ind</sub> = 0,5	≥ 0,720 μV/e
- Tensione minima di ingresso per P <sub>ind</sub> = 0,3	≥ 1,200 μV/e
- Frazione dell'errore massimo tollerato per questo modulo:	
per Delta U <sub>min</sub> ≥ 0,720 μV/e	0,5
per Delta U <sub>min</sub> ≥ 1,200 μV/e	0,3
Dati di funzionamento del convertitore analogico/digitale incorporato	
- Campo di pesata:	fino a 32 t
Segnale di misura	0,45 mV fino a 36 mV
Segnale di misura per il carico morto	0,45 mV fino a 6,3 mV
Variazione d'entrata del segnale analogico	4,5 mV fino a 29,7 mV
Risoluzione	max. 4 milioni di digit (interna)
Interfaccia digitale senza effetto retroattivo	conforme a EN45501
Interfaccia dati	Interfaccia RS232 bidirezionale RS232 «COM1» con uscite di controllo (5V, standard TTL), incorporata di serie
	Interfaccia bidirezionale «COM2» come RS232, RS422 oppure RS485 incorporata di serie
Interfaccia dati aggiuntiva	opzionale
Display	108 × 58 mm display grafico, retroilluminato, pixel: 248 × 128
Alloggiamento:	
- materiale	Acciaio inossidabile AISI 304
- classe di protezione conforme a EN60529	CISL3: IP44 (opzionale IP65) CIS3: IP67
Campo di temperatura	-10 °C fino a +40 °C
Alimentazione	100-240 VAC (-15/+10%), 50-60Hz, max. 17W / 23 VA opzionale 15,5-24 VDC (±10%), max. 12 W opzionale 13-17 VAC (±10%), 50-60 Hz, max. 12 W tramite unità di batterie esterne YBR10Z
Limitazione dell'emissione di disturbo	conforme a EN61326+A1 classe B (IEC 61326+A1)
Immunità ai disturbi	conforme a EN61326+A1, ambiente industriale (IEC 61326+A1)
Sicurezza elettrica	conforme a EN61010-1 (IEC 1010-1) EN60950 (IEC 950)

Dimensioni (disegni quotati)



## Accessori

### Articolo

### Codice

Copertina di protezione (2 pezzi)

YDC01CI

Modulo di interfaccia (RS232) per l'interfaccia UniCOM

YD001C-232

Modulo di interfaccia (RS485/422) per l'interfaccia UniCOM

YD001C-485

Modulo di interfaccia Profibus-DP per l'interfaccia UniCOM

YD001C-DP

Uscita di corrente analogica, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 16 bit \*

YDA01C-20MA



Stampante su striscia e di etichette, omologabile, con meccanismo di stampa termica, larghezza della carta di 60 mm con cavo di collegamento (connettore maschio rotondo a 12 pin) e alimentatore esterno.

YDP04IS-OCE-UV

Richiesto il cavo di adattamento YCC01-01CISLM3 per indicatori Combics, modello CISL.

Richiesto il cavo di adattamento YCC02-R12F6 per indicatori Combics, modello CIS.

- 3 rotoli di carta per YDP04/12IS, 60 mm x 75 m, carta termica
- Etichette per YDP02/04IS, piccole, 58 mm x 30 mm, 1000 pezzi
- Etichette per YDP02/04IS, medie, 58 mm x 76 mm, 500 pezzi
- Etichette per YDP02/04IS, grandi, 58 mm x 100 mm, 350 pezzi

69Y03090


69Y03092

69Y03093

69Y03094

Cavo per il collegamento diretto di YDP04/12IS agli indicatori Combics, modello CISL

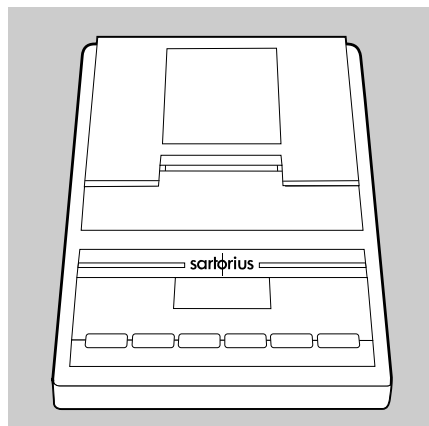YCC01-01CISLM3



Stampante dati omologabile con data, ora e programma statistico e display LC.

YDP03-OCE

- Rotoli di carta per stampante, 5 pezzi da 50 m
- Cartuccia del nastro inchiostro (ricambio)

6906937

6906918



Stampante su striscia e di etichette, verificabile, con meccanismo, di stampa termica, larghezza della carta di 101 mm, con cavo di collegamento (connettore maschio rotondo a 12 pin) e alimentatore esterno.

YDP12IS-OCE-UV

**Per la messa in funzione della stampante YDP12IS è necessario il software PC «Sartorius Nice Label Express»!**

Richiesto il cavo di adattamento YCC01-01CISLM3 per indicatori Combics, modello CISL.

Richiesto il cavo di adattamento YCC02-R12F6 per indicatori Combics, modello CIS.

- 1 rotolo di carta YDP12IS, 101 mm x 75 m, carta termica
- Etichette per YDP02IS, extra grandi, 101 mm x 75 mm, 305 pezzi

69Y03196

69Y03195

\* I dati emessi non sono da usarsi in metrologia legale

Articolo	Codice
Unità di batterie ricaricabili esterna, durata di funzionamento, di 40 h, apparecchio di ricarica compreso	YRB10Z
Display rosso/verde/rosso esterno per indicatori Combics, modello CISL	YRD11Z
Display supplementare per indicatori Combics CISL *	YRD02Z
Display a distanza, a 7 segmenti, altezza delle cifre fino a 45 mm *	Su richiesta
Lettore di codici a barre, larghezza di lettura 120 mm, con cavo di collegamento agli indicatori Combics 2	YRB02CISL YBR02FC
- per il modello Combics CISL	
- con cavo di adattamento YCC02-R12F6 per il modello Combics CIS	
Comando a pedale, connettore a T compreso, a 25 pin DSUB	YFS01
Comando a mano, connettore a T compreso, a 25 pin DSUB	YHS02
Memoria Alibi esterna per la memorizzazione elettronica dei dati di pesata	YAM01IS
Dispositivo di lettura per il caricamento dei dati di pesata dalla scheda di memoria Alibi YAM13IS in un PC	YAM02IS
Alimentatore per la memoria Alibi YAM01IS oppure YAM02IS	YAM11IS
Scheda di memoria per YAM01IS	YAM13IS
Cavo di collegamento di un indicatore Combics alla memoria Alibi YAM01IS	YCC01-10CIM3
Cavo di collegamento (a 9 pin D-Sub) tra YAM01IS e un PC	69EM0012
Regolatore di dosaggio per pompe con interfaccia analogica o di impulsi	YFC02Z-V2
Configurazione flessibile dei fogli di stampa (per es. codice a barre, altezza dei caratteri variabile, inserimento di grafici e simili)	Su richiesta
Driver della bilancia WinScale Sartorius per Windows 95/98/2000/NT con visualizzazione dei valori di misura attuali e memoria dati per PC, omologabile. Richiesto il cavo di collegamento YCC01-09ISM5 per RS232 (cavo di collegamento per RS485 su richiesta).	YSW03
Programma SartoConnect per PC (per il trasferimento dei dati di pesata in un PC con sistema operativo Windows 95/98/NT e la diretta elaborazione mediante programmi applicativi Excel, ACCESS,...), incluso il cavo di collegamento (1,5 m) tra bilancia e PC (12/9 pin).	YSC011
Kit di installazione per intelaiature per fosse (collegamento separabile con l'indicatore)	YAS99I
Pacchetto di configurazione Combics per le impostazioni del menù *	YAD03CW
Kit di espansione, IP65, per gli indicatori con protezione IP44, Combics CISL	YAS01CISL
Supporto per parete in acciaio inossidabile	YDH02CIS
Supporto da pavimento	YDH03CIP
Supporto da pavimento in acciaio inossidabile	YDH03CIS
Base della colonnina	YBP03CIP
Base della colonnina in acciaio inossidabile	YBP03CIS

\* non impiegabile in metrologia legale

Articolo	Codice
Supporto per il lettore di codici a barre da fissarsi su: supporti, da pavimento, colonnine per il banco da lavoro, colonnine per bilance complete	YBH01CWS
Piastra per fissare la stampante ai supporti da pavimento, alle colonnine del banco da lavoro	YPP01CWS
Set di rotelle girevoli per la base della colonnina YBP03CIP/S, con 2 rotelle di guida e 2 rotelle con dispositivo di blocco	YR003CI
Dispositivo antifurto	YTP01CI
Modulo alimentatore industriale 24 V*	YAS02CI
Cavo di collegamento (a 25 pin D-SUB) per l'unità delle batterie ricaricabili YRB10Z (2 m)	YCC02-RB01
Cavo di collegamento con pressacavo per l'unità delle batterie ricaricabili YRB10Z (2 m) (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-RB02
Cavo di collegamento con pressacavo per la batteria di automobile (2 m) (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-CB02
Cavo di collegamento con pressacavo per il lettore di codice a barre YBR02FC (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-BR02
Cavo di collegamento con pressacavo, connettore maschio, a 9 pin D-SUB, 6 m (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-D09M6
Cavo di collegamento con pressacavo, con connettore femmina, a 9 pin D-SUB, 6 m (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-D09F6
Cavo di collegamento con pressacavo, con connettore femmina, a 25 pin D-SUB, 1,5 m (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-D25F6
Cavo di collegamento con pressacavo, per connettore maschio, rotondo a 12 pin, 6 m (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-R12M6
Cavo di collegamento con pressacavo, per connettore femmina, rotondo a 12 pin, 1,5 m (solo per i modelli Combics CIS)	YCC02-R12F6
Cavo per uscita di corrente analogica YDA01C-20MA, con estremità del cavo aperte, per es. 5 x = 5 m *	6906926
Pressacavo per il modello Combics CIS, IP65/67 (solo per i modelli Combics CIS)	YAS04CIS

### Collegamento delle piattaforme di pesata IS a Combics 3

Una piattaforma di pesata IS può essere collegata a 2.

Caratteristiche:

- Le piattaforme di pesata IS possiedono un proprio processore di elaborazione dei dati di misura
- La regolazione interna è possibile.
- Modelli IS...-OCE: hanno un proprio numero di approvazione con targhetta affissa al cavo.
- Valgono le condizioni descritte nel manuale di istruzioni per la piattaforma di pesata collegata.

\* non impiegabile in metrologia legale

# Dichiarazioni di Conformità

Nel 1985 il Consiglio delle Comunità europee ha approvato un piano per l'armonizzazione tecnica e la standardizzazione delle normative nazionali. L'organizzazione per il controllo del marchio CE conformemente alle direttive e norme europee viene disciplinata, nei singoli Stati membri dell'UE, convertendo la normativa europea nel diritto nazionale (leggi). Nel dicembre 1993 la validità di tutte le direttive CE è stata estesa a tutti gli stati membri dell'Unione Europea e agli stati firmatari dello Spazio Economico Europeo.

La società Sartorius applica le direttive e gli standard europei per poter offrire degli strumenti al passo con la più moderna tecnologia e assicurare la massima durata nel tempo.

Il marchio **CE** può essere applicato solo agli strumenti per pesare e alle apparecchiature relative che soddisfano le seguenti direttive:

## **Direttiva 89/336/CEE «Compatibilità elettromagnetica (EMC)».**

Norme europee relative:

### 1. Compatibilità elettromagnetica:

#### 1.1 Riferimenti a 89/336/CEE: Gazzetta Ufficiale CE n° 2001/C105/03

EN 61326-1 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio

Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica

Parte 1: Prescrizioni generali  
Standard di immunità ai disturbi:  
Ambiente industriale, funzionamento sottoposto a controllo non continuo  
Limitazione dell'emissione di disturbo: Ambiente residenziale, classe B

## **Avvertenza:**

L'utente risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all'indicatore (non sono ammesse modifiche sullo strumento soggetto alla verifica metrologica) così come della realizzazione di collegamenti con cavi o dispositivi di altri costruttori. Su richiesta, Sartorius mette a disposizione informazioni riguardanti le caratteristiche minime di funzionamento degli apparecchi (secondo le norme sull'immunità ai disturbi).

## **Direttiva 73/23/CEE «Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione».**

Norme europee relative:

EN 60950 Sicurezza per apparecchi della tecnologia di informazione comprendenti macchine per ufficio elettriche

EN 61010 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Qualora vengano usati dispositivi elettrici in installazioni e in condizioni ambientali che richiedono maggiori standard di sicurezza, bisogna conformarsi alle prescrizioni contenute nei regolamenti specifici per l'installazione vigenti nel Paese.

## **Bilance per l'impiego in metrologia**

### **legale: Direttiva 90/384/CEE**

### **«Strumenti per pesare a funzionamento non automatico»**

Questa direttiva regola la determinazione della massa in metrologia legale. Per la dichiarazione di conformità relativa alle bilance verificate Sartorius con certificato di approvazione CE del tipo, vedasi il manuale d'istruzioni della piattaforma di pesata collegata, oppure il «Manuale per la verifica di strumenti per pesare». Questa direttiva regola anche l'applicazione della verifica CE da parte del fabbricante, nella misura in cui si tratti di un apparecchio con approvazione CE del tipo ed il fabbricante sia accreditato per queste attività presso un Organismo Notificato dalla Commissione delle Comunità europee. Le basi legali che permettono alla società Sartorius di eseguire la verifica iniziale sono la Direttiva europea n° 90/384/CEE per gli strumenti di pesata a funzionamento non automatico e il certificato di riconoscimento del sistema di gestione per la qualità della società Sartorius AG, rilasciato in data 15.02.93 dal dipartimento di metrologia «Eichwesen» del «Landesverwaltungsamt» della Bassa Sassonia Germania. Per ulteriori informazioni in merito al marchio CE sugli strumenti e sui regolamenti vigenti a livello nazionale, prego rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Sartorius o al Vostro rivenditore Sartorius.

## **«Verifica CE»: un servizio della Sartorius**

Il nostro personale autorizzato per la verifica CE\* può eseguire tale verifica sul luogo di installazione della vostra bilancia all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati firmatari dello Spazio Economico Europeo.

### **Servizio «Nuova installazione»**

La verifica prima CE\* fa parte del nostro pacchetto-cliente: «Nuova installazione». Vi offriamo, oltre alla verifica iniziale, una serie di prestazioni importanti che Vi garantiscono un lavoro che soddisfa:

- Installazione
- Messa in funzione
- Controllo
- Istruzioni
- Verifica prima

Se desiderate che la verifica prima venga fatta dalla società Sartorius, prego rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Sartorius o al Vostro rivenditore Sartorius.

### **Verifiche periodiche nei Paesi europei**

La durata della validità della verifica dipende dalle direttive nazionali vigenti nei Paesi dove la bilancia viene utilizzata. Se desiderate ottenere informazioni riguardo alla regolamentazione attualmente in vigore nel Vostro Paese e al personale di competenza che potete contattare, non esitate a rivolgerVi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius.

Per ulteriori informazioni sul tema «Verifica», potete contattare i Centri Assistenza Tecnica Sartorius o il Vostro rivenditore Sartorius

\*= in conformità alla certificazione della società Sartorius AG.





# Konformitätserklärung zur Richtlinie 90/384/EWG *Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 90/384/CEE*

nichtselbsttätige elektromechanische Waagen  
*strumenti per pesare elettromeccanici a funzionamento non automatico*

(Alle Daten sind in den Prüfberichten, Bauartzulassungen oder den betroffenen Geräten selbst zu entnehmen)  
*(Tutti i dati sono da prendere dai certificati di prova, dai certificati di approvazione del tipo o dagli strumenti in questione)*

Auswerte- gerät <i>Indicatore</i>	Typ Auswerte- gerät <i>Tipo di indicatore</i>	Typ Waage <i>Tipo di strumento per pesare</i>	Genauig- keitsklasse <i>Classe di precisione</i>	EG-Bauart- zulassung Nr. <i>N°del Certificato di Approvazione CE°</i>	Prüfschein Nr. Auswertegerät <i>N°del Certificato di prova del indicatore</i>
CI...	TN	SARTICS	III IIII	D04-09-015	D09-03.13
CIX...	TN-X	SARTICS	III IIII	D04-09-015	D09-03.13

## **Elektromechanische Waage**

Die Konformitätserklärung gilt, wenn:

- das Auswertegerät als unverändertes Originalmodul verwendet wird.
- die Kompatibilität der Module über das mitgelieferte Programm "KOMPMOD.xls" bestätigt und vom Waagenbauer unterschrieben wurde.
- eine Benannte Stelle der EU geprüft und in einer Konformitätsbescheinigung bestätigt hat:
  - \* die Übereinstimmung der im Formular (Programm) gemachten Angaben mit Waage und EG-Bauartzulassung.
  - \* die Richtigkeit der Aufschriften auf dem Kennzeichnungsschild
  - \* die Prüfung der Waage nach EN 45501 Punkt 8.2
- die Benannte Stelle das Kennzeichnungsschild mit der grünen Klebmarke mit dem Messtechnik-M und ihrer Nummer ausgerüstet und die in der EG-Bauartzulassung geforderten Stellen mit ihren Sicherungsmarken verschlossen hat.

Sartorius AG  
37070 Göttingen, Deutschland / Repubblica Federale Tedesca  
Göttingen, 01.11.2004

Dott. G. Maaz  
(Spartenleitung Mechatronik)  
(Presidente della Divisione Meccatronica)

J. Rehwald  
(Leitung Produktion Mechatronik / Wägetechnik)  
(Direttore di produzione delle Divisioni Meccatronica  
/ Tecnologie di Pesatura)

## **Strumento per pesare elettromeccanico**

La Dichiarazione di Conformità si può applicare se:

- l'indicatore è impiegato come modulo originale inalterato.
- la compatibilità dei moduli è confermata dal programma fornito "KOMPMOD.xls" e firmata dall'assemblatore della bilancia.
- un Organismo Notificato dell'UE ha eseguito il controllo e ha confermato in un proprio Certificato di Conformità quanto segue:
  - \* le informazioni e le specifiche nel modulo (programma) sono conformi a quelle dello strumento per pesare e del Certificato di Approvazione CE del Tipo.
  - \* le iscrizioni sull'etichetta di identificazione sono corrette
  - \* il controllo dello strumento per pesare è stato eseguito in conformità a EN 45501, sezione 8.2
- l'Organismo Notificato ha applicato all'etichetta di identificazione il marchio verde metrologico «M» e il suo numero di registrazione, e ha sigillato i posti richiesti nel certificato di approvazione CE del tipo con i sigilli di protezione.

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



## EG-Bauartzulassung

*Certificato di Approvazione CE del Tipo*

Emesso da: Sartorius AG

Weender Landstraße 94 – 108  
37075 Göttingen

Ai sensi del: § 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 1992 (Gazzetta ufficiale p. 711), modificato per la ultima volta il 25 novembre de 2003 (Gazzetta ufficiale. p. 2304) concernente l'attuazione della direttiva 90/384/CEE, modificata per 93/68/CEE

Per: Strumento per pesare elettromeccanico non automatico con  
o senza leve  
SARTICS  
Max 0,5 kg ... 300 t  
Opzione: Strumento con campi plurimi / con divisioni plurime  
(III)  $n \leq 6250$   
(IIII)  $n \leq 1000$

Numero di approvazione: **D04-09-015 1<sup>a</sup> Revisione**

Valido fino al: 07.04.2014

Numero di pagine: 12

Numero di riferimento: PTB-1.12-4014622

Organismo notificato: 0102

Braunschweig, 18.10.2004

Per ordine

Link

timbro

### Versione italiana

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der EG-Bauartzulassung ist. Hinweise und eine Rechtsbehelfsbelehrung befinden sich auf der ersten Seite der Anlage

Le caratteristiche principali, le condizioni di approvazione e le disposizioni vengono illustrate nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente certificato di approvazione. Note e informazioni legali, vedi prima pagina dell'Allegato.

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



## Prüfschein

*Certificato di prova*

Ausgestellt für:

*Rilasciato a:*

Sartorius AG

Weender Landstraße 94 – 108

37075 Göttingen

Germania

Prüfgrundlage:

*Ai sensi del:*

EN 45501 (1992), Nr. 8.1, WELMEC-Dokument 2.1 (2001) EWG

Richtlinie 90/384/EWG, OIML R 76-1

Gegenstand:

*Per:*

Anzeige- und Bedienterminal

*dispositivo indicatore ed controllo*

Typ:

*Tipo:*

TN, TN-X

Kennnummer:

*Numero di serie:*

---

Prüfscheinnummer:

*Certificato di prova numero:*

**D09-03.13 2. Revision / 2ª Revisione**

Datum der Prüfung:

*Data della prova:*

Anzahl der Seiten:

*Numero di pagine:*

9

Geschäftszeichen:

*Numero di riferimento:*

PTB-1.12-4017974

Benannte Stelle:

*Organismo notificato:*

0102

Im Auftrag

*Per ordine*

Braunschweig, 26.05.2005

Siegel

*Timbro*

Link

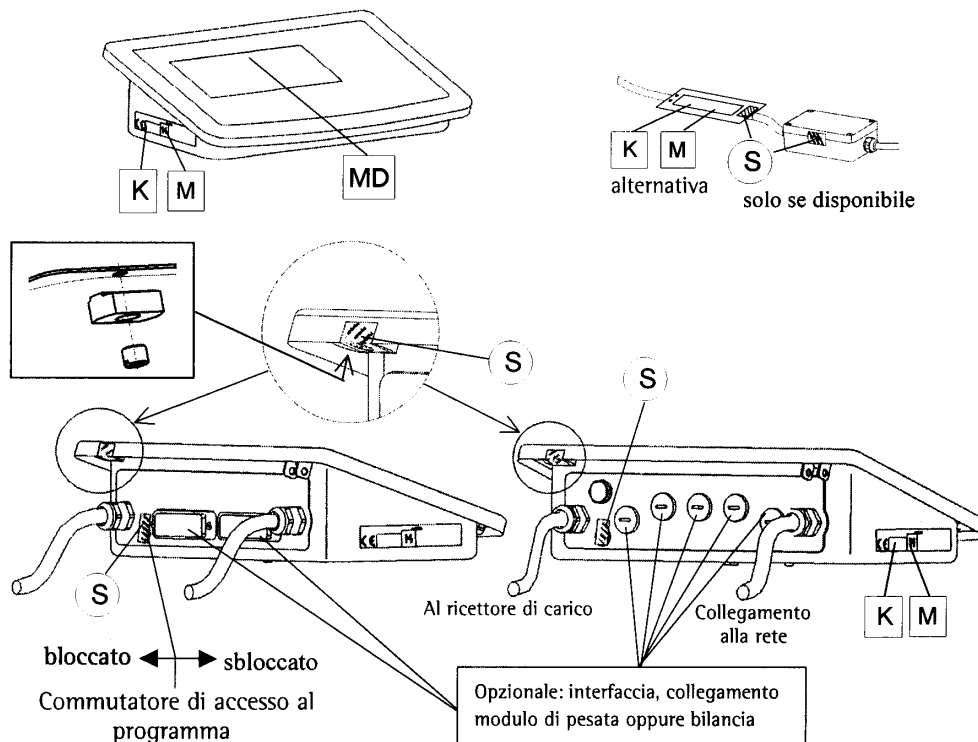
392 00 e-rb

### Versione italiana



Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheins ist.

*Per le note, vedere prima pagina dell' allegato che costituisce parte integrante del certificato di prova.*

## Etichette e Sigilli



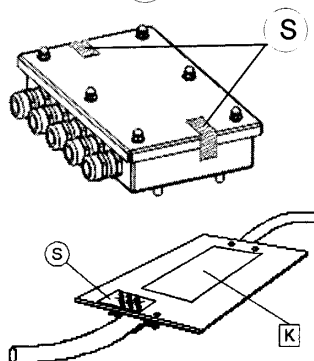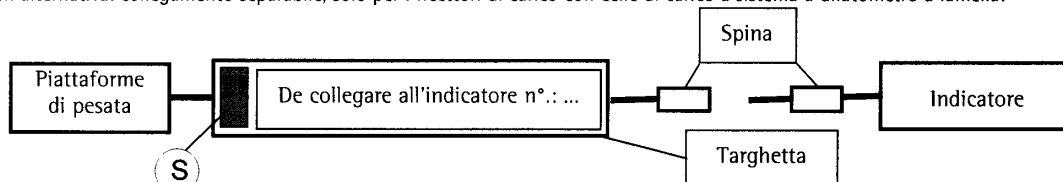In alternativa: collegamento separabile, solo per i ricettori di carico con celle di carico a sistema a dilatometro a lamella:



Se tra il ricettore di carico e l'unità di valutazione elettronica esiste un'unità di connessione del cavo, questa deve essere protetta contro una manipolazione non autorizzata.

Posto di applicazione alternativo per l'etichetta d'identificazione della bilancia. Procedura in questo caso:

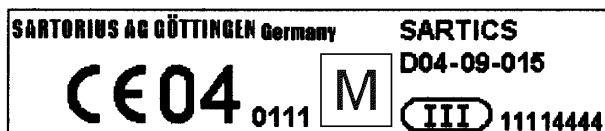
Attaccare l'etichetta di identificazione della bilancia sulla targhetta metrologica acclusa. Fissare la targhetta metrologica alla linea dati della bilancia vicino all'unità di visualizzazione e comando. Sul posto di fissaggio viene sigillata la targhetta metrologica da parte dei funzionari addetti alla verifica oppure da parte del personale autorizzato Sartorius.

- M** Marchio per la verifica CE (etichetta verde con M-metrologia)
- K** Etichetta d'identificazione con marchio CE


- S** Sigillo di protezione

- MD** Dati metrologici: Max, Min, e, (d)

Esempio di una etichetta d'identificazione dello strumento per pesare già omologato K



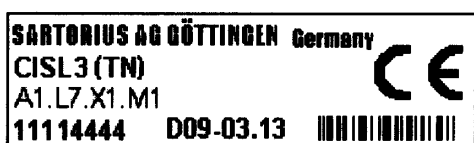Esempio di una targhetta del tipo ( indicatore ) T



## Allegato: Password generale

SETUP

2 volte l'Help di linea  $\nabla$ ,  
Help di linea  $\triangleright$

SETUP		PASSWORD	
Immettere password: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>			
<<	<		↓

Immettere le cifre

Help di linea  $\downarrow$

SETUP		STRUMENTO	
Piattaforma di mesata 1			
COM 1			
COM 2			
UniCOM			
Entrata di controllo			
Codice a barre			
Protocollo di stampa			
Parametri operativi			
Ora			
Password			
<<	<		>

Premere più volte l'Help di linea  $\nabla$ ,

Help di linea  $\downarrow$

SETUP		STRUMENTO		PASSWORD	
Password: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXX</span> ABC1					
<<	<				

Help di linea  $\ll$

Selezionare Impostazioni.

Selezionare **Parametri dello strumento** (oppure Parametri applicativi) e confermare

Appare la richiesta di immissione della password

Immettere la password generale (vedi sotto)  
Confermare la password

I parametri appaiono sul display

Leggere la vecchia password oppure immettere una nuova password (8 caratteri max.)

In caso, cancellare di nuovo la: password: premere il tasto  $\square$  oppure  $\square$ CF e memorizzare con l'Help di linea  $\downarrow$

Uscire da Setup

Riavvio dell'applicazione

**Password generale:**  
**40414243**

**Password Service:**  
**202122**

# Allegato: Manuale per la verifica di strumenti per pesare

## Attestato di compatibilità dei moduli per strumenti per pesare non automatici

Avvalendosi dei dati, documenti e programmi disponibili nel sito Internet Sartorius si possono creare i documenti necessari per la verifica di una bilancia per l'impiego in metrologia legale.

La stampa dei moduli compilati vale come documento per la verifica dello strumento per pesare prodotto dalla ditta costruttrice. Se il modulo è stato compilato in modo regolare e poi firmato da parte della ditta costruttrice, può essere presentato ai funzionari dell'Ufficio metrico insieme all'attestato di conformità disponibile sotto «Documenti».

Importanti per l'Ufficio metrico sono il certificato di approvazione CE del tipo, il certificato di prova oppure il verbale di prova. Inoltre per la cella di carico sono richiesti il certificato di prova e i dati del costruttore.

## Compilazione dell'attestato di compatibilità:

- Il manuale per la verifica insieme al file Excel, ai documenti e alle informazioni si trovano in Internet sotto [http://www.sartorius.com/leitfaden\\_eichen/](http://www.sartorius.com/leitfaden_eichen/)
- Creazione di un attestato di compatibilità senza accedere in Internet: Il «Manuale per la verifica» può essere ordinato come CD-ROM direttamente presso la Sartorius. Indirizzo di ordinazione:  
Sartorius AG  
Abt. Hotline  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen, Germania  
Telefono: 0551.308.4440  
Telefax: 0551.308.4449  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)
- Selezionare la lingua (fare clic sulla lingua corrispondente). Selezionare in alto l'indicatore desiderato.

## Funzionamento del programma

### File Leggimi

Prima di aprire il file Excel si dovrebbe leggere il file Leggimi che contiene informazioni importanti per l'utilizzo del file Excel ed inoltre dà delle indicazioni importanti per la compilazione dei documenti.

### Documenti

Aprendo il file «Documenti» si trovano tutti i documenti dell'indicatore importanti per l'attestato di compatibilità (fare clic sui link corrispondenti).

### Avvio

- Fare clic a sinistra su «Avvio Programma Excel».
- > Il programma Excel apre automaticamente il file Excel. L'utente deve disporre di un proprio programma Excel. Appare una finestra per la selezione delle macro.
- Fare clic su «Attivazione macro».
- > Nota: in base alla configurazione del computer la finestra può non apparire!

- All'utente è richiesto di compilare tutti i campi della pagina «Dati» (sfondo giallo)!
- > Un esemplare è disponibile nella cartella «Documenti». Allo stesso modo si trovano delle spiegazioni per i campi con sfondo giallo. Se la compilazione dei dati tecnici è stata fatta correttamente (secondo le indicazioni del costruttore), il programma calcola tutti i valori in modo automatico.

- La compilazione dei campi dovrebbe essere eseguita da un esperto. Nella seconda pagina, nei campi con sfondo rosso o verde, è visualizzata la compatibilità dei componenti (indicatore e cella(e) di carico): «Rosso» significa che non c'è compatibilità, «Verde» significa che c'è compatibilità. Avvertenza: la ditta costruttrice degli strumenti per pesare, che dai singoli componenti (indicatore e cella(e) di carico) configura una bilancia, è responsabile dei dati tecnici indicati nel documento!

- Se la compilazione dei dati è avvenuta in modo corretto (tutti i campi nella seconda pagina hanno uno sfondo verde), si possono stampare le due pagine. Salvare quindi il file con un nome a piacere e archivarlo (per es. nel PC).
- Controllare ancora una volta i dati indicati e poi firmare il documento.

## Avvertenze legali

### Copyright

Senza una autorizzazione scritta della Sartorius AG non è consentita la riproduzione o traduzione in parte o in tutto di questi documenti per altri fini. La Sartorius AG si riserva tutti i diritti, conformemente alla normativa sui diritti d'autore. L'acquirente può usare il programma solo per propri fini e non può essere ceduto a terzi né gratuitamente né a pagamento. Il software non può essere modificato, riprodotto, reingegnerizzato oppure riadattato.

Il programma utilizzato Excel per il controllo della compatibilità dei moduli è stato realizzato dalla commissione di lavoro dell'Ente tedesco di Metrologia e Verifica (Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Eichwesen, in breve AGME). Il programma è soggetto ad un continuo aggiornamento. La versione corrente è disponibile in Internet come freeware. Una modifica del programma è esplicitamente interdetta. L'utente si assume la responsabilità di un uso non idoneo del programma.

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen, Germania

Tel. +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Copyright by Sartorius AG,  
Goettingen, Repubblica Federale  
Tedesca.

Senza l'autorizzazione scritta  
della Sartorius AG non è  
consentita la riproduzione o  
traduzione in parte o in tutto.  
La Sartorius AG si riserva tutti  
i diritti, conformemente alla  
normativa sui diritti d'autore.  
Le informazioni e le illustrazioni  
contenute nelle presenti  
istruzioni sono aggiornate  
alla data sotto indicata.  
La Sartorius AG si riserva di  
apportare modifiche alla tecnica,  
alla dotazione e alla forma  
degli apparecchi rispetto alle  
informazioni e alle illustrazioni  
contenute nelle presenti  
istruzioni.

Data:  
settembre 2005, Sartorius AG,  
Goettingen, Germania